



Daily Oral Care 毎日のケア

歯と歯肉のケアをして健康に保つことはむし歯と歯周病の予防と治療の基本です。



セレクトコンパクト



セレクト [1段植毛]



スプリームコンパクト




スプリーム [2段植毛]



ノバ [先端段差植毛]



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

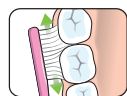

i バクテリアは歯の5つの面全て（内側、外側、かみ合わせ、歯と歯の間）に付着するので歯と歯の間のクリーニングが必要です。



オリジナル歯間ブラシ





アングル歯間ブラシ



ミニフロッサー

デンタルテープ

歯と歯の間のスペースが狭い場合はデンタルフロスやデンタルテープを使いましょう。

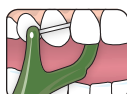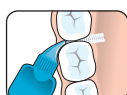

その他のアドバイス



お子さんが10歳くらいになるまでは必ず仕上げ磨きをしましょう。



のどが渇いた時には甘い飲み物ではなく水を飲みましょう。



フッ素が入った歯みがきペーストやマウスウォッシュを使いましょう。



1日に1回は歯と歯の間のクリーニングをしましょう。スペースがある場合は歯間ブラシが最も効果的な道具です。



定期的に歯ブラシを交換しましょう。ひと月に1回もしくは毛先が広がったら替え時です。



歯科医院で定期的なメンテナンスを受けましょう。



Made in Sweden



Dental expertise



Used worldwide



Environmentally responsible

テペの製品はデザインから製造まで、すべての行程がスウェーデンで行われています。北欧ならではのデザイン性の高さも、テペ製品の特長です。

スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの77.1%、歯間ブラシの82.3%はテペ製品です。*

* Nielsen, pharmacy total, MAT TY, 2015

テペのすべての製品は予防歯科先進国であるスウェーデンをはじめ、世界のデンタルプロフェッショナルとの密なコラボレーションにより設計されています。

スウェーデンの歯科衛生士の10人中9人がテペ歯間ブラシの使用を推奨しています。*

* IPSOS Healthcare, 2019-06-26.Brand Monitor Professionals

テペの製品は世界の80ヶ国以上の国で毎日のオーラルケアに使用されています。

テペは環境に優しい企業でありたいと願っています。ソーラーエナジー等の再生可能エネルギーを100%使用し、製造時のCO₂排出量を限りなく減らすことを目指しています。

また、CO₂の排出を95%リサイクルさせることが可能なバイオベース素材を使用したTePe GOOD シリーズを通してサステナブルな未来に貢献します。



TePe® テペ



Made in Sweden



TePe Oral Care Guide

テペ オーラルケアガイド



スウェーデン歯科衛生士会はテペ製品を推奨しています
種類の選択や使用方法については 担当の歯科医師や歯科衛生士にご相談ください



CrossField

テペ製品はクロスフィールド株式会社がお届けします

CrossField ▶ www.crossf.com



Oral care for Kids & teens 子供のケア

Basic 基本のケア



セレクトミニ
はじめての乳歯～未就学児



セレクトコンパクト
就学児～ティーンエイジャー



スプリームコンパクト
就学児～ティーンエイジャー



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします



Additional 追加のケア



コンパクトタフト
生えはじめの歯やむし歯に
なりやすい奥歯のミゾに



ミニフロッサー
歯と歯が接している場合の
ケアに

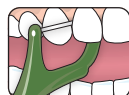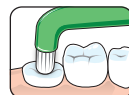

Caring for braces 矯正治療中のケア

Basic 基本のケア




セレクトコンパクト
セレクト



スプリームコンパクト
スプリーム




インプラント・矯正ブラシ
ワイヤーの上下からあてます

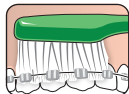


Additional 追加のケア



インタースペース
矯正器具のまわりに

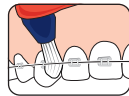

オリジナル歯間ブラシ

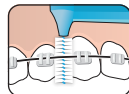

アングル歯間ブラシ
矯正器具のまわりに



ユニバーサルケア
舌側矯正や保定装置の
まわりに



Bleeding, swollen & inflamed gums 歯周病が気になる時のケア

Basic 基本のケア



セレクトコンパクト



セレクト



スプリームコンパクト



スプリーム



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします



歯と歯の間のクリーニングは、歯周病の予防と治療にとっても効果的です。
1日に1回は行いましょう。





オリジナル歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ




イージーピック

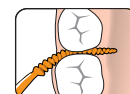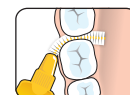

Additional 追加のケア



コンパクトタフト
歯と歯肉の境目に

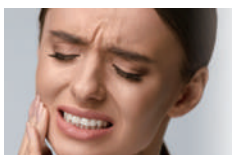

After surgery/sore gums 手術の後や 歯肉が痛む時のケア

* 手術後のケアに関しては担当の歯科医師や歯科衛生士の指示に従ってください。

Basic 基本のケア




スペシャルケアコンパクト



スペシャルケア



ジェントルケア

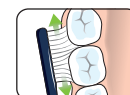


* とても柔らかい歯ブラシのシリーズです。
このシリーズは密毛のため、よくすすいで風通しの良い場所で保管してください。

Additional 追加のケア



エクストラソフト歯間ブラシ
通常の歯間ブラシよりもブラシが
やわらかいので、デリケートな
歯肉や手術の後に適しています。

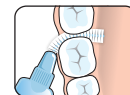

Caring for implants & Bridges インプラントやブリッジを 入れた時のケア

Basic 基本のケア



セレクトコンパクト




セレクト



スプリームコンパクト



スプリーム

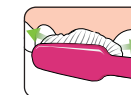

あまり力をかけずに
小さく前後に動かします



歯と歯の間のクリーニングは、インプラント周囲炎の予防と治療にとっても効果的です。1日に1回は行いましょう。




オリジナル歯間ブラシ



エクストラソフト歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ

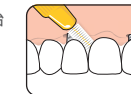

Additional 追加のケア



ユニバーサルケア
インプラントやブリッジ
の裏側のケアに



コンパクトタフト
インプラント体のまわりに



デンチャーブラシ
入れ歯のクリーニングに



Complementary products その他のケア

口臭が気になる時




タングクリーナー
口臭の原因となるバクテリアを取り除きます。
きれいに洗い流せるので長く清潔にご使用いただけます。


歯がねじれているところや親知らずに



ノバ

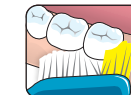

コンパクトタフト

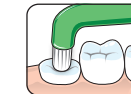

インタースペース
先端のチップが届きにく
いところにアクセスします

