

Dental World

cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌
デンタルワールド
www.crossf.com

31
2018 秋号

エルゴフィンガーとの出会い

フリーランス歯科衛生士 沢口 由美子・・・P1

当医院でのエルゴフィンガーの活用法

美しい治療ポジショニングとパフォーマンスの向上のために

医療法人 TDC たなか歯科クリニック Concept Clinic (名古屋市千種区) 院長 早川 尚子・・・P2

腰、肩、首に負担が少ないエルゴフィンガー

愛媛インプラントクリニック かまくら歯科 (愛媛県伊予郡) 歯科衛生士 山口 佳那・・・P3

エルゴフィンガー 広告・・・P3

開業からずっと愛用しているハイゴフォーミック

きたしろ歯科診療所 (新潟県上越市) 院長 金谷 史夫・・・P4

歯科衛生士 10 年記念 自分にご褒美 北欧研修!

医療法人 育歩会 坂井歯科医院 香里園 かほりまち歯科 (大阪府寝屋川市) 歯科衛生士 前田 朋子・・・P5

2017 年 北欧研修に参加して

小野歯科医院 (岡山県倉敷市) 歯科医師 緒形 (宮地) 孝子・・・P6

自分自身が愛用者 わたし的!! TePe スプリームとスプリームコンパクトの使い分け

医療法人 タニオ歯科クリニック (大阪市中央区) 歯科衛生士 丸山 葉子・・・P7, 8

テペ スプリームコンパクト 広告・・・P8

期待を裏切らない歯ブラシスプリームコンパクト

都内歯科医院勤務 日本口腔インプラント学会認定

インプラント専門歯科衛生士 岡安 紀子・・・P9

大きめヘッドの歯ブラシを使ったことのないあなたへ 使えばきっと好きに気になる! “最高の” TePe スプリーム

DH 勉強会 LOL 主宰 歯科衛生士 加瀬 久美子・・・P10

インプラント治療の長期予後のために

アドヒアランスの高いセルフケアを TePe で

医療法人社団 蒼天会しおさい歯科クリニック (千葉県市原市)

東京医科歯科大学歯学部附属病院 インプラント外来非常勤診療講師

歯科医師 金井 亨・・・P11

カンボジアでのボランティアを振り返って

医療法人 小坂歯科医院 (大阪府摂津市) 歯科衛生士 岡 佐和子・・・P12

テペ 広告・・・P13, 14

日常的に取り入れやすく、 口腔内の健康をより向上させるための一押しプロダクト

神谷町デンタルクリニック (東京都港区) 院長 高島 美祐・・・P15

フッ素嫌いな患者さんにオススメな ロシアの売上 No1 ロックス歯磨材

DRC Group Evgeniya Sukhovolskaya (ジューニャ)・・・P16

デンタルフロスの使用で差がつく「予防歯科」

フロスを習慣にする第一歩 ガムチャックス

ラウナ南大井デンタルクリニック (東京都品川区) 歯科医師 田中 千久紗・・・P17

体にも良く安心なペットのデンタルケア

阿部デンタルオフィス (東京都板橋区) 歯科衛生士 梅谷 有未・・・P18

Tandhygienist Dagarna 2018 (スウェーデン歯科衛生士会年次総会) 参加レポート / Interview

クロスフィールド (株) 歯科衛生士 小林 亜子・・・P19, 20

患者様と医院様のための便利アイテム・・・P21, 22

プレデターターボ / トロール咬合紙 / ラクスエーター・プラス / プロフィーベースト Pro / ガムチャックス / プレデタージェルコニア / KAI コーティング替刃メス
MI パンチ / ワムキークラウンリムーバー / MD ガイド / FRS 破折ファイル除去インストルメント / ピュアリフレクト ミラー / ホワイトマジック

R.O.C.S. / プラークオフ 広告・・・P23



エルゴフィンガーとの出会い

昨年（2017年）11月、念願のクロスフィールドの北欧研修に参加しました。フィンランドのメトロポリア大学では、エルゴフィンガーの研修プログラムを受けました。



フリーランス歯科衛生士
沢口 由美子



エルゴフィンガーとの出会いは、この北欧研修の前にありました。説明を受けて使用してはいたものの、突き詰めたい癖のある私は、この研修をとて楽しみにしていました。

開発者のマリアンヌさんとグニーラさんのお二人は歯科衛生士学校の学生の頃からの仲良しだったそうで、その頃から「日々の衛生士業務の中で役に立つ製品」を作れないものかと意見を交換し合っていたそうです。

構想から何年もの月日が流れ、とうとう商品化となりました。歯科衛生士が施術する時は、アシストをしてもらう事はなかなかありません。

患者さんからすると、エジェクターを口腔内に引っかけられたままでは痛みがあります。

術者としてもパウダークリーニングや超音波スケーラーなどの施術では、エジェクターだけでは間に合わない、そんなケースも多々あります。

いろいろと葛藤の毎日…おまけに直視による姿勢の悪化から、肩こりや腰痛等々ストレスが増します。

エルゴフィンガーを使用することにより、術者は正しい姿勢で治療に専念することができ、体への負担を減らすことが出来ます。

エルゴフィンガーを人差し指に付けて操作すると、中指や薬指で優しく口唇頬や頬粘膜の排除が出来るので、患者さんの負担が減少します。

また、中指に付けると親指と人差し指でミラーを持つことも可能です。

フィンランドから帰国して、日々の診療に使用している中で、また少しずつ疑問が出ていた頃、日本のデンタルショーでのセミナーのために来日したお二人に再会することができました。そこで更に、実技を教えて頂き、今年から私のプライベートセミナーでも実習に使用することになりました。

受講者の方々も「楽です！」との感想を述べて下さっています。



メトロポリア大学にて、開発者のマリアンヌさん（写真右端）、グニーラさん（中央筆者左）、講師の方々

これからますます歯科衛生士さんがメンテナンスで活躍する時代です。

一人で患者さんの口腔内を施術して、定期的にリピートして頂くための満足を引き出す！「疲れた」なんて言ってもらえません。

是非、歯科衛生士さんで自身の仕事を楽しくし、患者さんと一緒に笑顔になれるように、少しでも余裕のある施術ができるように色々なアイデアのツールを使って頂きたいと思います。もちろん先生方にも使いやすいバキュームだと思います！

術者にとって楽！だけでなく、実は患者さんにとってもメリットのある、まさに一石二鳥のツールです。

フィンランドの歯科衛生士、マリアンヌさんとグニーラさんの想いのこもったエルゴフィンガーです。



通常のバキュームで口唇を排除



本製品の使用により指先で優しく口唇を排除



中指に装着しミラーも同時に使用

当医院でのエルゴフィンガーの活用法

美しい治療ポジショニングとパフォーマンスの向上のために

たなか歯科クリニックへの入社を熱望したのは、理事長の治療中の綺麗な姿勢と確立されたポジショニングに憧れたため。軸のブレない治療姿勢を意識して、歯科医師として生涯患者さんへ貢献していきたいという思いで日々研鑽しております。

医療法人 TDC
たなか歯科クリニック Concept Clinic
(名古屋市千種区)
院長 早川 尚子



スウェーデン研修から2年一。

あの場所で感じ、得たインスピレーションにより新しい場所(医院)が生まれました。

2016年11月、理事長の田中と歯科衛生士マネージャーの福田と共に予防歯科先進国北欧スウェーデンを訪れてから2年が経とうとしています。あの場所で生まれた「ゆったり、豊かに」という私たちの合言葉。今日このときまでじっくり時間をかけ思考し続けた結果、今まったく新しい理想の医院で私は勤務しています。

私が勤めているのは医療法人 TDC たなか歯科クリニック“Concept Clinic”。自分の理想とする場所に毎日患者さんを招いています。ここでは技術向上は当然のこと、クリエイティブな仕事が求められますが、この医院で長く勤めたいと思う私は使用する歯科器材にもこだわっています。

私が担当するのは保存治療がメイン。なんといっても防湿が治療の要となるのでもちろんラバーダムも行いますが、アシストの有無に関わらず、左手にミラーを把持する基本スタイルを維持できる「エルゴフィンガー」が活躍しています。

これまでは通常のバキュームを左手人差し指と中指の付け根に挟みながらのミラー把持。頬粘膜や舌の排除のために指先に力が入り、自然と左の脇が開いてしまい、肩から腕にかけてとても辛く、ストレスでした。


しかし、エルゴフィンガーはまずバキュームチップまでのホースが柔らかいため、手首から指先への曲線もしなやかに追従してくれます。

また、エルゴフィンガーは軽量で指先にくるキャップがしっかりホールドしてくれるので必要以上の力が入りません。

なんといっても私が一番気に入っている特徴は、中指にエルゴフィンガーをつけると今まで通りミラーが把持できること。器材のために診療スタイルを諦めなくて良いのがポイントです。(写真①)

それからバキュームチップの長さが調整できるので、口唇の排除範囲を広げたり(写真②)、また臼歯治療にも便利に使用しています。

自分の治療パフォーマンスを上げるのに、選択する器材はとても重要。ぜひ、皆さまの診療スタイルに合うものを探してみたいと思います。

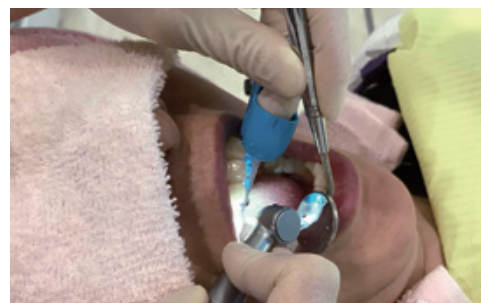

写真① エルゴフィンガーを中指にはめて、人差し指でのミラーの把持も可能



写真② チップの長さが自由に変えられる



当医院で使用している排唾系器具。
左から、ドライデント、エルゴフィンガー、ハイゴフォーマック



2016年に当医院から3人で参加したスウェーデン研修

腰、肩、首に負担が少ない エルゴフィンガー

体に負担の少ない体勢に注意しながら施術するのですが、
つい腰や首、肩を痛めてしまいます

愛媛インプラントクリニック
かまくら歯科
(愛媛県伊予郡)
歯科衛生士 **山口 佳那**



メンテナンスを一人で施術されている歯科衛生士の方は多いと思います。
バキュームの多くは形が決まっており、自由がききません。したがって部
位や歯列によっては上手にバキュームが挿入できず術者が無理な体勢に
なってしまう事もあるのではないのでしょうか。
私も体に負担の少ない体勢に注意しながら施術するのですが、つい腰や首、
肩を痛めてしまいます。

エルゴフィンガーを紹介された時、「使いやすいそう!」というのが第一印象で
した。しかし、私はもともと手が小さいので上手く扱えるかどうか不安でし
た。そんな時院長が「購入して使ってみたら?」と背中を押してくれました。
そこで当院のメンテナンスを一人でやっている歯科衛生士を巻き込んで使用
してみることにしました。


使い始めると、不安に思っていた操作性は、慣れてくると解消されていきま
した。そしてとても良いと感じたことは、ゴムチューブが容易に曲がるため、
肩を無理に上げる姿勢をしなくてよくなったことです。指を動かすことでエ
ルゴフィンガーの先端を操作できるので吸引したいところで吸え、肩への負
担が軽くなりました。また、チップの先端は長さが三段階に調整でき、回転
させることもできるので使いやすいです。ディスプレイブルなところも患者
さんに優しく衛生的なので、大変気に入っています。

私の臨床において大変活躍しています。

一度お試しください!



肩の上がない自然な状態

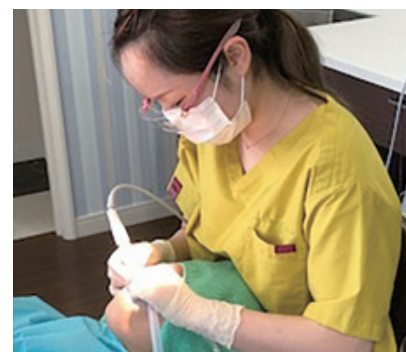

肩を上げずに視野を確保

Products Information

エルゴフィンガー



ergo**o**medi

術者と患者さん双方に優しい
フィンランド生まれのバキュームアダプター

エルゴフィンガーのメリット



- エルゴノミックなデザインで、身体にやさしい
- バキュームのコントロールが簡単
- 操作性の向上で快適な診療
- アシストの必要が少なくなり経費削減
- 術者の不要な動作が減ることによる処置の効率化と時間短縮
- ディスポーザブルで患者さんへの感染予防を提案

One Point!

通常はエルゴフィンガーを人差し指に
装着しますが、ミラーを併用する際は
エルゴフィンガーを中指に装着します



エルゴフィンガーを用いたバキュームテクニック。
指先を使う感覚での操作が可能。身体に無理な力がかからない。

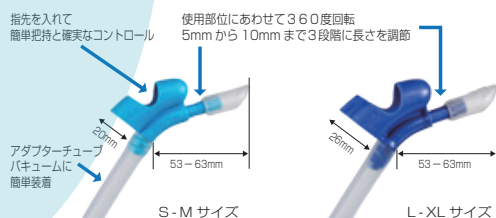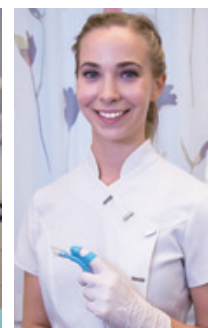

商品名 エルゴフィンガー

医療機器届出番号 13B1X00133000067

S-M サイズ 標準価格 12,000 円 (税別) / 50 本入 (@240/ 本)

L-XL サイズ 標準価格 12,000 円 (税別) / 50 本入 (@240/ 本)

* アダプターチューブ 148mm

* 直径 11mm のバキュームに対応

* サイズ選びの目安 女性 S-M サイズ、大きな手の男性 L-XL サイズ

* 素材 PVC



動画はこちらでご確認ください

開業からずっと愛用している ハイゴフォーマック

当院では、開業当時からハイゴフォーマックを使用しております。スタッフからは「他の商品を使ってみたい」「ここが使いづらい」などの意見がでたことは一度もありません。毎日使用している歯科衛生士のお話を紹介します。

きたしろ歯科診療所
(新潟県上越市)

院長 金谷 史夫

・田隈ゆかり（勤務歴 10 年）

特別なテクニックを必要としないので、使用経験のない新人でもすぐに使用することができます。なによりディスプレイなので感染予防につながり安心安全です。少量の水をためることができない患者さんでも、通常のバキュームと併用すると処置がスムーズになります。

・岡村真菜美（勤務歴 10 年）

重さも軽量で、つけていても頬を引っ張られる感じが少ないのが良いです。患者さんの負担はとても少ないと思います。患者さんから「痛い」などの苦情がでたこともなく、評判がとても良いです。

・梨本恵理（勤務歴 8 年）

小児から大人まで使用できます。左右どちらからでも口腔内に入れられますので、処置部位や利き手などに対応できます。使用中は、両手が自由に使えるので、超音波スケーラー以外にミラーやバキュームを容易に持ち替えて使用することができます。

・木南美希（勤務歴 7 年）

口腔内のクリーニング時の排唾管はハイゴフォーマックしか使用したことがないのですが、絶対にかかせないものです。頬の排除がしやすく、視野の確保ができます。患者さんの口にあうように形を変えられるところが気に入っています。

・丸山佳奈（勤務歴 5 年）

患者さんや使用用途にあわせて簡単に向きや角度を変えて使用できます。また、安定感もあるので、視野の確保や排唾機能に問題はできません。患者さんも術者も負担が少ないので、ケアタイムの短縮にもつながっています。

・五日市遥香（勤務歴 3 年）

バキュームは、作業中に頬を吸ってしまう時など、患者さんにとって不快な音や痛みにつながる場合があります。ハイゴフォーマックはその心配がなくなるので仕事に集中でき効率的です。

・岡田莉奈（勤務歴 1 年）

かたつむりのような先が丸い形状は一見大きく感じますが、実際口腔内に入れるとコンパクトで処置の邪魔にならないので、よく考えられた設計だなと感心しました。白い色も清潔感があってよいです。

**DIRECTA
ORSING**



Higoformic®



専用アダプター

(外径 6.5mm、内径 4mm、長さ 45mm)

商品名

ハイゴフォーマック

医療機器届出番号 13B1X00133000065

ハイゴフォーマック 100 個入
(専用アダプター 5 個付き)

標準価格 1,480 円 (税別) @14.8 円 / 個



超音波スケーリング時も使いやすい



きたしろ歯科診療所スタッフの集合写真



デンタルショーにてカラフルな TePe ブースの前で

歯科衛生士 10 年記念 自分にご褒美 北欧研修！

医療法人 育歩会 坂井歯科医院
香里園 かほりまち歯科
(大阪府寝屋川市)
歯科衛生士 前田 朋子



スウェーデンでは国を挙げて国民の健康を守るため、子供の頃から予防に力を入れている事を知り、『いつか私も行きたい！10年後の目標にしよう！』と決めていました。そして今回、実現することができたことを本当に嬉しく思います。

研修の中で私が最も楽しみにしていたのは、本場の歯科衛生士の方がどのような環境で、どのようにお仕事をしているのかを知ることでした。普段は自分も予防中心の仕事をしているのですが、自分の仕事を客観的に比較できる機会はなかなかありません。しかし、今回の機会では自分との比較を行えるので、本場に近づきレベルを上げるチャンスなのではないかと思ったのです。

一番自分の環境に近い、プライベートクリニックのスマイルデンタルクリニック様では、医院内はとても綺麗で滅菌室のシンクの中までピカピカです。衛生管理が徹底されていました。歯科衛生士専用のチェアがあり、広々とした空間で使用する器具・器材は自由に選び、メンテナンス期間、施術内容など、すべて任せられているとのことでした。

患者さんへの施術も間近で見学させてもらい、カメラの撮影も快く許可してくださいました。患者さんは終始、笑顔で施術を受けられており、きっと日頃からの歯科衛生士と患者さんのコミュニケーションがしっかりできているのだらうと感じます。歯科衛生士の方も、メンテナンスに来られる患者さんとはコミュニケーションや TBI でお話することに時間をかけているとのこと、改めてコミュニケーションの重要性を実感しました。

見学中に気になった器材・器具は後日見学したデンタルショーにて学ぶことが出来たのは嬉しいポイントです。日本のデンタルショーとは違い、予防関連のものやホワイトニング等の審美関係のものが

多くみられ、歯ブラシ一つとっても、おしゃれでカラフルなものが幾つもあります。フェイスカバーやパキュームなど、使い捨てで使用する衛生管理の物も揃っており、全体的に歯科衛生士の為のデンタルショーという感じがしました。やはり予防が中心の国は違うなと思いました。歯科マニアの私にとっては時間が足りないくらいで、とても充実した時間を過ごす事ができました。

今回の歯科研修で際立って印象的だったのは、カラフルでおしゃれな口腔ケア製品 TePe 社の見学でした。歯ブラシや歯間ブラシの元となる原材料から形になっていく工程までを見学させて頂いたのですが、工場内は清潔に保たれており、初めての工場見学だったのですがとても感動しました。TePe の製品はスウェーデンでしか作られていないとのこと、普段から患者様に口腔ケア製品選択の大切さを伝えるプロとして、自信をもって勧めることができると思いました。

この研修にもっと早く参加すればよかった・・・とも思いましたが、今では歯科衛生士として経験を数年積んだ後のこのタイミングでよかった！とも感じています。

ひとりでの参加ということで最初は不安な気持ちでいっぱいでしたが、参加メンバーの皆様がとても親切で優しく本当に素晴らしい方々だったので、研修はもちろんですが、私にとっては皆様との出会いが学びであり、大切な宝物になりました。この場を借りて御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

今回本場を自分で体感することができたことで、より一層「歯科衛生士を楽しみたい！レベルアップしていきたい！」という思いが強くなりました。本当に参加してよかったなと思います。



スマイルデンタルクリニックでの施術風景



マルメ大学にて参加メンバーと



参加者の皆様と、TePe 社前の歯のオブジェ前にて

愛知県での勤務医時代、院長はインプラントが専門でした。

院長の師匠がスウェーデンの先生で、交流させていただく中で、いつか本場をみたいとぼんやりと考えておりました。

それから約 10 年経ち、(株) Himmel の田上さんにお誘いいただき、今回一緒にさせていただきました。これまで旅行でフィンランドは訪れたことがありましたが、スウェーデンは初めて。大きな期待と、初めての海外研修という不安を抱えつつの出発でした。

現地です、開業医の医院見学から。

と言っても、規模が日本とケタ違い・・・ヨーロッパ各地に展開するグループ医院で、スウェーデンだけで 33 の医院があるそうです。経営母体があり、リサーチや経営、事務仕事をするスタッフがいるので、Dr. DH. は自分の専門に集中できるという所など、大変羨ましく思いました。患者さんのメンテナンス時の見学をさせていただき、院内の設備等、説明を受けました。歯科衛生士さんや、患者さんにもざっくばらんに質問ができ、リラックスした雰囲気の中、日本に足りない所、日本と共通する所、日本の方が優れている所・・・などを感じることができました。大学では、スウェーデンのカロリンスカ大学、マルメ大学、フィンランドのメトロポリア大学を見学させていただきました。

カロリンスカ大学は規模も大きくおしゃれ！

入ってすぐのカフェスペースからスタートし、シンプルな中にも色彩が多く（でも派手過ぎず）、リラックスして治療や勉強ができる環境が広がっていました。そして、日本との教育システムや歯科衛生士環境の違いに衝撃を受けました。

マルメ大学では、学生の教育のシステムに驚きました。

受け身な授業はほとんどなく、自分で調べ、仲間と共有しながら学び、実習も動画を見つつ、自分達で自主的に進めていました。このシステムが根付いており、学生からの評価も高く、優秀な Dr. となって巣立っていくとのこと。ここでは、私の師匠から聞いていて、夢の一つだった、念願のポッセルトのバナナの像と写真を撮ることもできました。

メトロポリア大学ではキシリトールの歴史の講義と、施設見学、診療見学ができました。

また、SWEDENTAL というスウェーデンのデンタルショーを見学し、オープンな雰囲気の中、日本にまだ入っていない器材なども見る事ができました。

TePe 社の工場見学では、製造過程を見ることができ、精密さと使い心地に、当院でもすぐ導入いたしました。

個人的には、TePe 社にて公的なヘルスプロモーションの状況と課題について講演された、Wretling 先生、マルメ大学での TMD に関しての Ekberg 教授の講演が大変興味深かったです。

食や文化、生活習慣、骨格が日本人と異なる中で、どのようにアプローチしているのか、など大変勉強になりました。

ツアーのメンバーにも恵まれ、食事や余暇も共に過ごせ、それぞれの立場からのディスカッションができた事も大きな財産です。

英語が苦手なのですが、クロスフィールドの皆様に変なお世話になり、気軽に質問もできて大満足でした。ありがとうございました。



マルメ大学中庭のポッセルトのバナナ像の前で

第11回 予防歯科先進国 北欧を満喫する スウェーデン/フィンランド歯科研修 2018

開催期間：2018年11月11日(日)～18日(日)【8日間コース】

訪問都市：スウェーデン マルメ/ストックホルム/イエテボリ



フィンランド ヘルシンキ



旅行代金：568,000円

★ 研修にご参加された皆様には終了証をお渡しいたします 旅行詳細はお問合せください：(株) クロスロード マコト tel: 06-6362-7220

自分自身が愛用者

わたしの！！ TePe スプリームとスプリームコンパクトの使い分け

知識や情報を持っていても、経験がないことを他人に教えることは困難です。

同様に、患者さんに歯ブラシを勧める時は、自分がまず使ってみないと指導することが難しいため、

私は自分が興味をもった歯ブラシはすべて試すようにしています。

私の敬愛する先輩歯科衛生士から TePe スプリームを紹介していただき、愛用者になったのが 4 年前でした。2017 年にはスプリームコンパクトが登場し、これも現在愛用中です。

今回は、自分が愛用しているそのスプリームとスプリームコンパクトの使い分けについて紹介したいと思います。

私は、歯周病の患者には歯肉辺縁部に毛先が届きやすいスプリームを選択することが多いです。

歯肉縁上はきれいにブラッシングできているのに、いざ歯肉縁下を少し探針で触るとプラークが多く残っている上に出血してしまうことはありませんか？その患者が使用している歯ブラシを確認すると、ラウンド毛であることを私はよく経験します。ここでスプリームの出番です。二段植毛の長いフィラメント（①）がテーパー毛で、短いフィラメント（②）がラウンド毛であることがスプリームの特徴です。その柔らかいテーパー毛が歯周ポケット内にしっかり入り込むことで、歯肉縁下プラークをよく除去でき、なおかつラウンド毛で辺縁の歯面に付着するプラークも除去することができるので、まさに一石二鳥です。

また、スプリームは、矯正装置の部分を磨くのに適しています。

私は、1 年半前まで約 3 年間矯正治療を受けていたので、矯正装置に引っかかる大量の食物残渣を除去するため、スプリームを使用していました。毛足が長いので矯正装置の間に届きやすく、更に毛束が密であるため早く除去できるからです。歯科矯正を受けたことのある方には理解していただけたと思いますが、矯正装置に食べ物がからまると、想像以上に不快で一刻も早く除去したい気持ちでいっぱいになります。その理由から、スプリームを使用することによって“確実に、かつ迅速に除去できる”というメリットはとても大きいのです。

一方、スプリームコンパクトは、その名の通りヘッドがコンパクトであるため、口腔前庭や歯列弓の狭い患者、そして小さいヘッドを好む患者に選択するのがまずは基本です。

ここで、わたしの選択方法について、さらに経験談と実際の検証を交えてご紹介します。

二段植毛ではなくテーパー毛だけの歯ブラシを使用すると、毛先が細いので歯肉には優しいのですが毛先がたわんでしまい、歯面に付着したプラーク特有のザラつきを除去しようと必死になる

ので時間を費やします。また、ブラッシングについ力をかけ過ぎてしまい、一日中気になってしまう位の違和感と歯肉痛が 2 ～ 3 日続く（ブラッシングを控えると治る）という経験をしたことがあります。それは、テーパー毛の歯ブラシで浅い歯肉溝を狙って強い圧で長い時間ブラッシングしたために、毛先がポケット底（上皮付着部）周囲の組織を傷めていたからだと思います。

しかし、TePe スプリームを使い出してから、時間や力のかけ過ぎに注意を払わなくても歯肉の痛みが生じなくなりました。それは、前に述べたようにラウンド毛とテーパー毛の二段植毛で、どちらの長所も併せ持っているからだだと思います。

さらに、スプリームコンパクトを使い始めて、同じ二段植毛のスプリームとスプリームコンパクトでも、サイズ感だけでなく磨いた感覚に違いがあることに気付きました。不思議に思い、2 本の清掃状態の違いを自分と患者に実際に試して検証しました。

スプリームはテーパー毛（①）が長く、毛先にかかる力が弱くなるため炎症のある歯肉には優しいです。そして、長いフィラメント（①）が深くなった歯周ポケット内にしっかり届き、またヘッドが大きいため歯肉退縮を起こして鼓形空隙が大きな歯面をがちり抱え込んで磨けます。

一方、スプリームコンパクトは、長いフィラメントのテーパー毛（④）が、スプリームのそれ（①）より約 1mm 短く、歯肉溝に届くと短いフィラメントのラウンド毛（⑤）が歯面に早く当たるため、それ以上歯肉溝の中に届きません。その結果、内縁上皮は傷つきませんし鼓形空隙の下部に毛先が早々と届き、毛足が短い分コシがあり、短時間で歯面がツルツと磨けます。スプリームの方がサイズの大きい分（③＞⑥）能率的に磨くことができますが、私のように歯周組織が健全で歯肉の退縮もない場合には、スプリームコンパクトの方が適していると言えるのかも知れません。





医療法人 タニオ歯科クリニック
(大阪市中央区)
歯科衛生士 丸山 葉子

また、スプリームもスプリームコンパクトもヘッドの先端が先細り（台形型）になっていて大臼歯や歯間部にも歯ブラシが届きやすいという特徴もあります。スプリームコンパクトでは、ヘッドの長さだけでなく幅もコンパクトになるので、口腔前庭の狭い部分や舌側などの清掃に向いていると思います。
以上の理由から、わたし的な使い分けを表にまとめました。

	歯肉の炎症	歯根露出	PPD	鼓形空隙	口腔前庭歯列弓
スプリーム	中等度・重度	大きい	深い	大	大
コンパクト	ない・軽度	ない・小さい	浅い	小	小

ちなみに、TePe スプリームとスプリームコンパクトの使用リピート率はとても良く、一度処方すると 8 割の患者さんがリピーターになります。先日も、リピーターの男性患者さんが定期検診にいられてスプリームを 20 本購入されました。「磨きやすくてとても気に入っている。友達にも紹介している。」とおっしゃっていました。

実際に歯肉の状態も改善していることから、自信をもってお勧めできる歯ブラシであると思います。

Products Information

TePe Supreme™ Compact テペ スプリームコンパクト

大人気のスプリームにコンパクトサイズが登場！！

Supreme（スプリーム）―“最高の・究極の”という名前にふさわしく、柔らかさ・しなやかさ共に最高の磨き心地を提供するスプリーム歯ブラシに待望のコンパクトサイズが仲間入りしました。
小さめのヘッドがお好きな方へ、またお子さんにも自信をもっておすすめいただけます。



2段階植毛のフィラメントが効果的にプラークを除去



歯や歯肉へのあたりが優しい、ソフトなフィラメント



長いフィラメントが隣接面や歯周ポケットに到達し、同時に短いフィラメントは歯面をすっきり磨きあげる



サムパッド（親指あて）付きで握りやすく滑りにくい



臼歯部や細かなエリアにも届きやすい台形状のヘッド



フィラメントのしなやかさと形状がブラケットやワイヤー周囲も磨きやすいので矯正患者さんにも最適
コンパクトサイズは矯正治療中のお子さんにも使いやすい



手で曲げられるネックでカーブをつけることが可能
*一度曲げたら元に戻さないでください

スプリーム Supreme / スプリームコンパクト Supreme Compact

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の 2 層構造。長い毛先が歯間部や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短い毛は歯面をすっきりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方にも最適です。サムパッド（親指当て）と背面に滑りにくい素材（TPE）が使われており、手にしっくりなじみます。



スプリーム

スプリームコンパクト
(実寸大)

色はアソートになります

- スプリーム
- スプリーム プリスターバック
- スプリーム 80 本入り

- スプリームコンパクト
- スプリームコンパクト プリスターバック
- スプリームコンパクト 80 本入り

期待を裏切らない歯ブラシ スプリームコンパクト

患者さんの笑顔と良好な口腔内環境維持に必要な歯ブラシだと感じています。

都内歯科医院勤務
日本口腔インプラント学会認定
インプラント専門歯科衛生士 **岡安 紀子**



昨年 10 月 23 日に TePe 社よりスプリームコンパクトが発売されました。スプリームを使用していてヘッドが若干大きいと感じていた私は、コンパクトなヘッドの発売を待ち望んでいました。**発売されたスプリームコンパクトは「歯をスムーズに気持ち良く効率的に磨けるであろう」との予測通り、使用していて期待を裏切らない歯ブラシでした。**



スプリーム / スプリームコンパクトは予防先進国、スウェーデン製の歯ブラシです。**グリップは太めでサムバット（親指あて）が付いています。**そのため、余分な力が入りにくだけでなく、握りやすく滑りにくのが特徴です。

スプリームコンパクトのヘッドは通常のスプリームよりもヘッドの縦の長さは約 5mm、横幅は 1mm 程小さくなっています。口腔内に入れた時、数値以上にコンパクトさが実感できます。

歯ブラシのヘッドが大きい方が効率よくプラーク除去を行える患者さんもうらっしゃる一方で、小さめのヘッドに慣れている患者さんは、大きいヘッドでは「奥まで届かない」、「動かしにくい」という方もいらっしゃいます。そのような方には是非スプリームコンパクトをお勧めします。

ヘッドが小さめのため舌側や最後臼歯部遠心に到達しやすく、歯列不正や口の小さい大人、混合歯列期の小児にも適しています。

また、ネック部分を手で曲げて角度をつけることができるので、それによって磨きにくい部位専用の歯ブラシにすることが可能になります。

スプリームコンパクトの毛は 2 層構造になっており、長い毛はテーパー毛で歯間に入り込みやすく、短い毛はラウンド毛で歯面が磨ける設計になっています。ソフトなフィラメントで歯や歯肉のあたりが優しく、磨いていて『気持ちいい』という感触が得られます。

また、毛先がしなやかで張りがあるため柔らかすぎず、インプラント部位のプラークも効率よく取り除くことができます。

さらには、北欧らしいデザインと色使いが積極的にプラークコントロールを行うきっかけとなることが期待できます。

私たち歯科衛生士は定期的に来院される患者さんの口腔内を良好に維持させるために、プラークコントロールに対するモチベーションを常に上げていかなければなりません。そのため、歯ブラシの特徴をよく知ったうえで、ブラッシング指導を行うことが大切です。また、患者さんに適した歯ブラシを提案することも重要です。その点からもこのスプリームコンパクトは、患者さんに最もお勧めしたい歯ブラシのひとつであると言えます。



さまざまな角度に曲げられます。



ネックを曲げることで最遠心部に到達しやすくなります。



スプリーム スプリームコンパクト



上部構造の歯頸部付近の露出したアバットメントを傷つけることなく、歯冠部も同時に磨くことができます。

撮影協力：日本歯科大学 高森 等 名誉教授

大きめヘッドの歯ブラシを使ったことのないあなたへ 使えばきっと好きになる！“最高の” TePe スプリーム

DH 勉強会 LOL

主宰

歯科衛生士 加瀬 久美子



日本はかねてより、歯ブラシといえばコンパクトヘッド、歯磨きといえばバス法が主流でした。歯科衛生士は毎日のように「ペングリップで45°の角度に当てて、軽い力で小刻みに1本ずつ磨きましょう」と指導してきましたが、実際に患者さんに磨いてもらうとなかなかうまくいかない… そんな経験をお持ちの方も多いのではないのでしょうか。

そもそもブラークコントロールって何？

歯垢染色剤で染まったプラークを指摘し、磨き方を指導する… そんなダメ出しメインの歯磨き道場では、患者さんは「歯科医院に行くと怒られる」という認識を持ってしまい、モチベーションを下げてしまいます。

そこでただ、やり方の指導をするのではなく、現在地とゴールを知っていただくための術者磨きを行います。患者さんは今の歯磨きの仕方が普通で、プラークが残っている状態が日常です。正しいブラッシング圧で歯頸部に当たる感触や、歯間部に毛先が入る気持ち良さ、プラークフリーのスッキリ感やツルツル感を体感していただくことで、患者さんは無意識に自身の歯磨き（現在地）と比較し、正しいブラッシング方法や歯磨きの終わりの目安（ゴール）を理解します。その時に大活躍してくれるのがTePe スプリームです。Supreme（スプリーム）は直訳すると“最高の”という意味で、その名にふさわしく、柔らかさ・しなやかさに共に最高の磨き心地を提供してくれるので、術者磨きにオススメです。



術者磨き



ブリッジでの使用例

毎日簡単ブラークコントロール

一般的なテーパー毛の歯ブラシは、毛先が歯肉溝に入り込みすぎて痛みを伴ったり、浮いた感じが残ったり、リセッションを起こすリスクもあるので注意が必要ですが、TePe スプリームは、長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造になっているので、毛先が歯肉溝に入り込みすぎることにも防いでくれます。長い毛先はブリッジのポンティックや矯正装置周辺、歯周病で歯肉退縮し歯冠長が長くなった歯間部やインプラント周辺にも到達しやすく、短い毛先は歯面にもフィットしてくれるので、1本で何役もこなしてくれます。タフトブラシや歯間ブラシ、スーパーフロスなどを上手に使いこなせる方なら言うことなしですが、使いたくても手先が不器用でなかなか難しかったり、忙しい毎日の生活の中に取り入れられない現実も多くあります。そんな時の救世主がTePe スプリームです。

常識を覆すブラッシングの提案

私がTePe スプリームを提案するときには細かい指導はせず、あえて雑に、パームグリップでオーバーストロークで磨いていただきます。このとき多少ブラッシング圧が強くなってもしなやかな毛先が逃げてくれるので、ブラッシング圧がどうしても強くなってしまう方や細かい動きが苦手な方にも使用していただけます。ブリッジのポンティックや矯正装置周辺、歯間部やインプラント周辺などの細かい部位は、毛先をバス法とは逆の歯冠部の方（上顎は下向き・下顎は上向き）へ向けて、毛先をギュッギュッと入れ込むように使用します。太めで滑りにくいハンドルは、高齢者や疾患の影響で握力が低下している方でも握りやすいのでオススメです。

TePe スプリームは術者磨きから本人磨き、健康な方から歯周病に罹患している方、忙しい方や高齢者まで、どんな方にもどんなシチュエーションでも幅広く使用できる優れたもの。“最高の”名にふさわしいTePe スプリームを使ってみたら、きっとあなたも好きになることでしょう。



矯正での使用例

インプラント治療の長期予後のために アドヒアランスの高いセルフケアを TePe で



医療法人社団 蒼天会しおさい歯科クリニック
(千葉県市原市)
東京医科歯科大学歯学部附属病院
インプラント外来非常勤診療講師
歯科医師 **金井 亨**



■ 最古の木造建築群から学ぶこと。

奈良県の法隆寺は7世紀に創建された寺院で、その中にある西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群です。木造建築の寿命は一般的に短いと考えられますが、1300年を超え、今なお泰然自若と建ち続けられる理由はどこにあるのでしょうか。法隆寺には代々宮大工さんが住んでおり、幾世に渡り、日々の修繕を行ってきたようです。また建築当初から永年の使用を可能にするために、解体修理を想定した設計になっているとのこと。実際、1934年から半世紀にわたって解体修理が行われたのですが、日本のような高温多湿の気候にも関わらず、ほとんどの木材がそのまま再使用できたと言われています。

■ 補綴治療と建築は似ている。

口腔内も高温多湿で、常に咬合力がかかるという歯科材料にとって過酷な環境にあります。そのような状況でも、患者さんの生涯になるべく寄り添えるだけの“長持ちさ”を歯科医療従事者、患者双方ともに望んでいると思います。もし先ほどの建築の話をもとに歯科治療の longevity に置

き換えて考えてみるなら、“歯科治療の長期安定のためには、日々のセルフケアと将来的なメンテナンスを考えた補綴設計が大切”ということになるでしょう。

■ セルフケアを患者さん側から考えること。

どんな名医や腕の立つ技工士が匠の技をもって作製した補綴物でも、その使用と日々のケアは患者さんに任せることになります。患者さんがこれからの生涯、自分の口腔内と向き合ってセルフケアを継続していくには何が必要でしょうか。宮大工さんながらのセルフケアを患者さんに強いるのは難しいです。継続に必要な事は、なによりシンプルで簡便であることです。

■ 上部構造形態に清掃性の配慮を。

そして TePe を奨める理由。

歯間ブラシは、インプラント周囲のプラークコントロールに非常に有効です。周囲組織が脆弱なインプラントでは、細菌の侵入に対して、インプラント周囲溝が予防の水際となります。TePe の歯間ブラシはサイズが豊富で、様々な歯間形態に合わせて使い分けをできるメリットももちろんありま

すが、複数の歯間ブラシを使用するのは煩雑でもあります。そのため補綴治療時に、あらかじめ清掃性への配慮を行うことが重要です。例えば残存天然歯の歯冠鼓形空隙と相応するような形態でインプラント上部構造を作ること、ワンサイズでの歯間ブラシ使用が可能になります。ブラシサイズが豊富ですから、付与する形態デザインの自由度も高くなります。また歯槽骨吸収が著しい理由で、ガム付きのインプラント上部構造を装着することもあります。これも歯間ブラシの挿入位置にガイド溝を付与しておく、歯間ブラシの挿入が正確に行えるようになります。また舌側からの挿入が困難な場合でも TePe の歯間ブラシはテーパー型ではなく平行型のブラシなので、一方向からの使用でも清掃効率が高いことも利点です。こういった小さい配慮が、セルフケアをより患者側に近づけるためのアドヒアランスを高める一助にもなります。

歯間ブラシも名工のもつノミや鉋と同様、こだわりの道具であっていいのではないでしょうか。そういう理由で TePe の歯間ブラシをお奨めします。



FIG. 1 最終上部構造装着8年経過症例
インプラント周囲の清掃性向上のため、上部構造粘膜面に歯間ブラシ (IDB) 用のガイドグループを付与したケース
8年ぶりにメンテナンスのため上部構造を外した
上部構造の一部に若干の着色を認めるだけで、周囲粘膜に炎症所見はない
歯科技工士：濱谷篤史氏 (アルテ工房)



FIG. 2 IDB によるプロビジョナルレストレーションの調整
できる限りワンサイズの IDB での清掃が可能のように、歯間鼓形空隙の形態を微調整する

カンボジアでの ボランティアを振り返って



医療法人 小坂歯科医院
(大阪府摂津市)

歯科衛生士 岡 佐和子



「できる人が、できることを、できるだけ長く」を合言葉に、アトランタ、バルセロナオリンピック女子マラソンで銀、銅の連続メダリストとなった有森裕子さんが代表理事を務める、非営利活動法人 NPO 法人「ハート・オブ・ゴールド」。スポーツを通じて国境、人種、ハンディキャップを超えて希望と勇気の共有を実現することを目指し、カンボジアを中心とする東南アジアの国々にスポーツを通じ体育教育支援や、障がい者支援を。日本語教育を通じ自立支援、子どもの養育支援を。また国内では東北震災後の復興支援など、さまざまな活動を行っています。

そのような事業の中の一つに毎年 12 月第 1 日曜日に開催されるアンコールワット国際ハーフマラソンがあります。今や世界から 1 万人以上の人が集まる大会になりましたが、この大会は有森裕子さんとハート・オブ・ゴールドが第 18 回大会まで運営を取り仕切ってきました。その期間中に有森裕子さんと一緒にカンボジアを訪れ、子ども達とスポーツやレクリエーションを通して交流し、カンボジアの歴史や環境を理解し自立支援のボランティアを学ぶ「ボランティアスタディーツアー」が企画されます。

私は 2017 年 11 月 30 日から 5 日間、上記のボランティアスタディーツアーに参加させていただきました。5 年前にボランティアスタディーツアーに参加した TAO 東洋医学研究会（歯科医師の東洋医学のスタディグループ）の先生方が歯科として何かお手伝い出来ないかと問い合わせたところ、ハート・オブ・ゴールドが運営する NCCC（New Child Care Center- 何らかの理由で養育できなかった子供たちが共同生活をしながら教育を受け自立できるように支援する施設）の約 20 名の子ども達の歯科治療、歯磨き指導を希望され、翌年からボランティア活動がスタートしました。

カンボジアの子ども達の口の中は悲惨な状況です。カリエスフリーの子どもはほぼいません。12 才の DMFT は 4.5 でそのほとんどが未処置歯です。TAO 東洋医学研究会の先生方で構成されるハート・オブ・ゴールドデンタル班は、3 年前からは同じくハート・オブ・

ゴールドが支援する幼稚園児と小学生合わせて約 800 名のチェイ小学校の歯科検診と歯磨き指導も行うようになりました。私はチェイ小学校の歯科検診、歯みがき指導に初年度から参加させて頂いています。最初は、小学校の先生方に検診の必要性を説くことからはじめなければならませんでした。先生方からは歯ブラシ指導や歯科検診に何の意味があるのか？どうして授業の時間を歯磨き指導や検診に割かねばならないかとも質問されました。

3 年前（初年度）の歯磨き指導では、歯磨きをする習慣のない子供達にどのように伝えようかと悩み、言葉の弊害などを考え紙芝居形式（クメール語）の媒体を作成しました。しかし実際行ってみると、文字を読めない子供が多く、私からの一方通行のような感じが強かったかと反省が残りました。昨年はお休みさせて頂きましたが、2 回目の今年は一緒に参加するスタッフと考えてエプロンシアターで話し、クロスフィールド株式会社さんから提供して頂いたテペのセレクトコンパクトを配付し、歯磨き指導をしました。3 年前は歯磨きをしていない、歯ブラシを持ったことがない子供が多かったのですが、今回子供たちに質問をしたら、歯磨きを 1 日 2～3 回行っている子供がほぼ全員でした。私の 3 年前のガッカリした気持ちは消え去り、うれしい気持ちがあふれていました。子供たちの真剣な眼差しが写真でも伝わってきます。

検診の結果 DMFT も減少してきている事が解りました。今後も「できる人が、できることを、できるだけ長く」を合い言葉にこの活動を続けていきたいと思っています。

カンボジアでの歯科検診、歯みがき指導に興味ある方はハート・オブ・ゴールド事務局にお問い合わせください。来年一緒に活動しましょう！

セレクトコンパクトブラシはカラフルな色で子供達でもハンドルが持ちやすいので、指導しやすかったです。たくさんの歯ブラシのご提供をありがとうございました。



ハート・オブ・ゴールドの代表理事 有森裕子 さん



みんな真剣に歯磨きシュッ シュッ（チェイ小学校にて）セレクトコンパクトブラシを使用させていただきました



みんなの前で「歯が痛い！」のジェスチャー

TePe from Sweden



予防歯科の先進国スウェーデンから

TePe テペ



一般の方からの
お問い合わせが
増えています！

クロスフィールドホームページの
TePeお取り扱い医院検索

貴院の情報を掲載しませんか？
登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。

オリジナル歯間ブラシ

TePe Interdental Brush Original

メタルワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングされ、サイズは9種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入りパック
1パック単サイズ8本+キャップ1本入り(グレー、ブラックはキャップなし)
- アソートパック
1パック各サイズ8本(ブラックを除く)+キャップ1本入り
- 25本入りパック
1パック単サイズキャップ付25本入り(グレー、ブラックはキャップなし)
- 単品パック(キャップ付き)

エクストラソフト歯間ブラシ

TePe Interdental Brush Extra Soft

通常の歯間ブラシよりもブラシがやわらかく、歯肉炎、知覚過敏、インプラントなどの外科処置後の患者さんに適しています。



- 8本入りパック
1パック単サイズ8本+キャップ1本入り
- アソートパック
1パック8本入り構成内容
パステルオレンジ1本、パステルレッド1本、パステルブルー2本、パステルイエロー2本、
パステルグリーン1本、パステルパープル1本+キャップ1本入り
- 25本入りパック
1パック単サイズキャップ付25本入り

アングル歯間ブラシ TePe Angle™

臼歯部や、舌側、口蓋側からのアクセスが容易なアングルヘッド。
メタルワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングしてあります。
テペ独特の平たくて持ちやすいグリップです。



- 6本入りパック
1パック単サイズ6本+キャップ1本入り
- アソートパック
1パック各サイズ6本+キャップ1本入り
- 25本入りパック
1パック単サイズキャップ付き25本入り
- 単品パック(キャップ付き)

ISO ブラシサイズ	0	1	2	3	4	5	6	7	7
日本サイズ	4S	SSS	SS	S	M	L	LL	LLL	4L
ワイヤーサイズ	0.4mm	0.45mm	0.5mm	0.6mm	0.7mm	0.8mm	1.1mm	1.3mm	1.5mm
オリジナル 歯間ブラシ*									
	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	グレー	ブラック
エクストラ ソフト 歯間ブラシ									
	パステル オレンジ	パステル レッド	パステル ブルー	パステル イエロー	パステル グリーン	パステル パープル			
アングル 歯間ブラシ									
	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン			

*オリジナル歯間ブラシ ピンク、オレンジ、レッド、ブルーはネック部分がよりフレキシブルになったG2タイプ。

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

セレクト Select

お手頃な価格で高品質なデベのスタンダード。密でコシのあるフィラメントが効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



色はアソートになります

- セレクト ミディアム
- セレクト ソフト
- セレクト エクストラソフト
- セレクト ソフト プリスターバック
- セレクト エクストラソフト プリスターバック
- セレクト ミディアム 100本入り
- セレクト ソフト 100本入り
- セレクト エクストラソフト 100本入り

セレクトコンパクト Select Compact

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



色はアソートになります

- セレクト コンパクト ミディアム
- セレクト コンパクト ソフト
- セレクト コンパクト エクストラソフト
- セレクトコンパクト ソフト プリスターバック
- セレクトコンパクト エクストラソフト プリスターバック
- セレクトコンパクト ミディアム 100本入り
- セレクトコンパクト ソフト 100本入り
- セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入り

セレクトミニ Select Mini

セレクトコンパクトよりさらに小さいミニサイズで、乳歯のお子さんに最適です。お子さんはもちろん、仕上げ磨きをする大人の方にも持ちやすいハンドルになっています。



色はアソートになります

- セレクトミニ ソフト
- セレクトミニ エクストラソフト

コンパクトタフト Compact Tuft

コンパクトなドーム状のブラシ。フィラメントが短く非常にソフトなので、柔軟性と安定性に優れています。また、先がとがっていないので、萌出歯の裂溝やインプラントのヒーリングキャップ、また義歯のアタッチメントの周りなどの繊細な部分を優しく磨くことができます。



色はアソートになります

- コンパクトタフト

セレクトカラー Select Color

セレクトシリーズにカラフルなフィラメントが仲間入り！

ハンドルの色はアソートになります

- セレクトカラー ソフト (ピンクフィラメント)
- セレクトカラー ソフト (グリーンフィラメント)
- セレクトカラー ソフト (ターコイズフィラメント)
- *セレクトのサイズです
- *かたさはソフトのみです



ハンドルの色はアソートになります

- セレクトカラーコンパクト エクストラソフト
- *セレクトコンパクトのサイズです
- *かたさはエクストラソフトのみです



スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの 77.1%、歯間ブラシの 82.3%はデベ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(toothbrushes)(interdental brushes), 2015

デペ イラストシリーズ With Children motives

デベのイラストシリーズはきれいな色とスウェーデンのデザイナー Isa Form がデザインしたかわいいイラストがお子さんに大人気！プレゼントにも最適です



色はアソートになります

イラストやカラーは変更になる事があります

- セレクトミニ エンジョイ エクストラソフト
- KDS (キッズ)コンパクト ソフト
- KDS (キッズ)コンパクト エクストラソフト



KIDS (キッズ)

セレクトミニ エンジョイ



セレクトミニ エンジョイはプリスターバックになります

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

日常的に取り入れやすく、 口腔内の健康をより向上させるための 一押しプロダクト



神谷町デンタルクリニック
(東京都港区)
院長 高島 美祐

2014年の開院以来、当院、神谷町デンタルクリニックでの一押しの歯磨き粉は、ロックスです。

最初は、聞きなれないロシア製ということもあり、使用に躊躇していたのですが、自他ともに認める健康オタクの私は、「オーガニック」という言葉に心を惹かれ、いただいたサンプルを恐る恐る使ってみました。

使用感としては、口腔ケア後の口腔内の爽快感の持続が以前よりも長く感じたので、試しに家族にも使ってもらったところ、同様の使用感を感じたようでした。そういった経緯もあり、患者様には安心してお勧めすることができるように、当院での取り扱い歯磨き粉は、開院から現在に至るまで、(メンテナンスメニューで使用するペーストを除き) ロックスのみです。

当初、患者様にお勧めするにあたって、聞きなれないロシア製に対して抵抗感があるかもしれない、と若干の心配もありましたが、神谷町という場所柄もあってか、健康に関する意識の高い方が多く、金属の

腐食の原因となるフッ素が含まれていないこと、また、オーガニックの製品であること、歯質のディミネラルとリミネラルに着目した新しい考え方の歯磨き粉であることをお伝えすると、嬉しいことに「試してみようかな」という方が多くいらっしゃり、当院ではロックスの中でも最高峰の天然成分97%のロックスPROシリーズ(市場には100%の物もありますが、97%のロックスは3年の使用期限があるのに対し、その他は天然成分の防腐剤を使用して期限がないことに疑問をいただいています。)に注力して販売をしたところ、あっという間に人気ものになりました。特に海外在住の患者様などは、帰国前に「10本用意しておいてください」とメールでオーダーが入るほどで、巷で手に入りにくいこともあってか、気に入っていただいた方の多くが、直接クリニックで再購入いただけるのもメリットに繋がります。

現在はロックスだけにとどまらず、ホームケアの標準として TePe やウルトラフロスの組み合わせが当院における基準となっております。これらは、お忙しい時間

のない方、不器用な方でも比較的短時間で効率よく口腔ケアを行っていただけるからです。もちろん、歯ブラシの替え時も細かくチェックし、毛先が開いていなくても3-4週間で新しい歯ブラシに変えていただくようお願いしています。TePeも、その日本では見ない大きさから、最初は使用を躊躇される方もいらっしゃるのですが、TePe 独自のメリットをお伝えし、一度ご使用いただくと、こちらもかなりの頻度でリピートされる方が多いです。

日々、さまざまな患者様がクリニックに足を運ばれますが、しっかりと口腔ケアのできる方もいらっしゃれば、逆に時間のあまりない多忙な方など生活習慣に合わせたホームケアを勧めるにあたり、**患者様が日常で簡単に取り入れやすく、なおかつ口腔内の健康がより向上するようなプロダクトが必要不可欠ではないでしょうか。**

患者様のライフスタイルに寄り添い、継続的に健康な毎日がおくれるようなオーラルケア商品に今後も注目していきたいと考えております。



R.O.C.S. の会社 DRC グループの CEO と会長がご家族で来院



クリニック内の様子



フッ素嫌いな患者さんにオススメな ロシアの売上 No.1*1 ロックス歯磨剤



DRC Group

Evgeniya Sukhovolskaya

(ジェーニャ)

Очень приятно! (はじめまして!)

世界最大の国土面積を誇るロシアは、17,000,000km²と日本の約25倍の面積を有しています。地域の時差も最大で9時間とされ、標準時間は11あります。そんなロシアで日本に一番近いリバロフスクという都市は、飛行機で約2時間半と、実は日本に遠くない距離にあります。

人口は世界第9位の1億4300万人の国であり、歯科医師8万人、歯科衛生士は数千人とされています。そんなロシアのカリエス予防に関する考え方は、地域性の問題もあり、日本と比較すると特殊と言えるでしょう。特にここでは、昨今、日本で再石灰化効果が高いと言われるフッ素に焦点をあてていきたいと思います。日本では当たり前のように、そしてほとんどの歯磨剤に含まれていますが、ロシアでは現在もフッ素含有歯磨剤を問題視しています。

その要因として大きく2つの問題が挙げられます。まず、ロシアはソ連時代に風土病性とされたフッ素症（Endemic fluorosis）の発生した地域にあたります。これには現在のロシアだけではなく、ソ連に加入していたウズベキスタン、ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナなどの共和国も含まれます。当時、風土病であるフッ素症が発症した地域に対し、予防製品をはじめとしたフッ化物の商品の拡大はコントロール不可能でした。そのため現在もこの地域では、フッ化物配合の歯磨剤が継続的に販売され続け、日々状況が悪化しています。

次に問題となるのは、クレチニズム（Cretinism）とされる甲状腺機能低下症であり、またの名をヨウ素欠乏とし、これはロシアのほぼ全域が対象とされています。フッ素症同様、風土病ではありますが、ヨウ素が欠乏しているこの疾患では、フッ化物がヨウ素を取り除いてしまうため、IQ低下の要因となり、その回復は困難を極めます。

これを受けロシアの政府は、カリエス予防であるフッ素の代替となる成分の開発を決断し

ました。今日に至るまで、おそらく他国よりも多岐に渡り研究と実験を重ね、R.O.C.S.[®]はその中でも有効性の高い成分である「ミネラリン」を独自の製法を用いて開発されました。その有効性はフッ化物に劣らないとされ、安全面でも問題がないため、ロシアでNo.1*1のシェアを誇ります。

R.O.C.S.[®] が選ばれている理由は、活性バ イオ成分を高濃度に含んだ天然成分である ことです。

ロシアではブラッシングの際、歯磨剤の原料のほとんどが口腔粘膜に吸収され、体内血液にまで到達されるといわれています。少量とは言え、体内に対し有害なものを少しでも含みたくないと考えている患者さんは潜在的に存在しています。そのようなフッ素やパラベン、ラウリン酸ナトリウムに着色料や保存料などが含まれていない歯磨剤を好まれる、健康意識の高い方たちは日本にも存在するのではないのでしょうか。

R.O.C.S.[®] は一部の製品を除き、以上のものを含まず、天然成分95%～97%で構成されています。製造も成分本来の機能を損ねないように「低温沸騰」と呼ばれる独自の生産技術で行い、それによりパインナップル酵素（プロメライン）は活性化している状態で口腔内に届きます。さらに、通常は2%の濃度しか含まれていないキシリトールを10%と5倍の濃度で使い、CPP-ACPのようなミネラル成分（グリセロリン酸カルシウムとマグネシウム）に富んだ「ミネラリン」という成分を含めました。これはロシアで特許を取得しています。

以上の理由から R.O.C.S.[®] は成分知識の豊富な健康意識の高い方たちにぜひ薦めて頂きたい製品です。特にパインナップル酵素（プロメライン）はタンパク質を柔らかくするとされています。ブラッシング後は歯がツルツルになった感覚を実感でき、他のキシリトールやミネラル成分が美白など口腔内の健康状態をサポートすることが特徴です。

種類もいろいろとありますが、インパクトの

ある黒いパッケージのホワイトニング^{*2}シリーズのセンセーションWがオススメです。ツブツブ粒子の酸化チタンが徐々に口腔内で小さくなっていくマルチスケーリングシステムを採用しているので、気分はさながら自宅でPMTCをしているような、荒研磨から艶出しまでをしているような使い心地です。薬効成分が含まれていない天然成分のため、一度の使用で劇的な変化は起こりませんが、一本分ブラッシングしたらその白さに病みつきになるはず。

そして、ある程度着色の落ちた（一本使い終わった）方には、ワンランク上のPROシリーズへのステップアップが、ホームケアのモチベーションにも繋がりがやすく、オススメです。PROシリーズは必要以上に歯面を傷つけないよう研磨剤も形状や柔らかさを工夫しているので、センセーションWを使用してブラッシングで白くなった歯の白さの維持に最適です。日本でもメンテナンスに注目が集まっているようですので、この2ステップからなるR.O.C.S.[®]のホワイトニングメンテナンスプログラムをぜひお試しください。

遠いようで意外と近い日本の方にもこのR.O.C.S.[®]の歯磨剤の良さが伝われば嬉しく思います。また、日本市場に適した新商品を今後も発売していきたいと考えています。

Большое спасибо!
(ありがとうございました!)



"サーシャ" くんのお母様から知られるプロスケイターブルシェンコ選手の息子さん（アレクサンドル・ブルシェンコ）はロックス製品を愛用しています♪

*1 DSM Group data, Jan. '2017

*2 ブラッシング効果による

デンタルフロスの使用で差がつく「予防歯科」 フロスを習慣にする第一歩 ガムチャックス



ラウナ南大井デンタルクリニック

Launa Minamioi
Dental Clinic

ラウナ南大井デンタルクリニック
(東京都品川区)
歯科医師 田中 千久紗



現在、フロスは従来のロールタイプからフレイバー付きのものまで、様々な種類の商品が販売されています。ロールタイプのフロスは大白歯のフロッシングが難しく、またホルダー付きのフロスは大白歯まで届きやすくて、ただフロスを隣接部に通すだけでは隅角部にプラークが残存します。

その中で「ガムチャックス」はロールタイプのフロスとホルダー付きのフロスのいいところを取ったフロスと言えるのではないのでしょうか。とくにフロス初心者の方へお薦めします。

ある調査データで『歯科医院で受診した診療科目』について調査した結果、欧米は「歯の健康状態の診断」がアメリカ：64.5%、スウェーデン：70.4%であったのにたいして、日本は「ムシ歯治療」が66.6%と最も多く、残念ながら「予防歯科」はまだまだ浸透していないことが分かります。

当院はコンセプトとして、「生涯の豊かな生活のサポートをする」を掲げ、予防歯科の啓蒙を日々の診療で行なっています。

そのため、カウンセリングに力を入れています。カウンセリングでは歯の構造や歯周病、う蝕についてなどアニメーションなどを用いて説明を行い、まずは来院者様にご自身の歯に興味を持っていただくことから始めています。また、歯ブラシなどの使用中のデンタルグッズについてお聞きしますが、こだわりを持ち選んで使用している方・使用しているデンタルグッズの商品名を答えられる方は残念ながらほとんどいません。また1日2回歯磨きをするとお答えされる方は多いですが、歯間ブラシやフロスの使用率は2割程度です。その理由の大半は「やり方が分からない」・「物が挟まった時だけ使う」というものでした。

歯ブラシ単独の場合とフロスを併用した場合のプラーク除去率は、歯ブラシ単独が約58%に対してフロス併用の場合、約86%とおよそ30%プラーク除去率を上げると説明するとほぼ100%の来院者様は驚かれます。口腔内のpHは6.8～7.2の中性にありますが、とくに乳歯や萌出したての永久歯の場合、pH6.2でう蝕になりやすい環境とされていますので、3ヶ月前の検診でなかった

はずのう蝕が…！ということはめずらしくありません。また、う蝕は隣接面からの進行がほとんどで、そのほとんどはフロスを使用していないのが原因です。

当院では1日1回フロスをしっかり通すようにと指導していますが、フロッシングに慣れていない方の場合、ロールタイプだととくに大白歯のフロッシングが難しく、お子様の仕上げ磨きの際、歯肉にフロスを押し当ててしまったりと、逆にフロスを嫌がる原因となってしまう。

「ガムチャックス」はヌンチャクのような2本のハンドルがついていますので、前歯はもちろん、指では届きにくい大白歯も簡単にフロッシングを行うことができます。実際フロスができなかった子どもが、「ガムチャックス」を自分で持って楽しんでフロスをしてくれます。カチッとリフィルを取り外せるところも、おもちゃ感覚で楽しいようです。

フロスを習慣にする第一歩として「ガムチャックス」を私は自信を持ってお薦めします。



ガムチャックス大好き！



指では届きにくい大白歯でも簡単



ハンドル操作なので、子供でも出来る



後ろをカチッと押すと、リフィルが飛び出しおもちゃ感覚で楽しい！

体にも良く安心な

ペットのデンタルケア

このまま歯周病が進行し、私をぺろぺろ舐めるそのお口からの菌のキャッチボールは絶対に避けたい。

阿部デンタルオフィス
(東京都板橋区)

歯科衛生士 **梅谷 有未**



三匹の愛犬と暮らしている犬バカ歯科衛生士です。職業柄「犬たちの口腔ケアはばっちり!!」の予定だったのですが、嫌がる! 逃げる! 暴れる! 噛む! のオンパレード、過去に飼っていた子には本気噛みをされ、何度流血したことか…上手に磨かせてくれるのは、三匹のうち一匹、しし丸君だけ。それもかなりのあきらめ顔で渋々です。



渋々磨かせてくれるしし丸

「でもやらないと…」頭ではわかっていますがやっぱりできない! 仕事の後に押さえながら無理やり磨く体力と気力が残っていない事もしばしば。歯磨きを嫌がるお子さんに手を焼いている患者さんの気持ちがめちゃくちゃわかります。

患者さんには「気持ちを楽に、最初はお口を触られることにならずつもりで。」「嫌がって暴れるときはこうやって。。」などアドバイスしていますが、我が犬には言葉は通じず。市販の歯磨きガムも何度か試しましたが、それほど効果も実感できないうえに、カロリーや原材料、添加物のことを考えるとあまり与えたくない。と思っているうちに、我が子のお口が臭い出し、歯石もうっすらついてきました。。

このまま歯周病が進行し、私をぺろぺろ舐めるそのお口からの菌のキャッチボールは絶対に避けたい。どうしたものかと思っていた時に「**まずは二週間試してください」とブラークオフデンタルバイツを勧められました。おやつで改善? 基本は歯磨きだし。と思いつつ使用開始!**三匹のうちポメラニアンとしし丸は食べず。トイプードルのなつめとチワワの大吉は喜んで食いつきました。

食べる二匹のお口の中は二匹とも生臭い口臭です。一日三粒、ドライフードみたいなカリカリの粒なので与えやすいし、小型犬に



① トイプードルなつめ五才→口臭強、歯石あり



② チワワ大吉一才→口臭弱、歯石あり

も安心の大きさです。大吉はカリカリ噛んでくれますが、なつめは丸飲みしました。丸飲みでも効果はあるそうです。

歯磨きを頑張ることなく二週間経過すると。

① なつめ→口臭減少、生臭さは少しあり。

歯石量、プラーク量ほぼ変わりなし

② 大吉→口臭無し! ほとんど気にならない程度。

歯石量、プラーク量ほぼ変わりなし

③ しし丸→一度も食べず。

チワワの大吉はもともと口臭が弱かったせいなのか、しっかり噛んで食べていたせいなのか、二週間で口臭はほぼなくなりました。

一ヶ月経過すると

なつめ、大吉ともに口臭ほぼなし!

なつめの歯石とプラークが少し減ったような気がしました。正直、口臭が無くなったことにはびっくりしました。しかもそれが二週間程度で効果が出てきたこともです。二ヶ月続けると歯石やプラークの沈着を抑制する、と記載されているので、継続して与えてみたいと思います。

お口の健康には人も、動物も正しいブラッシングが一番、でも動物相手にはなかなかそうもいかないのが現状です。そんなときにブラークオフデンタルバイツのような安全で原材料がしっかりしているもので、なおかつ効果が期待できるものがあると心強いなと思いました。できるときは気合でブラッシングをがんばりつつ、**毎日のケアはブラークオフデンタルバイツに任せます。**

原材料のメインである海藻(アスコフィラムノドサム)について調べたら、お口だけでなく体にも良い成分がたくさん含まれており、免疫を活性化させる機能やガン細胞にも効果が期待できるそうです。その効果も魅力ですね。



三匹の愛犬、左から なつめ・しし丸・大吉

Tandhygienist Dagarna 2018

(スウェーデン歯科衛生士会年次総会)

参加レポート

赤い屋根がかわいらしいヴィズビーの街並み

クロスフィールズ株式会社
歯科衛生士 小林 亜子

2018年4月、スウェーデン歯科衛生士会の総会に参加しました。毎年開催地が変わりますが、今年はスウェーデン最大のゴットランド (Gotland) 島での開催でした。多くの歴史的な建物や城壁、素晴らしい自然を誇る、スウェーデンの人たちの旅行先にも人気の島です。(日本でいう沖縄のような存在?!)

この総会は毎年3日間かけて行われますが、複数の講師による様々なテーマの2日間フルのレクチャーに加え、前夜祭や、パーティーなどのエンターテインメントも充実しており、ほとんどの参加者が泊りがけで来て、元同級生や同僚など、スウェーデン全土の歯科衛生士仲間との再会や出会いを楽しんでいます。スウェーデンには約4,200名の歯科衛生士がいますが、この総会には毎年約1,000名の参加者があるそうです。約4分の1という参加率に驚きました。年齢層も実に幅広く、20代~70代くらいまで、様々な年齢層の歯科衛生士が参加していました。

開会は、スウェーデンとヨーロッパ全体での歯科衛生士会会長であるイボンヌ・ニブロム (Yvonne Nyblom) さんの言葉で始まりました。イボンヌさんは歯科衛生士になってから毎年かさずこの総会に参加しているそうですが、前回ゴットランド島で開催されたのは30年前で、その頃イボンヌさんはまだ生後5か月の娘さんを初めてパパー人に預けて参加し、楽しかったけど家族が恋しくてたまらなかったとのことで、ほほえましいスタートでした。

スウェーデンでは歯科衛生士の資格を持つ人の85%が歯科衛生士として勤務していますが、それでも歯科衛生士が常に不足しているとのこと。その背景には、近年歯科衛生士が活躍する場の増加があります。スウェーデンでは歯科医院や訪問歯科での診断の約半数は歯科衛生士によって行われているそうです。また、歯科医院はもちろん、専門医クリニックや病院、リハビリ施設、介護施設、緩和ケアの分野でも歯科衛生士が必要とされています。多職種連携に伴い、医療知識の深い歯科衛生士や、リーダーシップを取れる歯科衛生士もますます必要とのことでした。

今回、スウェーデンでここまで歯科衛生士が活躍していることの背景に、歯科衛生士という職業に関わる全ての人が一丸となってこの職業をもり立てているのだということを感じることができました。スウェーデン歯科衛生士会には約85%の歯科衛生士が加入しているそうです。まず教育の質を高め、加えて充実した卒後教育を提供し、知識と責任感と即戦力を備えた歯科衛生士を生み出します。また労働市場や雇用者にも働きかけ、休暇や就業時間、労働環境など、より働きやすい環境づくりの整備にも取り組んでいます。多くの歯科衛生士は職業の質を高めたいと願っていますが、個人や少数で社会に影響を与えるには限界があります。この将来性があり社会にも深く貢献できる職業を少しでも働きやすいものにし、長く続けていくには、自分自身でも積極的に動いていく必要があるのだと感じました。そのために、このような意識を高め、また皆で楽しめる会の開催はとても魅力的だと思いました。



1,000人以上の歯科衛生士…圧巻です！



空港ではTePe イージーピックのポスターがおどむかえ！



スウェーデンの薬局で約 8 割のシェアを持つ TePe の歯ブラシ。シールには、「Sveriges mest köpta tandborste」(スウェーデンで最も購入されている歯ブラシ)と書いてあります。

知る限り、海外からの参加者は自分ひとり… 知り合いがほとんどおらず、ランチタイムやお茶の時間、パーティーの時には孤独で、あやうく何度も壁の花になりかけましたが、勇気を出して周囲の歯科衛生士さんたちに話しかけたところ、思いがけず話が盛り上がったり（日本はやはり“クール！”みたいですね😊）、クリニックに遊びにおいでとお願いされたりなど、良い出会いがありました。

そのうちのひとり、ランチタイムにたまたま隣に座っていた、開業している歯科衛生士のアニカ・カルネマー（Annica Carnemar）さんに突撃インタビューをしてみたので、その様子をページ下段に載せたいと思います！



1230 年ごろに建てられたセントニコライ教会にて前夜祭



スウェーデン歯科衛生士会会長のイボンヌさんと筆者

Interview

Hej Annica! ヘイ（スウェーデン語で“こんにちは”） アニカ！

アニカさんはどうして歯科衛生士になろうと思ったんですか？

私は 1980 年まではデンタルアシスタントでした。でも、アシスタントだけでなく、**もっと責任のある仕事**がしたい、患者さんそれぞれにもっと教育的なアプローチをして、**健康観を変えるお手伝い**をしたい、と思うようになり、それができる歯科衛生士の資格を取ろうと思いました。

どうして自分のクリニックを開業しようと思ったんですか？

歯科衛生士として 15 年間、公立の歯科医院や歯周病専門医のクリニックで働きました。スウェーデンでは歯科衛生士は歯周治療とカリエスの予防処置に関しては独立開業することができます。私はさらに責任感を持って患者さんの歯周治療に関わりたくて、2015 年に開業しました。

私は自分のペースで、“**量より質**”を重視して働きたいんです。患者さんと信頼関係を築き、自分で治療計画を立てたり、アプローチ方法を考えたりするのは責任も問われますが、とてもやり甲斐があり、楽しいです。もちろん、そのためには全身疾患のことや薬のこと、読影についてなども知っておかなくてははいけないので、常に勉強と情報収集は欠かせません。いざという時のための外部の歯科医師との関係もできているので心配はしていません。

毎日自分のペースで生活し、いい気分で目覚め、ゆっくり朝食を食べ、愛犬の散歩をしてから自分のクリニックに向かいます。ストレスフリーで最高の気分です！日本にも優秀な歯科衛生士さんがたくさんいると聞いています。近い将来、スウェーデンのように開業できるようになったらいいのではないかしら？！

アニカさん、ありがとうございました。

Tack så mycket! (タックソミュッケ！スウェーデン語で“ありがとう”)



これが私のクリニックです。ストライプのカフェカーテンや庭にあるような白いフェンスで、誰かのおうちのオープンテラスにいるような気楽な雰囲気を作っています。

患者様と 医院様のための 便利アイテム



プレデターターボ

PRIMA DENTAL **Prima Dental** 社の高品質バーシリーズ
商品名 プレデターターボ
Special PR-3T、PR-DX
 標準価格 各8,000円(税別) / 10本入
 PR-1T、PR-2T、PR-557T、PR-1557T
 PR-330T、PR-245T
 標準価格 各4,300円(税別) / 10本入

医療機器届出番号 13B1X00133000005

斬新な幾何学的形状を使用しスピーディーでスムーズな金属カットが可能
 タングステンカーバイド一体型なので折れにくい
 高密度に切削製造されたバーは回転軸、刃部の正確さで振動を減少



プレデターターボ PR-2T

プレデターターボ PR-3T **Special**

品番	PR-3T
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

金属除去用カーバイドバー (切れ味 UP)

プレデターターボ PR-DX **Special**

品番	PR-DX
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

ポーセレンやメタルボンド除去用カーバイドバー

プレデターターボ

品番	PR-2T	PR-1557T	PR-1T	PR-330T	PR-245T	PR-557T
作業部幅 (1/10 mm)	012	010	010	008	009	010
作業部長 (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7

金属除去用カーバイドバー

PREDATOR® CARBIDE BURS

トロール咬合紙

医療機器届出番号 13B1X00133000048



湿潤下でもより精度の高い
咬合診断が可能



極薄 8 μm
破れにくい PP 素材

商品名 トロール咬合紙

単品 レッド、ブルー

標準価格 各 3,600 円 100 枚 / 箱 @ 36 円 (税別)

ラクスエーター・プラス

医療機器届出番号 13B1X00133000007

DIRECTA

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感*

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の
- ・歯周靱帯切断ができる

【ラクスエーター・プラスの使用方法】



1 歯の長軸方向に対して真直ぐに挿入します
 2 歯に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靱帯を断っていくと根効果にを切り進めていきます
 3 根長の3分の2程度切断していくと根効果により歯を脱臼できます

商品名 ラクスエーター・プラス

標準価格 (税別)

K4 (スタンダード 4 本)	41,000 円
4 本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
SK4 (ショートモデル 4 本)	41,000 円
4 本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
K7 (スタンダード 7 本)	68,000 円
7 本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
単品 2S、3C、3S、3CA、3IC、5C、5S、2S、S3C、S3S、S3CA	12,000 円 / 本
単品 1S、DE3、DE5	13,000 円 / 本
単品 3S チタン、2S チタン	15,000 円 / 本
単品 DE3 チタン、3A チタン	16,000 円 / 本
シャーピングツール	2,700 円 / 個

* 当社実施アンケート結果より

プロフィーペースト Pro

医療機器届出番号 13B1X00133000027

ProphyCare®

プロフィーペースト Pro

- 1,000ppm フッ素含有
- 飛散しにくく、のびやすい
 - ・中性の pH 値 (5~6 pH)
 - ・爽やかなミント味
- 便利なラミネートチューブ
 - ・絞りやすく、無駄にならない
 - ・立てた状態で収納が可能
- 院内感染対策、訪問診療向けに単回使用のカップタイプ (2g) が追加

"The starter, effective removal of stubborn stains"

ブルー (97g/60ml)
RDA: 250 / 粒度: 125 μm
着色除去

"Less abrasive, but still effective"

グリーン (97g/60ml)
RDA: 170 / 粒度: 70 μm
スクレーピング後の二次研磨

"Gentle cleaning, tissue friendly stain remover"

レッド (84g/60ml)
RDA: 120 / 粒度: 20 μm
スクレーピング後の二次研磨

"Ideal for final polishing"

イエロー (84g/60ml)
RDA: 40 / 粒度: 2 μm
つや出し

"Clean and polish"

パープル (84g/60ml)
RDA: 197-50 / 粒度: 100-7 μm
スクレーピング後の一、二次研磨、汚れ除去、つや出し

商品名 プロフィーペースト Pro

チューブタイプ 60ml

各 1 本 標準価格 (税別)

パープル 4,600 円

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 3,600 円

アソート 4 本

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 円

単回使用 2g カップタイプ 144 個 / 箱

各 1 箱

パープル 18,000 円

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 14,000 円

ガムチャックス



OralWise

パッケージを簡素化し、お求めやすい価格になりました!

フロスをより楽しく!



C-シェイプ

米国で多くの歯科医師、歯科衛生士が推奨する理想的な形です。

C-シェイプとは

歯間隣接面のカーブにフィットし歯間乳頭まで挿入、歯肉縁下までしっかりと効果的にプラークを除去します。

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで



■ **ガムチャックス スターターバック 10 セット**
 ハンドル 1 セット、リフィル 12 個

■ **ガムチャックス お試し バック**
 ハンドル 1 セット、リフィル 3 個 × 10 セット

プレデタージルコニア

PRIMA DENTAI
PREDATOR®
DIAMONDS

プレデタージルコニア Z856-018F

商品名 プレデタージルコニア

Z801-018F, Z856-018F, Z862-014F, Z368-023F

(F ファイン) ●

Z801-018M, Z856-018M, Z862-014M, Z368-023M

(M ミディアム) ●

標準価格 各 7,500 円 (税別) /5 本入

Z856-018F, Z856-018M 標準価格 各 1,600 円 (税別) /1 本入

医療機器届出番号 13B1X00133000031

均等なダイヤモンドを均一に塗布することで高い切削率と発熱を軽減

特殊接着によりダイヤモンドの粒子の付着が長期間持続されるので消耗率が低い

ジルコニアに限らずメタルボンドやメタルクラウン等の補綴物除去にも高い切削力を発揮

品番	801	856	862	368
作業部幅 (1/10 mm)	018	018	014	023
作業部長 (mm)	-	9.0	7.0	5.0

KAI コーティング替刃メス

kai medical

医療機器認証番号 219ABBZX00078000

DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

低摩擦コーティングにより
切れ味が向上し
脂肪の付着が低減されることで
優れた切れ味が持続します

《材質》
・刃物用ステンレス鋼
《仕様》
・ディスプレイザブル (再使用禁止)
・Y線減菌済み
・20枚入
・10番替刃の適合ハンドル: M3

NO.10	1,000 円 (税別)
NO.11	1,000 円 (税別)
NO.12	1,000 円 (税別)
NO.12B	1,000 円 (税別)
NO.15	1,000 円 (税別)
NO.15C	1,000 円 (税別)

商品名 KAI コーティング替刃メス

標準価格 各 1,000 円 20 枚 / パック @ 50 円 (税別)

製造販売元: カイインダストリーズ株式会社

MI パンチ

kai medical

MI パンチ

MI PUNCH STERILE • STAINLESS STEEL • SINGLE USE

医療機器認証番号: 226ABBZX00075000

《特長》・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
・広範囲のサイズを取り揃えています

《材質》・ブレード: ステンレス鋼


10 本入 5,000 円 (税別)

1 本あたり 500 円 (税別)


販売名 MI パンチ

標準価格 5,000 円 10 本 / 箱 (税別)

製造販売元: カイインダストリーズ株式会社

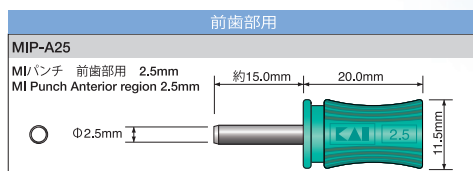

MIP-A35	MI/パンチ 前歯部用 3.5mm
MIP-A40	MI/パンチ 前歯部用 4.0mm
MIP-A45	MI/パンチ 前歯部用 4.5mm

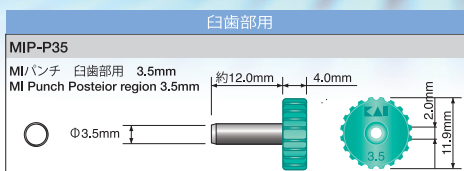

MIP-P40	MI/パンチ 白歯部用 4.0mm
MIP-P45	MI/パンチ 白歯部用 4.5mm
MIP-P55	MI/パンチ 白歯部用 5.5mm

ワムキークラウンリムーバー

医療機器届出番号 13B1X00133000032

WAM

早くて簡単なクラウンリムーバー、
クラウン除去の強い味方



商品名
ワムキークラウンリムーバー

セット 標準価格 50,000 円 (税別) 各 1 本 標準価格 20,000 円 (税別)

ワムキークラウンリムーバー No.1 ワムキークラウンリムーバー No.1

ワムキークラウンリムーバー No.2 ワムキークラウンリムーバー No.2

ワムキークラウンリムーバー No.3 ワムキークラウンリムーバー No.3

各 1 本、計 3 本、解説 CD

MD ガイド

医療機器届出番号 13B1X00133000058

WAM

MD ガイド
Mesial Distal Guide
インプラント用イニシャルドリル

商品名 MD ガイド

MD ガイド イントロキット 標準価格 120,000 円 (税別)

キット内容 各 1 個 ドリルガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)
ノンドリリングガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)
サージカルボックス

■ 簡単3ステップ

近遠心の補綴物を想定しながら簡単に位置を決められます



<MD ガイド イントロキット>
オートクレーブ対応 (134℃)

FRS 破折ファイル除去インスツルメント

医療機器届出番号 13B1X00133000051

File Removing System

使用時にストレスの少ない破折ファイル除去



商品名
FRS 破折ファイル除去インスツルメント

マイクロフォーセップス 標準価格 140,000 円 (税別)
フォーセップス 標準価格 35,000 円 (税別)

ピュアリフレクト ミラー

医療機器届出番号 13B1X00133000052

Prodent Holger

クリア! 明るい!! 鮮明!!!

商品名 ピュアリフレクト ミラー

単品 サイズ0、サイズ2 標準価格 各 16,800 円
12 個 / パック @ 1,400 円 (税別)

単品 サイズ4、サイズ5 標準価格 各 6,780 円
12 個 / パック @ 565 円 (税別)

ホワイトマジック

医療機器届出番号 13B1X00133000026

abrasive technology
WHITE MAGIC™

ホワイトマジックは
様々な用途に使用できます

- 矯正用ボンディング材の除去
- ステイン除去
- スケーリング後の歯面スムージング
- 余剰セメントの除去



商品名 ホワイトマジック

ホワイトマジック・イントロキット / 各モデル 1 本ずつ、合計 6 本
標準価格 5,040 円 (税別)



R.O.C.S.®

Smart Oral Care

ロシアでトップクラスのシェアを誇る人気ブランドの健康志向な歯磨材が登場

天然成分 R.O.C.S.® って何？

R.O.C.S.® の歯磨剤はハーブ由来の活性バイオ成分を高濃度に含んだ製品であり、「低温沸騰」と呼ばれる独自の生産技術で、成分の特性を極力破壊させずに、本来の効果をそのままにとどめています。天然由来の有効成分の多くは、通常の食品としても見かけられます。



口腔内を長時間
清潔に維持



* 歯を自然な白さ
にすることが可能



天然成分を主成分
とする口腔ケア



多彩なフレーバー
を提供



安全性を提供



口臭のない爽や
かな息に



ブロメラインは
パイナップルに
含まれています

Unique complex MINERALIN ミネラリンって何？

ブロメライン（酵素剤）、キシリトール（香料）、リン（湿潤剤）、カルシウム（湿潤剤）、マグネシウム（増粘剤）からなる複合体です

ブロメライン（酵素剤）：

お肉を柔らかくすることで知られる天然タンパク質分解酵素です。優しくしっかりプラークを除去します*。

キシリトール（香料）：

お口のいやな匂いを包み込み、さわやかな息で口臭を予防します*。

ミネラル（グリセリン酸カルシウム（湿潤剤）および塩化マグネシウム（増粘剤））：

ミネラルで口腔内の状態を改善し、口中を浄化します*。

MAGNESIUM


マグネシウム（増粘剤）

CALCIUM

カルシウム（湿潤剤）

PHOSPHAT

リン（湿潤剤）

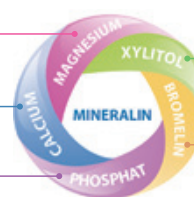

XYLITOL

キシリトール（香料）

BROMELIN

ブロメライン（酵素剤）

ホワイティングシリーズ

着色汚れのある歯を効果的に白くし
清潔で健康的な歯を目指したい方向
けのホワイティング*



センセーションホワイティング* 74g

商品名：ロックス センセーション W

PRO シリーズ

デリケートなトリプルシリカ（研磨剤）+ 天然酵素ブロメライン（酵素剤）
毎日使えるホワイティング歯磨きで歯を白く輝かせ美しいスマイルをキープ*



PRO デリケートホワイティング*
フレッシュミント 135g

商品名：

ロックス PRO デリケート W FM



PRO デリケートホワイティング*
スイートミント 135g

商品名：

ロックス PRO デリケート W SM

*ブラッシングによる効果

ProDen フロデン デンタルバイツ

愛犬・愛猫用デンタルおやつ

PlaqueOff®
Dental Bites

毎日のおやつで手軽にデンタルケア

人工保存料・添加物・着色料は
一切使用しておりませんので
安心して与えていただけます。

口臭
歯垢
歯菌
歯石
軽減に

商品名

ブラークオフ デンタルバイツ 愛犬用 1袋60g

ブラークオフ デンタルバイツ 愛猫用 1袋60g

犬用



猫用



60g

ブラークオフ デンタルバイツ 愛犬用 お試し1袋10g

ブラークオフ デンタルバイツ 愛猫用 お試し1袋10g

本紙に記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL : http://www.crossfield.com E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所