



テペ



Made in Sweden



TePe Oral Care Guide

テペ オーラルケアガイド



Daily Oral Care 毎日のケア

歯とハグキのケアをして健康に保つことはむし歯と歯周病予防の基本です。



セレクトコンパクト



セレクト [1段階植毛]



スプリームコンパクト




スプリーム [2段階植毛]



ノバ [先端段差植毛]



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

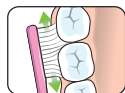

i プラークは歯の5つの面全て（内側、外側、かみ合わせ、歯と歯の間）に付着するので歯と歯の間のクリーニングが必要です。



オリジナル歯間ブラシ





アングル歯間ブラシ



ミニフロッサー

デンタルフロス

歯と歯の間のスペースが狭い場合は
デンタルフロスを使いましょう。

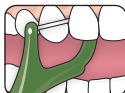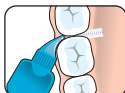

その他のアドバイス



お子さんが10歳くらいになるまでは必ず仕上げ磨きをしましょう。



のどが渴いた時には甘い飲み物ではなく水を飲みましょう。



フッ素が入った歯みがきペーストやマウスウォッシュを使いましょう。



1日に1回は歯と歯の間のクリーニングをしましょう。
スペースがある場合は歯間ブラシが最も効果的な道具です。



定期的に歯ブラシを交換しましょう。
1ヶ月に1回もしくは毛先が広がったら替え時です。



歯科医院で定期的なメンテナンスを受けましょう。



Oral care for kids & teens

子供のケア

Basic 基本のケア



セレクトミニ

はじめての乳歯～未就学児



セレクトコンパクト

就学児～ティーンエイジャー



スプリームコンパクト

就学児～ティーンエイジャー



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします

Additional 追加のケア



コンパクトタフト

生えはじめの歯やむし歯に
なりやすい奥歯のミゾに



デンタルフロス

歯と歯が接している場合の
ケアに



Caring for braces

矯正治療中のケア

Basic 基本のケア



セレクトコンパクト セレクト




スプリームコンパクト スプリーム



インプラント・矯正ブラシ

ワイヤーの上下からあてます

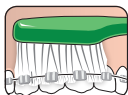


Additional 追加のケア



インタースペース

矯正器具のまわりに

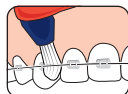


オリジナル歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ

矯正器具のまわりに

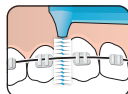

ユニバーサルケア

舌側矯正や保定装置の
まわりに





Bleeding, swollen & inflamed gums

歯周病が気になる時のケア

Basic 基本のケア



セレクトコンパクト



セレクト



スプリームコンパクト



スプリーム



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします



歯と歯の間のクリーニングは、歯周病の予防にとっても効果的です。
1日に1回は行いましょう。





オリジナル歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ



イージーピック

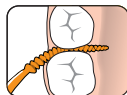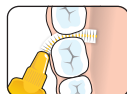


Additional 追加のケア



コンパクトタフト

歯とハグキの境目に

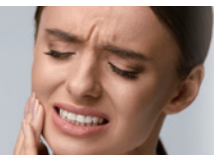

After surgery/sore gums

手術の後や ハグキが痛む時のケア

* 手術後のケアに関しては担当の歯科医師や歯科衛生士の指示に従ってください。

Basic 基本のケア




スペシャルケアコンパクト



スペシャルケア



ジェントルケア

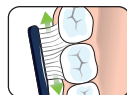

* とてもやわらかい歯ブラシのシリーズです。


このシリーズは密毛のため、よくすすいで風通しの良い場所で保管してください。

Additional 追加のケア



エクストラソフト歯間ブラシ

通常の歯間ブラシよりもブラシが
やわらかいので、デリケートな
ハグキや手術の後に適しています。

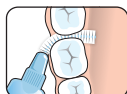



Caring for implants & bridges インプラントやブリッジを入れた時のケア

Basic 基本のケア



セレクトコンパクト



セレクト



スプリームコンパクト



スプリーム



あまり力をかけずに
小さく前後に動かします



歯と歯の間のクリーニングは、インプラント周囲炎の予防にとっても効果的です。1日に1回はいきましょう。




オリジナル歯間ブラシ



エクストラソフト歯間ブラシ



アングル歯間ブラシ

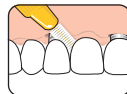

Additional 追加のケア



ユニバーサルケア

インプラントやブリッジ
の裏側のケアに





コンパクトタフト

インプラントのまわりに



デンチャーブラシ

入れ歯のクリーニングに

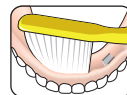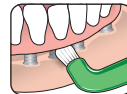

Complementary products

その他のケア

口臭が気になる時



タングクリーナー

口臭の原因となるバクテリアを取り除きます。
きれいに洗い流せるので長く清潔にご使用いただけます。

歯がねじれているところや親知らずに



ノバ




コンパクトタフト



インタースペース

先端のチップが届きにくい
ところにアクセスします

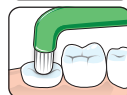



Made in Sweden

テペの製品はデザインから製造まで、すべての行程がスウェーデンで行われています。北欧ならではのデザイン性の高さも、テペ製品の特長です。

スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの77.1%、歯間ブラシの82.3%はテペ製品です。*

* Nielsen, pharmacy total, MAT TY, 2015



Dental expertise

テペのすべての製品は予防歯科先進国であるスウェーデンをはじめ、世界のデンタルプロフェッショナルとの密なコラボレーションにより設計されています。

スウェーデンの歯科衛生士の10人中9人がテペ歯間ブラシの使用を推奨しています。*

* IPSOS Healthcare, 2019-06-26, Brand Monitor Professionals



Used worldwide

テペの製品は世界の90ヶ国以上の国で毎日のオーラルケアに使用されています。



Environmentally responsible

テペは環境に優しい企業でありたいと願っています。太陽エネルギー等の再生可能エネルギーを100%使用し、製造時のCO₂排出量を限りなく減らすことを目指しています。

また、2023年1月以降TePe社が出荷している製品は環境にやさしいバイオベース材料に切り替わりました。

*イージーピックを除く



テペ・歯間ブラシ/
フロス/ピック
使用方法動画一覧



スウェーデンペリオインプラント学会

デンタルプロフェッショナルは
TePe製品を推奨しています



テペ・歯ブラシシリーズ
使用方法動画一覧



スウェーデン歯科衛生士会

スウェーデン歯科衛生士会と
TePe社は良好な口腔ケアを
促進するために協力しています

種類の選択や使用方法については担当の歯科医師や歯科衛生士にご相談ください
商品の内容・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。



販売元：クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

輸入元：株式会社吉田製作所

