



■ プロフィーペースト Pro	1 - 4
■ ブラークテクト・ペレット	5
■ ドライデント	6
■ ハイゴフォーミック (Bio)	7 - 8
■ ケアシールド	9
■ ラクスエーター・プラス	10 - 12
■ ラクスエーター・フォルテ/ルートピッカー	13
■ スポット イット ■ スティックンプレイス	14
■ フェンダーウェッジ・プロ	15
■ フェンダーメイト	16
■ ブラクティパルトレー	17 - 18



左記のQRコードより
アクセスしてください

DIRECTA



DIRECTA 社製品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、スウェーデンや国際的に著名で品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究し開発されています。

プロフィーペースト Pro HAp

予防歯科先進国スウェーデン発 世界 50 か国以上で使用されている
PMTc ペーストのロングセラー「プロフィーペースト Pro」シリーズ
ナノ粒子ハイドロキシアパタイト HAp 含有タイプ

ProphyCare® HAp

プロフィーペースト Pro HAp

■ ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有

PMTc 後もなめらかでツヤのある歯を保ちます。

■ RDA 197-50 ワンステップでケアタイムの短縮

- ・ 1 本でスクレーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能
- ・ 忙しい診療時に便利
- ・ 中性の pH 値 (5~6pH)
- ・ ミント味
- ・ 粒度: 100-7 μ m

■ フッ素無配合

■ 研磨剤配合 (シリカ)



商品名 プロフィーペースト Pro HAp

● チューブタイプ (60g)

標準価格 4,600 円 (税込 5,060 円) / 本

販売名: プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

ProphyCare®

プロフィーペースト Pro ブルー / グリーン / レッド / イエロー

4 種の RDA で歯面の状態に合わせてプロフェッショナルな使い分けが可能




● ブルー (97g/60ml)
RDA:250 / 粒度:125μm
着色除去

● グリーン (97g/60ml)
RDA:170 / 粒度:70μm
スケーリング後の
一次研磨や汚れ除去

● レッド (84g/60ml)
RDA:120 / 粒度:20μm
スケーリング後の二次研磨

● イエロー (84g/60ml)
RDA:40 / 粒度:2μm
つや出し

- 1,000ppm フッ素含有
- 飛散しにくく、のびやすい、選べる 4 種類の研磨剤
 - ・ 中性の pH 値 (5 ~ 6pH)
 - ・ 爽やかなミント味
- 便利なラミネートチューブ
 - ・ 絞り出しやすく、無駄にならない
 - ・ 立てた状態での収納が可能
- 院内感染対策用にカップタイプがあります

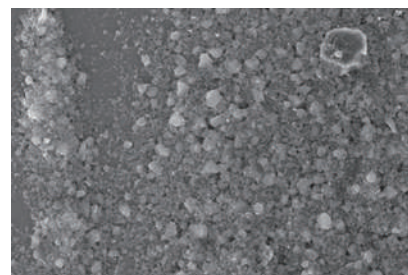

SEM 画像 (観察倍率: 2,000 倍 / イエロー RDA40) 粒子が細かく均一

商品名 プロフィーペースト Pro (ブルー、グリーン、レッド、イエロー)

● チューブタイプ (60ml) (ブルー、グリーン、レッド、イエロー)
各 1 本 標準価格 3,900円 (税込4,290円)
アソート4本 標準価格 15,200円 (税込16,720円)

● 単回使用 2g カップタイプ (ブルー、グリーン、レッド、イエロー)
各 1 箱 標準価格 16,000円 (税込17,600円)
144個/箱 *アソート4色の販売はありません

販売名: プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

歯科製品は世界中に星の数ほどあれど、臨床家の皆様、各々これだけは製造中止になって欲しくない!といった物があるのでは?と思います。プロフィーペースト Pro は、30 年以上前より長く歯周治療・予防処置の現場で使われており、その効果、安全性は広く世界中で実証されています。もちろん新しく開発された製品の素晴らしいと言うまでもありませんが、長く使われているという意味は、とても大切なことと考えられます。私自身、歯科衛生士となり臨床を始めさせていただいた当初より、このペーストを使わせていただいておりますが、きちんと数値化されているので、

天然歯がより適切に磨き上げ、歯質を作り上げられると実感しております。また、1000ppm フッ化ナトリウムが配合されているため、研磨中に起こる脱灰に対しても安心して使用することが出来ます。PMTC・歯面研磨は、その目的を考えると、どの器具どの機材を選択し使用するかにより結果が異なり、同じ行程をしていても、その治療の精度が違ってくると思います。プロフィーペースト Pro は、1 人ひとりの患者様へ良い状態をより長く提供するために今後も使わせていただきたいと思います。



歯科衛生士 島田 昌子

ProphyCare®

Clean and polish

プロフィーペースト Pro パープル

これ 1 本で

スケーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能

● パープル (84g/60ml) RDA:197-50 / 粒度:100-7μm オールインワンタイプ

■ 1,000ppm フッ素含有



● チューブタイプ

● カップタイプ



● チューブタイプ

● カップタイプ



衛生面を重視した単回包装
・訪問歯科に
・院内感染対策に



グローブ等に固定できる
粘着テープ付

商品名 プロフィーペースト Pro パープル

● チューブタイプ (60ml)

1本 標準価格 4,600円 (税込5,060円)


● 単回使用 2g カップタイプ

144個/箱 標準価格 21,000円 (税込23,100円)


販売名: プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

プロフィーペースト Pro のパープル (clean polish and desensitize) オールインワンタイプ

1 本でポリッシングまで可能

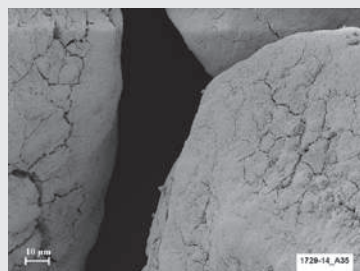

大きい粒子 (ブルー)
SEM 画像 (観察倍率:1000 倍 / ブルー)

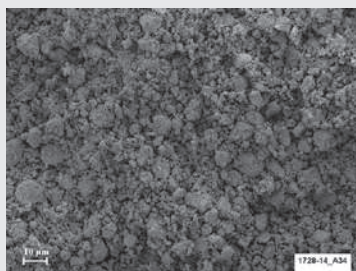

小さい粒子 (パープル)
SEM 画像 (観察倍率:1000 倍 / パープル)

シリカ製の粒子は尖ってなく丸いので歯面を傷つけにくい。
また、大 (ブルー)、小 (パープル) 2 種類の粒子が短時間で効率良く研磨

日常臨床で頻繁に行う PMTC。歯面を傷つけないために注意深く器具を操作するのはもちろんのこと、歯面研磨剤選びも重要です。プロフィーペースト Pro パープルの粒子はきれいな円形をしており、歯面を傷つけにくく、さらに使用時に RDA が 197 ~ 50 まで細くなることで、1 本で歯面からプラークやステインを効率よく取り除くことができます。歯面研磨剤に必要なフッ素も 1,000ppm 配合。のびのよいテクスチャーは、操作中、術者にストレスを感じさせません。

スウェーデン デンタルセンター
(東京都千代田区)
歯科衛生士 加藤 典



適用例	ブルー (RDA 250)	グリーン (RDA 170)	レッド (RDA 120)	イエロー (RDA 40)	パープル (RDA 197-50)	HAp (RDA 197-50)
強固な着色除去	●					
厚いプラーク除去	●	●				
一次研磨	●	●			●	●
着色除去		●			●	●
充填物の研磨			●		●	●
軽度の着色除去			●		●	●
薄いプラーク除去			●		●	●
根面の研磨			●		●	●
エアーポリッシング後			●	●	●	●
最終研磨 / つや出し			●	●	●	●
インプラント			●	●	●	●
小児				●	●	●
摩耗した歯面				●	●	●

Prophy Cup




側面の凸凹も研磨可能

商品名 プロフィーカップ Pro (ラバーカップ)

- スクリュータイプ 標準価格 12,000円 (税込13,200円) 144個/箱
- ラッチタイプ 標準価格 12,000円 (税込13,200円) 144個/箱

販売名: プロフィーカップ Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000053

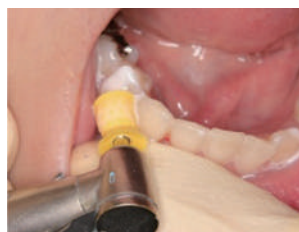

凹凸がペーストと絡んで効率よく研磨している
写真提供 中村歯科 中村豪介先生 (品川区)



凹凸があるため「2」研磨時に隣接の「1」も研磨されている



凹凸部分を舌側歯面に押しあてて使用


FixyDap™



使いやすく、衛生的なダッペンステッカー



グローブ等に固定できる粘着テープ付

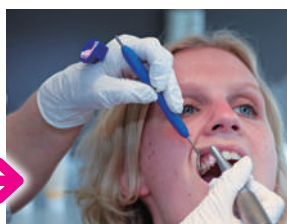

樹脂製ダッペンガラス
ダッペンステッカー



商品名 ダッペンステッカー

標準価格 10,000円 (税込 11,000円)
200個/箱

プロフィーコントラハンドピース クロスプロ CrossPro



ギア比 5:1 (1/5 減速)

商品名
クロスプロ (プロフィーコントラハンドピース)

標準価格 51,000円 (税込56,100円)
入力側最高回転速度: 40,000min⁻¹(rpm)
PMTC 用 スクリュー式
クロスプロ 40HZ ヘッド単体 (ラッチ式)
標準価格 27,000円 (税込29,700円)

ラッチタイプのブラシやカップを使用する時に簡単に交換できます

販売名: クロスプロ 医療機器認証番号 20900BZZ00015A01

スウェーデンでシェアの高い研磨ペースト

“Prophy Paste(プロフィーペースト Pro)”は、“prophylactic treatment (予防治療)”にて強固な着色からつや出し、歯周治療、インプラントなど幅広いケースにおいて使用できる研磨剤です。この商品の良さは歯面の状態に合わせて使い分けができるだけでなく、飛散しにくく、他の治療と併用することで歯の周りにおける不要な物質を除去し、感染と着色のリスクも軽減され、快適でスムーズな口腔内環境が提供される事です。

歯科のプロフェッショナルとして処置に必要な手順を最適化し、快適な治療を患者さんに提供するためにも、治療は歯のクリーニングから始まり終わるべきではないのでしょうか。スウェーデンではカロリンスカ大学病院をはじめ、多くの大学病院や歯科医院において“Prophy Paste(プロフィーペースト Pro)”が日々の診療に欠かせない研磨剤となっています。

Claes Bernhardtsson DDS



PlacTectPellet

ブラークテクト・ペレット

充実したスウェーデン式 TBI に欠かせない歯垢染色シリーズ



ブラークテクト・ペレット イエローを使用



ブラークテクト・ペレット レッド (ミントフレーバー)

3 日以内に付着したプラークを判別

- 3 日以内に付着したプラークには **赤色** に反応して直近の磨き残しを把握できるので、しっかり磨けていると思っている部分のプラークを確認できる
- 液の飛散がないペレットタイプ

ブラークテクト・ペレット ブルー (ミントフレーバー)

3 日以内に付着したプラークと
4 日以上付着しているプラークを判別

- 3 日以内に付着したプラークには **赤紫色** に反応して直近の磨き残しを把握できるので、しっかり磨けていると思っている部分のプラークを確認できる
- 4 日以上付着しているプラークや歯石は **青紫色** に反応して常に磨き残している部分を確認できる
- 液の飛散がないペレットタイプ

ブラークテクト・ペレット イエロー (ミントフレーバー)

水で洗い流せて清潔感のある、
目立たない染色

- 青色 LED を当てた時だけプラークが **黄色** に反応するので、通常時は目立たない
- スピットンに液が残らないので清掃の必要がなく、清潔で患者さんの印象が良い
- 液の飛散がないペレットタイプ



ブラークテクト・ペレット
ブルーを使用

4 日以上付着しているプラークが **青紫色** に反応して常に磨き残している部分を確認できる

3 日以内に付着したプラークが **赤紫色** に反応して直近の磨き残しを確認できる



清潔で使いやすいペレットタイプ
セルフロック式のワムゲコツィー
ザークラシック (別売) でしっかりと把持



- 商品名 **ブラークテクト・ペレット イエロー**
青色 LED ライトをご使用下さい。
標準価格 7,000 円 (税込 7,700 円) / 200 ペレット
- 商品名 **ブラークテクト・ペレット ブルー**
標準価格 3,000 円 (税込 3,300 円) / 100 ペレット
- 商品名 **ブラークテクト・ペレット レッド**
標準価格 3,000 円 (税込 3,300 円) / 100 ペレット

DryDent® ドライデント

唾液などを吸収して治療の効率化と患者さんの心地よさを提供



■ 頬粘膜用



■ 舌下用

顎下腺に直接触れることでより多くの唾液を吸収

湿気や唾液を吸収し理想的な乾燥状態を保てる

舌下の湿気や唾液をしっかりと吸収

短時間で湿気や唾液を吸収し治療しやすい乾燥状態となる

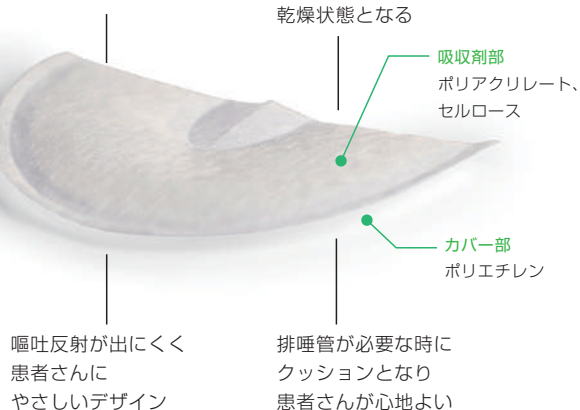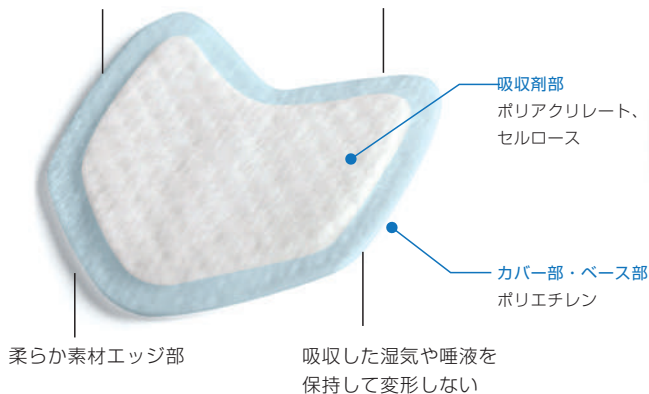

頬粘膜用：白い面を頬粘膜側に使用



舌下用：舌下小帯用の切り込みを合わせて装着



写真上 / 根管治療時に頬粘膜用を使用
写真下 / 小児患者のシーラント処置時に舌下用を使用



写真提供
てらだデンタルクリニック（千葉県柏市）
歯科医師 寺田 久美子
歯科衛生士 高山 由衣



矯正治療のリンガルボンディング時に使用



ドライデントは、大量に出てくる唾液を吸収してくれるので、ボンディングリテーナーやリンガルボンディングなどに非常に適しています。

Örtendahl Ortodonti AB
Orthodontist, CEO
Dr. Thomas Örtendahl

4^{av}10
PATIENTER KÄNNER
OBEHAG AV SALIVSUGEN



10人中4人の患者さんが唾液吸引に不快感がある



スウェーデン
*Touch & tell 調べ(2015年)

AV DESSA HAR BARA
HÄLFTEN



BERÄTTAT DET FÖR
SIN TANDLÄKARE

不快に感じている患者さんの4人に2人だけしか、その不快感を伝えない

41%
AV PATIENTER SÄGER
ATT DE SKULLE
VÄLJA EN
TANDLÄKARE
SOM ANVÄNDER
ALTERNATIV
TILL SALIVSUGEN


41%の患者さんが、通常の唾液吸引と異なる方法をとる歯科医院を選ぶと回答している

商品名 ドライデント

- 頬粘膜用 L 標準価格 1,800 円 (税込 1,980 円) /50 枚
- 頬粘膜用 S 標準価格 1,800 円 (税込 1,980 円) /50 枚
- 舌下用 L 標準価格 3,200 円 (税込 3,520 円) /40 枚
- 舌下用 S 標準価格 3,200 円 (税込 3,520 円) /50 枚

販売名：ドライデント 医療機器届出番号 13B1X00133000064

● 頬粘膜用 S (寸法図)

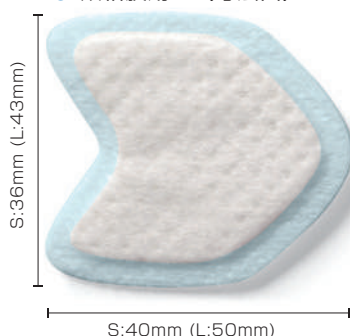

● 舌下用 S (寸法図)



ORSING

Hygoformic® Bio

バイオ

ハイゴフォーミック Bio

スウェーデンの歯科医院・大学で広く使用されている

ハイゴフォーミック

排唾ラインに接続してしっかり吸引します

環境にやさしい サトウキビ由来のバイオベースポリエチレンでできています



The sustainable future of your dental practice

二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化を抑制するために。



ハイゴフォーミック (Bio) は再生可能なサトウキビを原料とした

バイオベース ポリエチレンを使用しています。



- 患者さんの口腔内状態に合わせて自由な形にアレンジ可能
- コイル部分の 5 つの穴から効率よく吸引
- コイル部分が舌や頬粘膜を排除
- 軽量で柔らかく患者負担が少ない
- 衛生的な単回使用
- 環境に優しいサトウキビを原料としたバイオベース ポリエチレン “グリーン PE” を使用


【使用例】

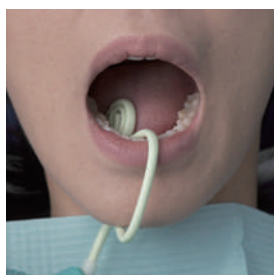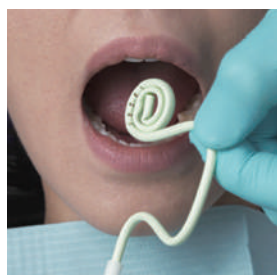


患者さんの骨格や施術箇所に合わせて形を調節でき、また顎に固定できるので安定した使用が可能




舌側に使用

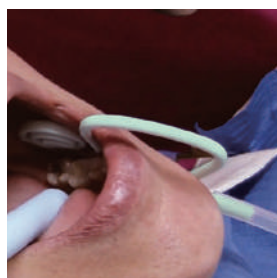

頬側に使用

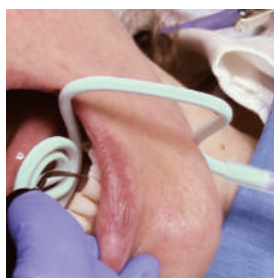

舌下に使用

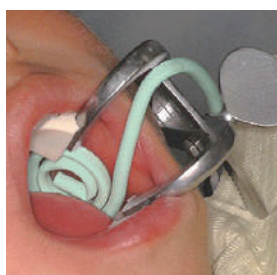

開口器使用時に使用



ラバーダムと併用




舌の保護をしながら
クランプと使用



専用アダプター（オートクレーブ不可）
（外径 6.5mm、内径 4mm、長さ 45mm）

ハイゴフォーミック (Bio)

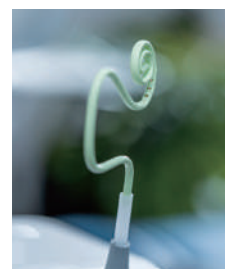

専用アダプターを使って
排唾ラインに接続

商品名 バイオ
ハイゴフォーミック Bio

100 個入（専用アダプター 5 個付）

標準価格 2,200 円（税込 2,420 円）

使用例
詳しくは動画を御覧ください



販売名：ハイゴフォーミック 医療機器届出番号 13B1X00133000065



商品名
オートクレープアダプター 10 個入
オートクレープ可 (134℃)
標準価格 2,100 円 (税込 2,310 円)

オートクレープアダプター使用例



商品名
U16-11 アダプター 10 個入 (16mm から 11mm へ変換する)
オートクレープ可 (134℃)
標準価格 5,000 円 (税込 5,500 円)



商品名
ダブルアダプター 10 個入
オートクレープ不可
標準価格 2,100 円 (税込 2,310 円)

ダブルアダプター使用例




根管治療時に使用



補綴物装着時の防湿に使用

写真提供：守口歯科クリニック (岩手県盛岡市) 守口 和 先生

ハイゴフォームの先端近くの渦巻き部分は自由に
変形することが可能なため、患者に嘔吐反射を起こさ
せずにもっとも効率よく吸引する形に調節できる。
先端だけでなく、側面にも 5 か所の小孔が穿たれて
いるために、効果が持続する。また、コの字状の部分
を調整して下顎に挟むことで、使用中にその位置がず
れることを防いでくれる。そして先端を口腔底に設置
することにより舌を排除 (写真)、あるいは頬側に置
くことで頬粘膜を排除することが可能である。

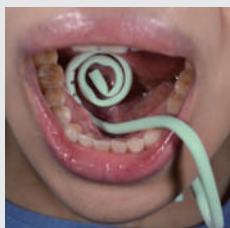


自由に変形することが可能

また、排唾管の形状は、洗浄したとしても前の患者の
汚れが完全に除去された保証はない。日本での患者の
衛生観念は確実に変わってきており、医療の現場でも
われわれの行動に目を光らせるようになってきた。こ
のようなディスプレイの製品を患者の目前で装着
し使用後に廃棄している姿を見せることによって、感
染対策に十分力を注いでいることを知っていただくこ
とも、医療現場での真のサービスと言えるのではない
だろうか。



ブローネマルク
オッセオインテグレーション
センター
(東京都千代田区)
院長 小宮山 彌太郎

超音波スケーラーなど注水があるものに関しては、患
者さんへの負担が少ないことや施術しやすいことから
私はハイゴフォームを使用しています。
バキュームを持つとミラーが持てなくなるため、左上
頬側の臼歯部は確実に見ることができません。よく見え
ないため施術の質が落ちてしまう可能性も考えられま
す。またのぞきこむようになるので患者さんに覆いか
ぶさるような姿勢になり、場合によっては患者さんに
不快なイメージを与えてしまいます。

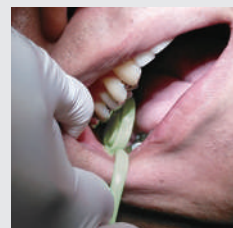

私は患者さんの右側にハイゴフォームをかけ、少
し曲げて安定させるようにしています。こうすると施
術中に途中でかけなおす必要もありませんし、穴が複
数開いているため吸水が一点に集中せず頬粘膜を吸っ
てしまうこともありません。喉に水が溜まることがつ
らい患者さんや嘔吐反射がある患者さんは少し顔を右
に向いていただくと楽なようです (写真)。ディスポー
ザブルであることも感染予防対策として望ましいと思
います。施術力を上げ、メンテナンスの質を高めるた
めに、ハイゴフォームの利用は有効だと思います。



有田歯科医院
(東京都新宿区)
歯科衛生士スタジオグループ
奥山会主宰
歯科衛生士 奥山 洋実

ORSING

CareShield™

ケアシールド

手軽にエアロゾル軽減



- エアロゾルや飛沫拡散軽減に
- 感染対策に
- シールドは衛生的な単回使用
- コネクター・アダプターはオートクレーブ可能

(134℃) 乾燥工程不可

* シールドリフィルは単回使用

* 商品動画はこちらの QR
よりご確認ください



● シールドリフィル

* 単回使用

● コネクター

* オートクレーブ可

商品名

ケアシールド スターターキット ● ●

内容物： シールドリフィル × 100 枚、コネクター × 5 個
H6.5-11 アダプター × 10 個

標準価格 28,000 円 (税込 30,800 円)

商品名

ケアシールド シールドリフィル ●

100 枚入

標準価格 23,000 円 (税込 25,300 円)

単回使用

商品名

ケアシールド コネクター ●

5 個入

標準価格 10,000 円 (税込 11,000 円)

オートクレーブ可能 (134℃) 乾燥工程不可

商品名

H6.5-11 アダプター

10 個入

標準価格 5,000 円 (税込 5,500 円)

オートクレーブ可能 (134℃) 乾燥工程不可

商品名

U16-11 アダプター

10 個入

標準価格 5,000 円 (税込 5,500 円)

オートクレーブ可能 (134℃) 乾燥工程不可

* ケアシールド スターターキットには含まれません



内径 11mm

外径 6.5mm

内径 11mm

外径 16mm

販売名：ケアシールド 医療機器届出番号 13B1X00133000077

Luxator® P-series

ラクセーター・プラス Pシリーズ

ラクセーターシリーズに操作性を極めたペンタイプ（Pシリーズ）が登場



- 歯根膜への挿入が容易
- 生体親和性が高いチタンコーティング
- シャーピング不要

！ 不適切な使用法によるブレードの破損や折れ及び、
シャーピングによるコーティングの剥がれは保証の対象になりません。
オートクレーブ対応（135℃）


商品名

ラクセーター・プラス Pシリーズ

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|
| ■ P1 |● |  |
| 標準価格 | 15,000 円 (税込 16,500 円) | |
| ブレード幅：3mm | 形状：ストレート | 色：ダークグリーン 全部位（残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心） |
| ■ P2 |● |  |
| 標準価格 | 15,000 円 (税込 16,500 円) | |
| ブレード幅：3mm | 形状：カーブ | 色：ライトブルー 全部位（残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心） |
| ■ P3 |● |  |
| 標準価格 | 15,000 円 (税込 16,500 円) | |
| ブレード幅：3mm | 形状：コントラアングル | 色：ダークブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心 |
| ■ P4 |● |  |
| 標準価格 | 15,000 円 (税込 16,500 円) | |
| ブレード幅：4mm/1.5mm | 形状：デュアルエッジ | 色：パープル 残根 |
| ■ ■ ■ PK4 | 標準価格 52,000 円 (税込 57,200 円) | 4本セット（P1、P2、P3、P4） |

マレットが使用できます

販売名：ラクセーター・プラス 医療機器届出番号 13B1X00133000007

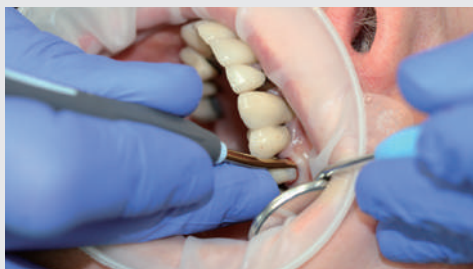

写真提供：Dr. Manouchehr Kiaei, Sweden



従来型よりも刃がより薄く鋭利になったとのことで、これまでよりも弱い力での操作が可能になりました。操作性の向上だけでなく安全性の面で、Pシリーズは抜歯鉗子と形態が類似していないので術中にうっかり回転や鉗子運動をさせてしまうことによる損傷は回避できると思います。

高梨歯科（東京都中央区） 歯科医師 高梨 芳彰

Luxator® Periotome

ラクスエーター・プラス

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた高品質なスウェーデン鋼使用

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感*

- 無理のない抜歯ができる
- 骨損傷が最小限の歯周靱帯切断ができる
- インプラントのための良好な骨組織の保全が可能になる
- 抜歯窩の損傷が最小限である
- 術後の痛みと腫れの経過が良好である
- 力に頼らずに抜歯が可能である

* 当社実施アンケート結果より

商品名 ラクスエーター・プラス

■ K4 (スタンダード 4 本) 標準価格 52,000 円 (税込 57,200 円)
4 本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1 本

■ SK4 (ショートモデル 4 本) 標準価格 52,000 円 (税込 57,200 円)
4 本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャーピングツール 1 本

■ K7 (スタンダード 7 本) 標準価格 90,000 円 (税込 99,000 円)
7 本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1 本

シャーピングツール
(ラクスエーター・プラス専用)

ラクスエーター・プラス単品 1 本に
フィックス 1 が 1 個付きます
* オートクレープ可能



単品 標準価格 15,000 円 / 本 (税込 16,500 円)
2S、3C、3S、3CA、3IC、5C、5S、S2S、S3C、S3S、S3CA、S5S

単品 1S、DE3、DE5 標準価格 17,000 円 / 本 (税込 18,700 円)

2S チタン 標準価格 19,000 円 / 本 (税込 20,900 円)

3S チタン 標準価格 19,000 円 / 本 (税込 20,900 円)

3A チタン 標準価格 21,000 円 / 本 (税込 23,100 円)

DE3 チタン 標準価格 21,000 円 / 本 (税込 23,100 円)

シャーピングツール 標準価格 3,500 円 / 本 (税込 3,850 円)

販売名: ラクスエーター・プラス 医療機器届出番号 13B1X00133000007

品番	1S	K7	SK4	K4	K7	SK4	K7	SK4	K7	SK4	K7	SK4
ブレード幅	1mm	2mm	2mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	5mm
形状	ストレート	ストレート	ストレート/ショート	カーブ	カーブ/ショート	ストレート	ストレート/ショート	ストレート	ストレート/ショート	ストレート	ストレート/ショート	カーブ
シャンク部	約 74mm	約 74mm	約 64mm	約 74mm	約 63mm	約 74mm	約 64mm	約 74mm	約 64mm	約 74mm	約 64mm	約 72mm
色	ライトグリーン	グリーン	グリーン	ブラック	ブラック	グレー	グレー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブラウン
推奨使用部位	残根 / 根尖	残根 / 根尖	残根 / 根尖	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 白歯遠心)



17,000 円 / 本
(税込 18,700 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)

Luxator® Periotome Titanium


ラクスエーター・プラス チタンコーティング

ラクスエーターシリーズに耐久性を追求したチタンコーティング

■ 特徴

- ・ 歯根膜への挿入が容易
- ・ 生体親和性が高いチタンコーティング
- ・ シャープニング不要

【ラクスエーター・プラスの使用方法】

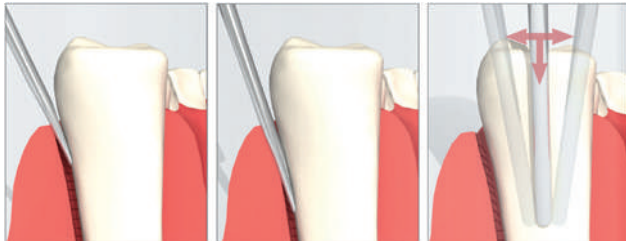

1. 歯の長軸方向に対して真直ぐに挿入します
2. 歯に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靱帯を切り進めていきます
3. 根長の3分の2程度切断していくと楔効果により歯を脱臼できます

! 注意事項



エレベーターのように使用できません
不適切な使用法によるブレードの破損や折れ、
及びシャープニングによるコーティングの剥がれは
保証の対象になりません。

本製品は鋭い刃先を持っています。取扱にはご注意ください

* オートクレーブ対応 (135℃)



3A チタンの使用例

DE3, DE5 は段差をつけた特徴的な形状で、より安定した挿入を実現させるとともにスリップのリスクも減少させます。

■ K4 | K7

5S
5mm
ストレート
約 74mm
ライトブラウン
大白歯

S5S
5mm
ストレート/ショート
約 64mm
ライトブラウン
大白歯

DE3
3/1.5mm
デュアルエッジ
約 74mm
グレー
残根

DE5
5/3mm
デュアルエッジ
約 74mm
ライトブラウン
残根



15,000 円 / 本
(税込 16,500 円)



17,000 円 / 本
(税込 18,700 円)

— シャープニング不要 —

2S チタン
2mm
ストレート
約 74mm
グリーン
残根 / 根尖

3S チタン
3mm
ストレート
約 74mm
グレー
全部位 (頬側/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)

3A チタン
3mm
アングル
約 74mm
パープル
舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心

DE3 チタン
3/1.5mm
ストレート
約 74mm
グレー
残根



19,000 円 / 本
(税込 20,900 円)



19,000 円 / 本
(税込 20,900 円)



21,000 円 / 本
(税込 23,100 円)



21,000 円 / 本
(税込 23,100 円)

Luxator® Forte


ラクスエーター・フォルテ

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた
高品質なスウェーデン鋼使用

■ 特徴

- ・ラクスエーター・プラスと同じ滑りにくい樹脂製ハンドルを採用
- ・通常のエレベーターとして使用可能
- ・ラクスエーター・プラスの補完品として

【ラクスエーター・フォルテの使用法】

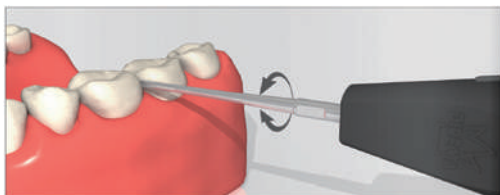

通常のエレベーターとしてご使用して下さい



ラクスエーター・プラスとは製品が異なります。

* オートクレープ対応 (135℃)

変色することがございますが品質には問題ありません

ラクスエーター・フォルテ単品 1 本にフィクスス 1 が 1 個付きます

商品名

ラクスエーター・フォルテ

標準価格 各 16,000 円 / 本 (税込 17,600 円)



F25

シャンク部：約 74mm
グリーン

F32

シャンク部：約 74mm
グレー

F32C

シャンク部：約 74mm
ブルー

F40

シャンク部：約 74mm
ライトブラウン

販売名：ラクスエーター・フォルテ 医療機器届出番号 13B1X00133000024

Luxator® Root Picker

ラクスエーター・ルートピッカー

抜歯中に使える新感覚のインスツルメント

曲

直



* オートクレープ対応

■ 特徴

小さくてつかみにくい歯根の一部は通常のツイザーやプライヤーで把持するのは困難だが、先端に特徴のあるラクスエーター・ルートピッカーはより簡便な把持及び除去が可能。

手になじんで滑りにくいホール加工をハンドルに採用。



商品名

ラクスエーター・ルートピッカー

直 (単品) 標準価格 12,000 円 / 本 (税込 13,200 円)

曲 (単品) 標準価格 12,000 円 / 本 (税込 13,200 円)

2 本セット (直、曲) 標準価格 21,000 円 (税込 23,100 円)


販売名：ラクスエーター・ルートピッカー 医療機器届出番号 13B1X00133000033

残根の抜歯の際、通常では歯や根周辺に血液や唾液などが介在してしまい、一般のツイザーでの把持は困難でストレスを感じていました。

このラクスエーター・ルートピッカーは4点で把持することができるので、滑りにくく安定した残根の把持ができます。また、歯周靭帯に強固に付着している歯根の把持や簡単な除去が可能ですので、抜歯中もストレスなく残根の除去ができ、とても重宝しています。



残存歯抜歯前

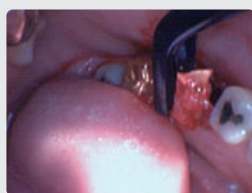

残存歯をラクスエーター・ルートピッカーで把持

歯医者 森 俊道 (埼玉県越谷市)

Contact Finder

スポット イット

ハンドル付きフロス型 コンタクトマーカー

■ 特徴

- ・ クラウンやブリッジ等、補綴物のコンタクトポイントを容易に識別
- ・ たて型（ストレート）とよこ型（アングル）の2タイプ
- ・ 咬合紙不要の高い操作性
- ・ 短時間で正確にコンタクトポイントの調整が可能

商品名

スポット イット

標準価格 各 4,860 円（税込 5,346 円）/18 個入

たて型 18 個入

よこ型 18 個入

アソート 18 個入（たて型 9 個 よこ型 9 個）

販売名：スポット イット 医療機器届出番号 13B1X00133000057



スポット イットよこ型で臼歯部でも簡単にコンタクト面をマーキング
写真提供：ササマ歯科クリニック（東京都渋谷区）院長 笹間 康弘

SpotIt®



*糸の太さは 400 デニール（約 0.1mm）



滑沢に研磨されたセラミックでも
はっきりとマーキング

STIK-N-PLACE®

スティックンプレイス

ディスポーザブルの保持器具として

■ 特徴

小さくて壊れやすいもの（インレー、オンレー、クラウン、ラミネートベニア、バンド、ブラケット、クラスプ、ポストなど）を確実に保持できます。

商品名

スティックンプレイス

標準価格 3,500 円（税込 3,850 円）/50 本

1 プレート 10 本入り×5 プレート

販売名：スティックンプレイス 医療機器届出番号 13B1X00133000019



【セラミックインレーでの使用例】



模型上のハイブリッドセラミックインレー（B&R 板岸由紀子製作）にスティックンプレイスを押しつけ保持させる



模型から外し口腔内試適



適合を確認してエッチング処理



洗浄後乾燥させシランカップリング処理及びボンディング処理



セメント塗布



余剰セメントの除去



光照射



スティックンプレイスの取外し



セット後

写真提供：ナカエ歯科クリニック（神奈川県葉山町）院長 前畑 香

FenderWedge®


フェンダーウェッジ・プロ

手早く操作できるウェッジ

隣接歯保護用ウェッジ

■ 特徴

- ・ クラウン、補綴物、インレーなどのプレパレーション時に隣接歯、周囲の歯肉を保護
- ・ 歯間を広げるのでフェンダーメイトがより入れやすい
- ・ 差し込みやすいマトリックスで歯間を広げ、コンタクトポイントを形成
- ・ 一度差し込むと安定して取れにくい

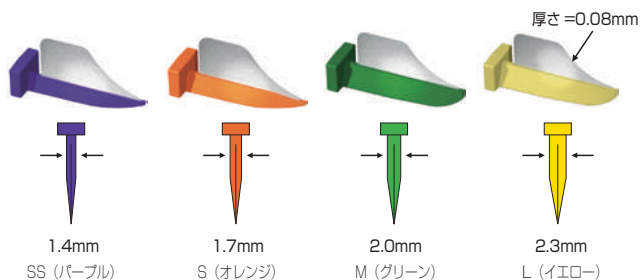

ウェッジを差し込む



隣接歯を保護



使用後の状態例
プレパレーション時に隣接歯を傷つけるのを防ぎます

商品名

フェンダーウェッジ・プロ

アソート 標準価格 17,000 円 (税込 18,700 円) (SS、S、M、L 各 36 個) / 計 144 個

単品 標準価格 各 5,000 円 (税込 5,500 円) (SS、S、M、L) / 36 個

単品バリューパック 標準価格 各 11,000 円 (税込 12,100 円) (SS、S、M、L) / 100 個

販売名: フェンダーウェッジ・プロ 医療機器届出番号 13B1X00133000029

フェンダーウェッジ・プロ&フェンダーメイト イントロキット

標準価格 9,000 円 (税込 9,900 円) (フェンダーウェッジ・プロ / SS3 個、S3 個、M1 個、L1 個) 計 8 個入

(フェンダーメイト / レフト N8 個、レフト R2 個、ライト N8 個、ライト R2 個) 計 20 個入

販売名: フェンダーウェッジ・プロ & フェンダーメイト イントロキット 医療機器届出番号 13B1X00133000036

FenderWedge® Prep



フェンダーウェッジ・プロ プレップ

大きなプレートで前歯の隣接歯を安全に保護

前歯用ウェッジ

■ 特徴


- ・ プレパレーション時に隣接歯を傷つけない
- ・ 頬側からでも舌側からでも挿入が可能
- ・ 形成が大きな臼歯部にも対応

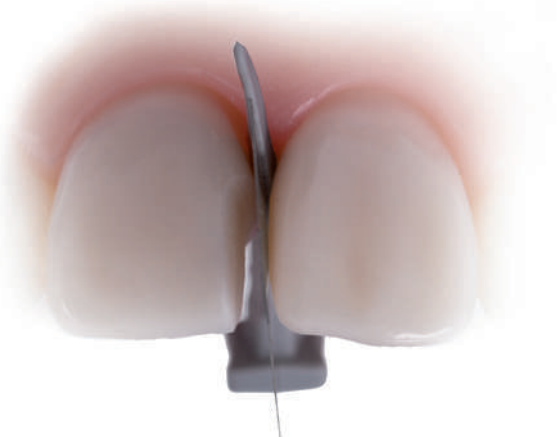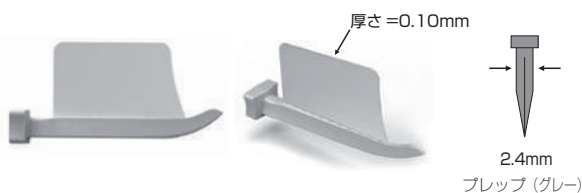

頬側 / 舌側から
差し込む



隣接歯を保護しながら
プレパレーションが可能

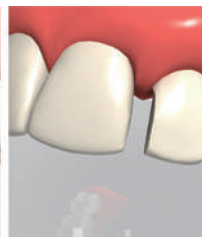

商品名

フェンダーウェッジ・プロ

プレップ 標準価格 9,000 円 (税込 9,900 円) / 36 個

販売名: フェンダーウェッジ・プロ 医療機器届出番号 13B1X00133000029

FenderMate®





フェンダーメイト

手軽にコンタクトポイントを形成できるマトリックス

CR 修復用マトリックス

■ 特徴

- ・ ウェッジとマトリックスが一体化しているため、短時間で容易にセッティング
- ・ バーニッシュにより自然なコンタクトポイントを形成
- ・ 歯頸部に余剰なく充填が可能
- ・ Narrow (N せまめ)、Regular (R ぶつう) の2種類展開

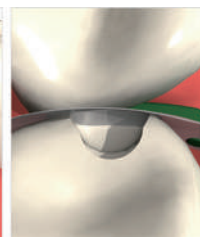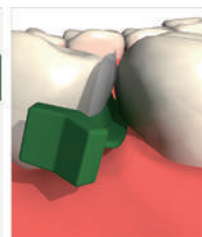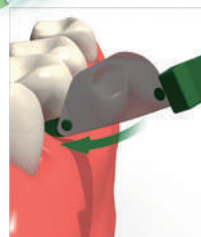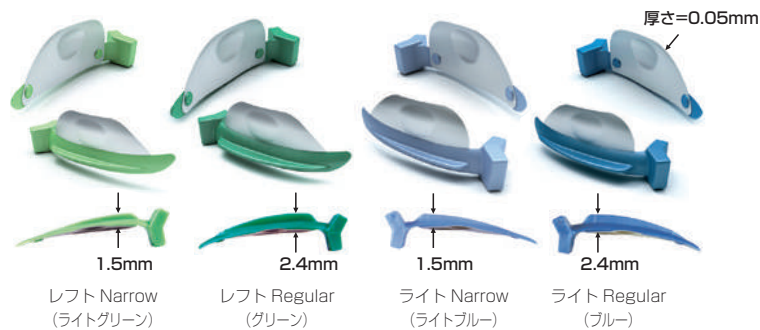

商品名
フェンダーメイト

アソート 標準価格 26,000 円 (税込 28,600 円) (レフト N、レフト R、ライト N、ライト R 各 18 個) / 計 72 個
 単品 標準価格 各 8,000 円 (税込 8,800 円) (レフト N、レフト R、ライト N、ライト R) / 18 個
 単品バリューパック 各 1 箱 標準価格 各 33,000 円 (税込 36,300 円) (レフト N、レフト R、ライト N、ライト R) / 100 個

販売名: フェンダーメイト 医療機器届出番号 13B1X00133000028

FenderMate® Prime


フェンダーメイト プライム

小児治療時に簡単で安全な隣接歯保護と修復をサポート

形成も可能な小児用マトリックス

■ 特徴


- ・ 乳歯のプレパレーション時に隣接歯を傷つける心配がない
- ・ ボート形にデザインされた先端で、歯肉の破損を抑え、出血の危険性を減らす
- ・ 必要に応じて左右に曲げることが可能

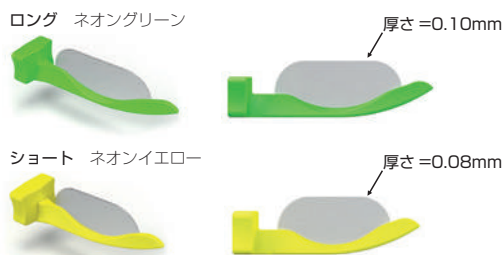

商品名
フェンダーメイト

プライム アソート 標準価格 8,500 円 (税込 9,350 円) (プライムロング、プライムショート 各 18 個) / 計 36 個
 プライム 単品 標準価格 各 4,500 円 (税込 4,950 円) (プライムロング (ネオングリーン) / 18 個
 プライムショート (ネオンイエロー) / 18 個

販売名: フェンダーメイト 医療機器届出番号 13B1X00133000028

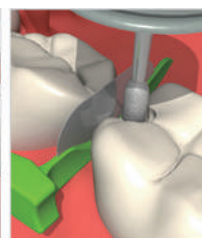

PractiPal®

プラクティパルトレー

より確実な感染予防と、効率の良い診療のために

■ 特徴

- ・ トレーの編み目が大きいのでウォッシャーディスインフェクター使用時に十分な洗浄効果が見込める
- ・ トレーにコンパクトバーホルダー、コンパクトファイルホルダーを固定して洗浄可能
- ・ トレーカバーがあるため、インスツルメントを落とす事無く、廃棄物を処理できる
- ・ 軽くて持ち運びが便利、インスツルメントとトレーの金属音が出ない
- ・ トレーカバーを色分けする事により、用途別に識別可能




保管・管理



トレーカバーを色分けする事により、用途別に識別可能

準備・片付け

トレーカバーがあるため、インスツルメントを落とす事無く、廃棄物を処理できる

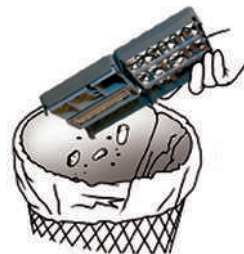


洗浄・消毒

トレーの編み目が大きいのでウォッシャーディスインフェクター使用時に十分な洗浄効果が見込める




滅菌

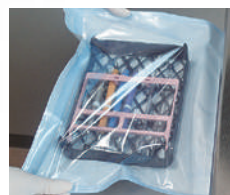

簡単操作



プラクティパルトレーはクリップで留めることによってトレーを連結して使用可能

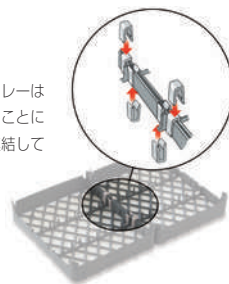

プラクティパルトレーの臨床例

分別・廃棄

先ずチェアサイドで使用した器材および医療廃棄物を、一つのプラクティパルトレー（以下トレーとする）内に収納したまま器材処理スペースに搬送し、分別・廃棄を行う。この際に器材類をカバーでトレー内に固定することができるので、トレーを医療廃棄物容器の上で裏返しにすることで廃棄物に触れることなく落下させ処理することが可能となる。また、根管治療・歯周治療・抜歯など、処置内容ごとに器材をトレーにセットすることで、器材の紛失を防止し準備ミスを防ぐことができる。

洗浄・消毒

作業者が行う「用手洗浄」の場合には、器材がトレー内に固定されているのでそのまま超音波洗浄器と洗剤を用いて洗浄する。ウォッシャーディスインフェクター（自動洗浄消毒器）による「器

械洗浄」においては、分別・廃棄後、予備洗浄することなくそのままウォッシャーディスインフェクター内に入れて洗浄・乾燥を行う。ここで重要なことは血液・唾液等で汚染された器材をさすがないということ、これにより流し回りの汚染を防ぐことができる。

滅菌

洗浄後、乾燥・包装して滅菌を行う。トレー内に固定されていることで、探針、プローブ、フローチ、キュレットなど鋭利でデリケートな器材も滅菌バッグの中で動くことがないため損傷することなく、滅菌バッグにも穿孔が起きる危険性が低くなる。

有限会社ハグクリエーション代表
口腔科学修士
歯科衛生士 柏井 伸子



プラクティパルトレー

W181 × L140 × H36mm
9本のインストゥルメントが収納可能



- プラクティパルトレーセット ピンク
- プラクティパルトレーセット ブルー
- プラクティパルトレーセット グリーン
- プラクティパルトレーセット レッド
- プラクティパルトレーセット グレー

標準価格 10,000 円 (税込 11,000 円)
プラクティパルトレー 1 個入
トレーカバー 1 個入 / 連結クリップ 2 個入

- プラクティパル・コンパクトバーセット ピンク
- プラクティパル・コンパクトバーセット ブルー
- プラクティパル・コンパクトバーセット グリーン
- プラクティパル・コンパクトバーセット レッド
- プラクティパル・コンパクトバーセット グレー

標準価格 12,000 円 (税込 13,200 円)
プラクティパルトレー 1 個入 / コンパクトバースタンド 1 個入
トレーカバー 1 個入 / 連結クリップ 2 個入

- プラクティパル・コンパクトファイルセット ピンク
- プラクティパル・コンパクトファイルセット ブルー
- プラクティパル・コンパクトファイルセット グリーン
- プラクティパル・コンパクトファイルセット レッド
- プラクティパル・コンパクトファイルセット グレー

標準価格 12,000 円 (税込 13,200 円)
プラクティパルトレー 1 個入 / コンパクトファイルホルダー 1 個入
トレーカバー 1 個入 / 連結クリップ 2 個入

- プラクティパルトレー ミニセット イエロー
- プラクティパルトレー ミニセット ピンク
- プラクティパルトレー ミニセット ブルー
- プラクティパルトレー ミニセット グリーン
- プラクティパルトレー ミニセット レッド
- プラクティパルトレー ミニセット グレー

標準価格 8,500 円 (税込 9,350 円)
プラクティパルトレー ミニ 1 個入
トレーカバー 1 個入

オプション



- トレーカバー ピンク
- トレーカバー ブルー
- トレーカバー グリーン
- トレーカバー レッド
- トレーカバー グレー

標準価格 5,000 円
(税込 5,500 円)
トレーカバー 1 個入




- コンパクトバースタンド ピンク
- コンパクトバースタンド ブルー
- コンパクトバースタンド グリーン
- コンパクトバースタンド レッド
- コンパクトバースタンド グレー

標準価格 4,000 円
(税込 4,400 円)
コンパクトバースタンド 1 個入
15 ケのバーが収納可能
20mm までのバー 8 ケ
25mm までのバー 5 ケ
30mm までのバー 2 ケ



- コンパクトファイルホルダー ピンク
- コンパクトファイルホルダー ブルー
- コンパクトファイルホルダー グリーン
- コンパクトファイルホルダー レッド
- コンパクトファイルホルダー グレー

標準価格 4,000 円
(税込 4,400 円)
コンパクトファイルホルダー 1 個入
ファイル 13 ケ収納可能

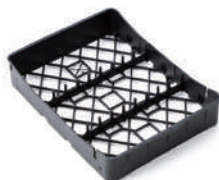

- プラクティパルトレー (ダークグレー)
- 標準価格 6,800 円 (税込 7,480 円)
プラクティパルトレー 1 個入
連結クリップ 2 個入



- プラクティパルトレー ミニカバー イエロー
 - プラクティパルトレー ミニカバー ピンク
 - プラクティパルトレー ミニカバー ブルー
 - プラクティパルトレー ミニカバー グリーン
 - プラクティパルトレー ミニカバー レッド
 - プラクティパルトレー ミニカバー グレー
- 標準価格 4,000 円 (税込 4,400 円)



- プラクティパルトレー ミニ
- 標準価格 5,500 円 (税込 6,050 円)



本誌に掲載されている記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。
商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp
製造販売元：株式会社吉田製作所