


切れ味が長期間持続！ シャープニング回数の削減！ シャープニングも可能！

GRACY DURABILITY

グレイシー デュラビリティー

耐久性を追求したグレイシースクーラー

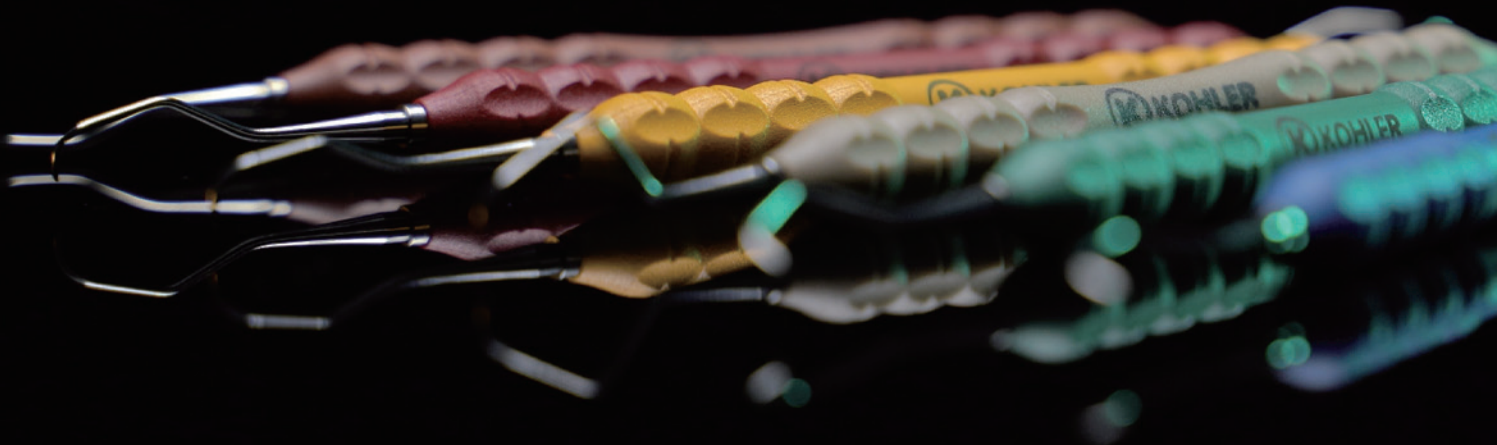

ブレード — シャープさが持続、長くお使いいただけます

- アクリル*¹に 9,600 回ストローク、ブラスメタル*²に 4,800 回ストロークを行っても切れ味が持続するので、シャープニング回数を抑えられます。*³
- 高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。

ハンドル — 人間工学に基づいた TORINOVO[®] ハンドルを使用しています

- 人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、滑りにくく、緻密で繊細な作業を正確に行うのに適しています。
- 特殊な表面加工により、溝に付着した汚れは簡単に洗浄・滅菌することが可能です。*³
- 長年医療現場で使用されてきた PEEK (ポリエーテルエーテルケトン樹脂) 製で、耐久性・耐熱性に優れています。軽量のため、作業による疲労が軽減します。

*1 : テストスティック *2 : テスト用真鍮金属 硬度 90HB Brinell *3 : KOHLER 社試験による

ALL YOU NEED IS DURABILITY!



グレイシーデュラビリティーシリーズ

切れ味が長期間持続! シャープニング回数の削減! シャープニングも可能!



(単位 mm. 許容誤差 ±10%)

グレイシーキュレット

グレイシーデュラビリティー レギュラー 5/6

[前歯部]

A167 B100 C15 D4.5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 7/8

[臼歯部]

A164 B100 C11.5 D5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 11/12

[臼歯部 (近心)]

A167 B100 C9.5 D5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 13/14

[臼歯部 (遠心)]

A167 B100 C8.5 D4.5



グレイシーデュラビリティー レギュラー 15/16

[臼歯部 (近心, #11-12よりシャンクが鋭角)]

A165 B100 C9.5 D5



グレイシーキュレット ミニ

グレイシーデュラビリティー ミニ 5/6

[前歯部]

A172 B100 C17 D4



グレイシーデュラビリティー ミニ 7/8

[臼歯部]

A168 B100 C12 D4



グレイシーデュラビリティー ミニ 11/12

[臼歯部 (近心)]

A170 B100 C12 D3.5



グレイシーデュラビリティー ミニ 13/14

[臼歯部 (遠心)]

A169 B100 C12 D4.5



グレイシーデュラビリティー ミニ 15/16

[臼歯部 (近心, #11-12よりシャンクが鋭角)]

A170 B100 C12 D3.5



商品名 **グレイシーデュラビリティー** レギュラー・ミニ共通 1本 標準価格 **7,500円** (税込 8,250円) 医療機器届出番号: 13B1X00133000076

歯科医師 **坂東 直子**
医療法人社団 祥皓会
ばんどう歯科
(兵庫県三田市)

グレイシーデュラビリティーはすごく気に入ってずっと使っています。



毎日3回程使用していますが、全く折れず、数ヶ月毎のシャープニングで約3年間使っています。

切れ味が鋭いとは言えませんが、セメント質を温存できる、程よい切れ味が愛用しています。

歯科医師 **金子 龍太**
医療法人 慈恩会
少路ファミリーデンタルクリニック
(大阪府豊中市)

KOHLER社のグレイシーデュラビリティーを使用し約3年経ちますが、最初に使用し始めたキュレットをまだ現役で使用しています。(2021年現在)



自身でデブライドメントを行うのは重度歯周炎患者処置時のみなので、実際の使用頻度は週に数回程度ですが、3年間使用できるキュレットの耐久性は素晴らしい一言につきます。

切れ味に関しては、自分としては必要十分な性能と感じております。ただ自分はよく切れるキュレットを好むので、数回の使用後軽くシャープニングしております。シャープニング後は切れ味と耐久性が元通りになるため、非常に使い勝手の良いキュレットとして愛用しております。

歯科衛生士 **加瀬 久美子**
株式会社 Up to You
DH 勉強会 LOL

グレイシーデュラビリティーは格段に軽いので、全く力を入れずにふわっと把持することができます。細かな感覚も手に伝わるため、デリケートなディープスケーリングを可能にします。



キーポイントはミニタイプの第一シャンク! 歯周ポケットの深さに関わらず、第一シャンクが長いことで屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィットし、スムーズにディープスケーリングをすることができます。



屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィット (11/12) 屈曲部が歯冠にぶつかることなくフィット (13/14) スムーズなディープスケーリングができる

歯科医師 **福井 秀和**
ヨーロッパ歯周病学会 (EFP)
歯周病専門医

グレイシーデュラビリティーは、丈夫でシャープニングをしなくても切れ味が長く続くのが魅力です。



そのため、定期的開催している、北欧式ペリオを学ぶスタディーグループ、「スキャンジナビアペリオ」のコースの中でも紹介しています。

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

お問い合わせは



販売元: **クロスフィールド株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <https://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所