

Dental World

cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌
デンタルワールド
www.crossf.com

38
2022 春号

はじめよう！令和時代の感染対策

Apple Dental Center（東京都 西東京市）歯科衛生士 花岡 佑み子・・・P.1

術者保護エプロン／立体ポケット付患者エプロン 広告・・・P.1

エルゴフィンガー／ハイゴフォーミック 広告・・・P.2

抗がん剤治療中に会った「ティーボドント ジェル」

SDA エキスパート DH（山梨県 笛吹市）歯科衛生士 渡邊 梨恵・・・P.3

ティーボドント ペースト／ティーボドント ジェル 広告・・・P.3

ジェントルケア／スペシャルケア 広告・・・P.4

ハブラシをショッピング ～はみがきは楽しんで～

はみがきショップ halsa（北海道 旭川市）代表 笹谷 結季・・・P.5

コンパクトタフトの使用場面 ～訪問歯科診療の現場において～

竹内歯科医療院（東京都 新宿区）歯科衛生士 青柳 三千代・・・P.6

コンパクトタフト 広告・・・P.6

TePe のお陰で広がった新たな選択肢

ほりべ歯科クリニック（京都府 京都市）歯科衛生士 足達 美波・・・P.7

私たちの医院の理念と共に

やまもとファミリー歯科医院（京都府 八幡市）歯科医師 多賀 一真・・・P.8

テペ イラストシリーズ 広告・・・P.8

TePe 広告・・・P.9

歯にも優しく、地球にも優しい TePe 製品

北欧歯科（福岡県 福岡市）／北欧歯科 こくら（福岡県 北九州市）歯科医師 加藤 大明・・・P.10

TePe GOOD シリーズ 広告・・・P.10

患者さんの「気持ち良い」歯科医院での「気持ち良い」

フリーランス歯科衛生士 沢口 由美子・・・P.11

プロフィーペースト Pro（HAp） 広告・・・P.11

優れた製品で違いが分かるプロフェッショナルケアを

halsa（北海道 旭川市）歯科衛生士 笹谷 結季・・・P.12

プロフィーペースト Pro 広告・・・P.12

安全性確保のための飛沫対策ケアシールドの有効性

有限会社ハグクリエーション代表 口腔科学修士 歯科衛生士 柏井 伸子・・・P.13

ケアシールド 広告・・・P.13

頼りになるスケーラー グレーシーデュラビリティーを選択するということ

医療法人真摯会 まつもと歯科（大阪府 吹田市）歯科衛生士 坂上 明美・・・P.14

グレーシーデュラビリティー 広告・・・P.14

ワムキーでストレスフリーのメタルコア除去を！

医療法人真穂会 ますだ歯科医院（愛媛県 宇和島市）歯科医師 佐伯 真未子・・・P.15

ワムキークラウンリムーバー 広告・・・P.15

マウスガードの汚れを機械的に清掃する器具の考察

大阪歯科大学附属病院 障がい者歯科（大阪府 大阪市）講師 田中 佑人・・・P.16

短時間で簡単にマウスピースなどの機械的清掃が行えるデンタルクリーナー

キャビネ・ラビヌー（千葉県 浦安市）日本小児歯科学会認定歯科衛生士 中野 真弥・・・P.17

デンタルクリーナー 広告・・・P.17

ユニバーサルマスキングにおける推奨マスク

大阪歯科大学附属病院 障がい者歯科（大阪府 大阪市）講師 田中 佑人・・・P.18

アベビータプロテクトマスク 2.0 広告・・・P.18

呼吸が苦しくなく、フィルター性能も優れているアベビータプロテクトマスク 2.0

小野歯科医院（岡山県 倉敷市）緒形（宮地）孝子・・・P.19

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付 広告・・・P.19

ラクスエーター・プラス／ラクスエーター・プラス（P シリーズ）／フェンダーメイト／ピュアリフレクト ミラー／ピュアリフレクト マイクロミラー 広告・・・P.20

プレデタージルコニア／プレデターターボ／プリマミラー／KAI コーティング替刃メス 広告・・・P.21

2WAY ツイザー／ORO サージカルガウン（シート付）／ORO アイソレーションガウン／ORO ヘッド&ヘッドレストカバー／

Bio エプロン 広告・・・P.22

プロフィーペースト Pro（HAp） 広告・・・P.23

はじめよう！令和時代の感染対策

歯科医師の診療時はもちろんのこと、歯科衛生士によるメンテナンス時にもクロスフィールド製品を導入しています。

Apple Dental Center
(東京都 西東京市)
歯科衛生士 花岡 佑み子



当院では以前から院内の汚染物質飛沫リスクにしっかり対応をしてきました。新型コロナウイルス感染症の流行後、より一層意識をするようになりました。

歯科医師の診療時はもちろんのこと、歯科衛生士によるメンテナンス時にも以下の製品を導入しています。

- ・術者保護エプロン
- ・ハイゴフォーミック
- ・エルゴフィンガー
- ・ケアシールド
- ・立体ポケット付患者エプロン
- ・O R O ヘッド&ヘッドレストカバー

診療内容にもよりますが、どれも必須アイテムです。

術者保護エプロン

以前はお洋服が汚れないように患者さんにエプロンを着用してもらっていたが、新型コロナウイルス蔓延にともない、考え方が変わりました。術者も術者保護エプロンを着用することにより、患者さんの頭部がスクラブに接することが気にならずに処置できるようになりました。

また、当院ではスクラブの下にアンダーウェアの着用を禁止しています。

理由は1日に何人もの患者さんを診る私たちのスクラブの袖が汚染されるからです。



術者保護エプロンを着用
患者さんの頭部が接触している

ハイゴフォーミック

ハイゴフォーミックを初めて見る患者さんには驚かれますが、とても柔らかく、ディスポーザブルであることを伝え、安心されます。見た目よりも吸引力があり、形も自在に変形することができるので、安定感も抜群です。

エルゴフィンガー

口腔内にお水が溜まるのが苦手な高齢の患者さんに重宝しています。吸引力が優しいので粘膜などを吸うことなく、お水だけをサクションすることができます。

また、自分の姿を撮影してもらうとわかりますが、以前より良い姿勢でいることに気がつきます。



エルゴフィンガーを使用
バキュームのコントロールがしやすい

ケアシールド

前歯部のスクリーニングなど、患者さんの顔に飛散しやすい場合に使用しています。吸い込み口が大きく飛散を抑えることができるため、特にエアフロー使用時は重宝しています。使用の際はアシスタントにケアシールドを持ってもらうことにより、安心してエアフローによる施術に専念することができます。コネクターはオートクレープ可能で、シールドは100枚入りで単回使用であることも素晴らしいです。



ケアシールドを使用
クリアなので視界が邪魔されない



使用後、水滴がたくさん付いている
ことがわかる

Products Information



スウェーデンにある FINESS HYGIENE 社は高品質な衛生商品を通して医療・福祉の現場を支えています。
また、環境に配慮した徹底した品質管理を行っています。[ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485 認証]



術者保護エプロン

スウェーデンでは多くの歯科医院が導入
患者にも使用可能な感染予防強化アイテム

* 2点シール留タイプは肩シールのみ

商品名

術者保護エプロン 2点シール留タイプ ライトブルー

100枚入 *ディスポーザブル

術者保護エプロン 3点シール留タイプ ブルー

100枚入 *ディスポーザブル



立体ポケット付患者エプロン

患者さんの
感染予防に役立つ
立体ポケット付エプロン
* 使用直前に裏返すことで
立体感ができます

商品名

立体ポケット付患者エプロン

100枚入 *ディスポーザブル





入口のディスプレイスペース 季節にあわせてアレンジをしています

立体ポケット付患者エプロン

ORO ヘッド&ヘッドレストカバー

立体ポケット付患者エプロンはご高齢の方の処理の際やスケーリングの際など、時と場合に応じて使用します。

吸水性に優れた再生紙と裏面のポリエチレンが水分をしっかりキャッチ。長さも70cmあり、患者さんのお洋服をしっかりガードします。立体ポケットに溜まった水分もその部分からくると包めば汚染された面を触らずに廃棄することができます。

ORO ヘッド&ヘッドレストカバーはヘッドレストカバーとしても使用でき、頭に被ることでスタッフを飛沫から守る必須アイテムにもなります。

以前は院長しか被っていませんでした。今考えるととても恐ろしいことです。



患者さん・術者の両者が安心して診療できる環境が整えられています

今後も患者さんに安心・安全を感じていただくために、クロスフィールド製品を活用していきます。これは患者さんのためでもあり、飛沫リスクの高い環境で処置する私たちのためでもあります。

当院では入口のディスプレイスペースに毎月 TePe 製品を飾っています。カラフルな北欧カラーのおかげで、入口が明るくなり、患者さんにも好評です。今後も多くの方にデンタルケア製品に興味を持っていただけるように続けていきたいと思っています。

アップルデンタルセンターは Slow Dentistry Global Network に参加しています。Slow Dentistry とはスイスに本部があり、日本では5医院、世界では191の歯科医院が参加しています。健全な歯科医療を世界中に普及させるために、以下の4点を目標に掲げています。

1. 麻酔

治療前に麻酔がしっかり効くまで十分に時間をとるべきである。

2. ラバーダム

歯または数歯を隔離するために使う。根幹及び充填治療のための相互汚染を防ぐ重要な役割を果たす。

3. 部屋の消毒

治療と治療の間に診療室、椅子、全ての器具を洗浄・消毒するべきである。

4. インフォームドコンセント

治療を始める前に治療ごとのリスクと利益について、患者は根拠のある情報を適切に与えられるべきである。

Slow Dentistry は患者志向のネットワークです。

詳しくはこちらの QR コードよりホームページをご覧ください。



Products Information



環境にやさしい サトウキビ由来のバイオベース ポリエチレン製

スウェーデンの歯科医院・大学で
広く使用されているハイゴフォーミック
排唾ラインに接続してしっかり吸引します



2022 年 春 発売予定
商品名 ハイゴフォーミック Bio 医療機器届出番号 13B1X00133000065
100 個入 (アダプター 5 個付き) 標準価格 2,200 円 (税込 2,420 円) @ 22 円 / 個
詳しくは動画をご覧ください



ergo medi エルゴフィンガー

術者と患者さん双方に優しい
フィンランド生まれのバキュームアダプター

エルゴフィンガーのメリット

- エルゴノミックなデザインで、身体にやさしい
- バキュームのコントロールが簡単
- 操作性の向上で快適な診療
- アシストの必要が少なくなり経費削減
- 術者の不要な動作が減ることによる処置の効率化と時間短縮
- ディスプレイで患者さんへの感染予防を徹底

*アダプターチューブ 1.48mm *直径 11mm のバキュームに対応 *サイズ選びの目安 女性 S-M サイズ、大きな手の男性 L-XL サイズ *素材 PVC

商品名 エルゴフィンガー 医療機器届出番号 13B1X00133000067
S-M サイズ 標準価格 9,900 円 (税込 10,890 円) / 50 個入 @198 / 個
L-XL サイズ 標準価格 9,900 円 (税込 10,890 円) / 50 個入 @198 / 個

商品名 エルゴフィンガー エアフロー用ノズル
標準価格 2,400 円 (税込 2,640 円) / 50 個入 @48 / 個
*S-M / L-XL サイズ共通 (ノズルの挿入径は同じ大きさです)



S-M サイズ



L-XL サイズ

*素材 PVC

動画はこちらで
ご確認ください



エアフロー用ノズルの
使用方法動画は
こちらをご覧ください



抗がん剤治療中に出会った「ティーボドント ジェル」

自然派オーラルケア商品である「ティーボドント」は、多くの患者さんに喜ばれる商品だと思います。

SDA エキスパート DH
(山梨県 笛吹市)
歯科衛生士 **渡邊 梨恵**



私は現在、抗がん剤治療を受けている歯科衛生士です。

そんな私がティーボドント ジェルと出会い、現在も抗がん剤治療を受けながら使用しているティーボドント ジェルをご紹介します。いただきたいと思います。

私は、2021年3月下旬、左鎖骨上部の2センチ大のしこりに気付き、原発がんからの転移であることを宣告されました。検査の結果、動脈リンパ節への転移、骨盤リンパ等、全身にがんが転移しており、外科的手術の治療は対象外で抗がん剤による治療を行っています。

抗がん剤が始まる前には、入院していた病院の口腔外科にて口腔内チェックと口腔ケアを行いました。また、これから抗がん剤治療をしていく上での、ブラッシングに関する注意点、口腔乾燥ケア商品の紹介もしていただきました。

私自身、現役で仕事をしていた頃に患者さんに対して同じような説明をしていましたが、いざ治療が始まる状況になってみると、どうしたら良いのか自分を疑うほど分からなくなってしまいました。

そんな中、私の現状を知り歯科衛生士の友人が入院先まで届けてくれたのがこの「ティーボドント ジェル」でした。同時に歯肉や粘膜に優しい歯ブラシ「TePe ジェントルケア」と「TePe セレクトコンパクト エクストラ



入院中、病院まで届けてくれた友人の岡安紀子さん


ソフト」も同梱されていました。ティーボドント ジェルにはティーツリーの新鮮な葉だけを採取し、通常原料の重量に対し、たったの1～2パーセントしか取れないと言われている貴重なティーツリーの天然成分を2パーセン



友人がくれたバジャマとティーボドント ジェル

トも配合されているジェルタイプの歯磨剤であることを知りました。以前、私はアロマの勉強をしたことがあり、数あるアロマオイルの中でもティーツリーオイルに殺菌作用が期待されることは認識していました。

初回の抗がん剤治療後から唾液分泌低下による口腔乾燥と、口腔内に何も入っていない状態でも苦味や酸味を異常に感じる味覚障害があり、不快な口腔内状況が続きました。こまめな舌運動により唾液の分泌を促進させますが、そういった状況の中でのブラッシングは非常に敏感でティーボドント ジェルを使うことに対しても多少のためらいがありました。

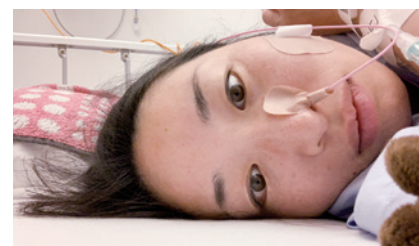

検査後、胆汁を取るために鼻から管が出ています

しかし、ティーボドント ジェルは歯ブラシに出した瞬間から爽やかな香りが漂い、抵抗なく口に近づけることができました。また、ジェルには程よい粘度がありブラシから垂れることなく口の中に入れることができました。ジェルタイプの歯磨剤はいくつも使用したことがありますが、それらにも増して長時間の

Products Information



Naturheilpraktiker（自然療法士）がいるスイスを代表する歯磨剤
創業 70 年の製薬会社 Dr.Wild が誇る
ティーツリー * 配合の自然派オーラルケア

ティーツリーの新鮮な葉の部分だけを蒸留して捕集し、原料の重量に対し、たった 1～2% だけしか取ることができないと言われているティーツリー * を約 2% も含んだ歯磨剤がティーボドントです。

* ティーツリー葉水（香味剤）



ジェル タイプ

ペースト タイプ

商品名
ティーボドント ペースト (75ml)

ティーボドント ジェル (18ml)





入院中、ベッドサイドでのブラッシング

ブラッシングには適した粘度で、ベッドサイドでも快適に磨くことができました。

入院中、体調の良い時はティーボドント ジェルを使用し、口腔粘膜のマッサージも行いました。研磨剤無配合でジェルの粘度もちょうど良いので、指にしっかり停滞してくれて粘膜にも滑りやすくセルフマッサージにも適しています。使用後はサラッとしていて、ほのかな甘みとすっきりとした香りで癒され、とても快適でした。口腔乾燥による口臭や歯周病などの感染症の心配も払拭できました。

現在は隔週の抗がん剤治療をしていますが、投与直後は倦怠感が強く、ブラッシングできないこともあります。しかし、現時点で**歯肉炎の症状もなく快適な口腔内状態を保たれているのはティーボドント ジェルを使用してきたことが効果的だったように思います。**

同時に使用した TePe ジェントルケアは、大きめのヘッドで柔らかいブラシではありませんが、程よいコシがあり敏感な口腔内にも優しく使用できます。この**程よいコシのあるブラシにより、歯肉マッサージをしながらプラークをしっかりと除去できるという、とても優秀な歯ブラシであることを再確認できました。**大きなヘッドだからこそ、1 ストロークで磨ける範囲も大きく、短時間でブラッシングを終えたいような時にも大活躍してくれました。体調の良い時は「TePe セレクトコンパクト エクストラソフト」にて細かくブラッシングしています。



TePe ジェントルケア (上) と
TePe セレクトコンパクト エクストラソフト (下)
の比較写真

自分が実際にがん患者になってみて思うことは、続けることの難しさを痛感しています。当たり前だったブラッシングすら嫌だと思ふようになったり、無気力になったりすることもあります。そんな中で、「ティーボドント」と「TePe ジェントルケア」「TePe セレクトコンパクト エクストラソフト」を使用できたことはとても光栄なことだったと思います。

抗がん剤治療中の歯磨剤の使い心地というのはとても重要で、その中でも香りや味は第一に重要なことだと身をもって体験しました。

近頃は、「オーガニック」「ナチュラル」などの意識が非常に高くなっているように思います。ティーツリーオイルは、**ヒノキやヒバの香りに似ていて、とても清々しい香り**で癒し効果があり、また抗ウィルス作用が期待されるので、インフルエンザ対策として加湿器等でも使用されているようです。

自然派オーラルケア商品である「ティーボドント」は、多くの患者さんに喜ばれる商品だと思います。ぜひ臨床の現場でお勧めしていただきたいです。

Products Information



ジェントルケア Gentle Care



ハンドルの色は現在ホワイトのみとなります

- ジェントルケア(ホワイト)
- ジェントルケア(ホワイト)プリスターパック

スペシャルケア Special Care



スペシャルケア (レッド)



スペシャルケアコンパクト (ブルー)

- スペシャルケア(レッド)
- スペシャルケア(レッド) プリスターパック
- スペシャルケアコンパクト(ブルー)



スウェーデン歯科衛生士会は
TePe 製品を推奨しています



スペシャルケアブラシより若干コシはありますが、柔らかいブラシです。

術後、スペシャルケアブラシで炎症が和らいだ後の使用に最適です。また、知覚過敏やドライマウス、ホワイティング後などの敏感な口腔内にも適しています。

約 5,400 本のフィラメントを使用しています。

とても柔らかいブラシで、口腔外科手術後や周術期、シェーグレン症候群など歯肉が非常に敏感な段階、また粘膜ケアなどに適しています。スペシャルケアは約 12,000 本のフィラメント、スペシャルケアコンパクトは約 7,000 本のフィラメントを使用しています。



プリスターパック

ハブラシをショッピング ～はみがきは楽しんで～

自分にはどんなケア用品が必要なのかを知ってもらい、
何より毎日の歯みがきを楽しんで行なって欲しい
というのが私の願いです。

はみがきショップ halsa
(北海道 旭川市)
代表 笹谷 結季



「毎日使うものだから良いものを使ってケアして欲しい」

そんな気持ちから、「はみがきショップ halsa (ハルサ)」を立ち上げた当初から、TePe 製品を幅広く取り扱っています。

一般的に「ハブラシは鉛筆持ちで、一本ずつ磨くように磨きましょう」といったスクラッピング法等の指導が広く知られているせいか、「コンパクトヘッドを使っています」というお客様が今でも多いです。ただ、このブラッシング法は歯の形態を理解していないと実際難しいのではないかと以前から疑問に思っていました。

TePe 製品はユニバーサルデザインであり、ハブラシはパームグリップで握り、ブラッシングテクニックが無くても磨き残しが少なく磨けるハブラシです。TePe のハブラシの特徴としての密毛で弾力のあるフィラメントがしっかりと歯面を捉え、歯頸部まで気持ちよく磨けます。

特に「スプリーム」は歯肉に対してチクチクしない触れ心地の良さ、握りやすく滑りにくいハンドルで当店では人気の商品です。長いテーパー毛が歯間、歯肉溝に到達し、同時に短いラウンド毛が歯面をしっかりと磨いてくれるので、スプリームを使用したお客様の中には「歯ぐきから血が出なくなった」との声もありました。

「いつも小さめヘッドを使っています」というお客様にも出来るだけスタンダードサイズの TePe ハブラシをお勧めし、TePe 独自の感触、使い方を知ってもらうようにしています。結果「大きい方が気持ちよく磨ける」という声が多く聞かれます。

今日では舌クリーニングの必要性を知っている人も多く、「タングクリナー」も年代を問わず人気の商品です。

タングクリナーは3列のクリーニング面が舌を傷つけることなく、しっかりと汚れを落としてくれます。

素材はサトウキビ由来のバイオプラスチックで環境に優しく、ブラスタイプと違い、壊れたりしない限り長く使用することができます。今まで舌クリーニングをしたことが無かったというお客様もタングクリナーを使うようになり、「使用後の口腔内の爽快感から毎日の習慣になった。」という声を多くいただきました。

はみがきショップ halsa は主にセレクトショップ内で販売していますが、TePe 製品はカラフルでスタイリッシュなので人目を引き、「かわいい」と手に取ってくれる若いお客様や、プレゼントとして購入していく方も多いです。

「今度はどの色のハブラシにしよう」「今回はこっちのハブラシにしてみようかな？」お客様が楽しみながら笑顔でハブラシをショッピングをしているところを見るのは歯科衛生士としてとても嬉しいことです。

「ドラッグストアでハブラシを見てもどんなものを選んだら良いかわからない」「良く分からないけど、歯医者さんで勧められたハブラシを使っています」という声を何度も聞きました。

歯みがきは健康のために誰もが毎日行なう行為です。自分にはどんなケア用品が必要なのかを知ってもらい、何より毎日の歯みがきを楽しんで行なってほしいというのが私の願いです。



セレクトショップ「ホワイトコラージュ」内のハブラシ販売は地元ネットニュースでも紹介されました



SNS での halsa 広告
モデルの汚軽田 夢子さん
(撮影 ハヤシ ヒロナオ)

ディスプレイは楽しく華やかに
TePe 製品は幅広く取り扱っております



コンパクトタフトの使用場面

～訪問歯科診療の現場において～

患者様、本人だけでなく家族や看護師等の介助者にも使いやすく
効率の良い歯ブラシ等の歯科用品の選定や提案を行うことも重要と考えます。

竹内歯科医療院
(東京都 新宿区)
歯科衛生士 青柳 三千代



【訪問歯科診療における歯科衛生士の役割】

現在日本では65歳以上の高齢者が総人口の29.1%に達しました(2021年9月15日時点)。このような**社会の高齢化によって在宅医療の必要性が増加**しています。私たちが行っている訪問歯科診療で出会う患者の多くは全身疾患によって通院することが困難となった要介護高齢者です。従って、訪問歯科診療に携わる歯科衛生士は全身状態を踏まえた上で診療に臨むことが求められます。要介護高齢者の中には、高齢による筋力低下に加えて麻痺等によって自分の歯を上手に磨くことができない方がいらっしゃいます。そのような患者に対して、**本人だけでなく家族や看護師等の介助者にも使いやすく、効率の良い歯ブラシ等の歯科用品の選定や提案を行うことも重要**と考えます。様々な歯科用品がある中で、今回はTePe社のコンパクトタフトを使用した実際の症例について紹介します。

【実際の症例 -1-】

患者は60代男性。重度のパーキンソン病により介護度は要介護5。口腔内は残存歯多数であり、誤嚥性肺炎の既往もあるため、口腔内のメンテナンスとして毎週お伺いして口腔ケアを行っています。通常の歯ブラシに加えて、毛先が1束に集まったコンパクトタフトを使用することによって、プラークを除去したい場所へピンポイントに毛先を当てることが可能です。また、コンパクトタフトはネック部が傾斜しているため、写真で示した口腔内のように、ブラシが当てづらい臼歯部に歯がある場合にも、アプローチがしやすい形状になっています。

【実際の症例 -2-】

患者は90代女性。口腔衛生管理と義歯作製を主訴とし訪問歯科診療依頼がありました。口腔内には残根が多数存在しています。しかし重度心臓疾患の既往があり抜歯にリスクが伴うため、抜歯せず義歯を作製し、完成後は月2回程度の口腔ケアを行っています。歯ブラシと歯間ブラシだけでは十分にプラークが除去できないため、介助者である家族にコンパクトタフトの使用方を説明しました。介助者が口腔ケアを行う際、よく聞く悩ましい点は痛みが出るかもしれないという点です。本来、十分なプラーク除去のためには、多少痛みが出てもやむを得ません。しかしながら、口腔ケアの対象が認知症の方の場合や、家族以外が口腔ケアをする場合など、スムーズに口腔ケアを行うためには痛みが出にくい道具の使用も必要と考えます。コンパクトタフトは毛の硬さが非常にソフトなため、痛みを与えることなく、介助者も安心して使用することができます。

【その他のコンパクトタフト使用例について】

今回紹介した症例以外にも、開口量が少ない方や、歯磨きに対する拒否が大きい患者にも、私はコンパクトなワンタフトブラシを使用することがとても多いです。歯ブラシを当てたい場所にピンポイントで当たり、プラークを除去できるため、患者の負担も少なく対応できます。



ヘッドが小さくネック部も細く傾斜しているため、臼歯部にも毛先を当てやすい



残根を含む残存歯が多いため、本人だけでは歯磨きが難しい



家族にコンパクトタフトの当て方を指導

TePe テペ

コンパクトタフト Compact Tuft



ハンドルの色はアソートになります

- コンパクトタフト
- コンパクトタフト プリスターパック



スウェーデン歯科衛生士会は
TePe 製品を推奨しています



コンパクトなドーム状のブラシ。フィラメントが短く非常にソフトなので、柔軟性と安定性に優れています。小さなブラシヘッドと傾斜したネック部によって口腔内へのアクセスがしやすくなっています。萌出歯、最後臼歯連心部や歯間隣接面、歯根面の陥凹部、乳幼児の仕上げ磨きなどに適しています。また、先がとがっていないので、萌出歯の裂溝やインプラントのヒーリングキャップ、また義歯のアタッチメントの周りなどの繊細な部分を優しく磨くことができます。

TePe のお陰で広がった新たな選択肢

私達、歯科衛生士にとって患者様のお口に合ったツールを選ぶことは、とても大事なことです。

ほりべ歯科クリニック
(京都府 京都市)

歯科衛生士 足達 美波



今まで医院の歯ブラシは 10 年来同じメーカーの同じ商品を使い続けてきました。しかし色々な商品が出ている中、**より良い商品はないのか**というスタッフの声を受け、探し始めました。そこへ歯科衛生士の指導に来てくださっている先生から、「**TePe の歯ブラシと歯間ブラシを導入したらどうか**」というアドバイスを受けました。TePe の歯ブラシは時々セミナーで見聞きたり、サンプルでいただいたことがあったのですが、「**カラフルで可愛い！」「ヘッドが大きい！」「持ち手が太いなあ**」という印象でした。

まずは TePe について知るために、クロスフィールドの歯科衛生士さんに院内研修を行っていただきました。歯科衛生士だけでなく、受付助手や Dr にも参加していただき、スタッフ皆で歯ブラシ、歯間ブラシを手にとって知識を深め、TePe についての情報を共有しました。医院皆で、一本の歯ブラシに何千本もの植毛がされていることや、ラウンド毛の毛先一本一本の角を徹底的に落としているということをその時初めて知り、**TePe 歯ブラシのこだわりと職人魂を感じました！**

10 年に渡って使っていた商品を変えていくということは、今まで当院のメンテナンスに通って下さり、その商品を愛用してきた患者様にも、その理由を説明し、加えた意図を伝えなければなりません。それにあたり、院内研修で教えて頂いた内容がとても参考になりました。

新しいものを取り入れたり、物事を仕組みから動かすことは、医院の規模によってはスタッフの混乱を招きます。当院のスタッフは約 30 人ですので、一つ商品を取り入れるにしても、その知識を共有することから始めなければなりません。しかし**メーカーからの研修を受けたことで、歯科衛生士だけではなく受付助手も知識の共有ができ、受付でも商品の説明ができるのはとても良かった**と思います。

台形型ヘッドの歯ブラシは日本ではあまり見ない形です。磨き残しが多いのは最後臼歯と前歯。ヘッドの先が細いので奥まで入りやすく、**かかとは太いため前歯を磨くときには前歯面にしっかりと当たり、磨きやすいです。**

スプリームはテーパー型の毛足が長く、歯間や歯周ポケットに入りやすいため、患者様に感覚を伝えやすいです。「**あ、毛先が入ってるのわかります。**」というお声をたくさんいただきました。**毛足が柔らかいため、痛みも感じにくい**ように思います。

また、毛足が一般のテーパーと比べると長いので、患者様が「こんなに長い入るかな？」と仰る方もいらっしゃいました。実際入れていただくと、**お口の中にすんなり入れることができる**と、とても喜ばれました。

歯間ブラシは**サイズ展開が9種類と豊富なこと、ワイヤーがプラスチックコーティングされているから歯に当たる感覚が優しいこと**がとても評判です。アングルタイプは柄が長く幅広のためしっかり持てますし、頬排除もしやすいです。

私たち歯科衛生士にとって、患者様のお口に合ったツールを選ぶことは、**とても大事なことです**。TePe の歯ブラシや歯間ブラシは新たな選択の幅を広げてくれました。



受付のショーケースもかわいく飾り付けています☆



中待合ではこのようなディスプレイで楽しんでいただいています。



歯間ブラシは一つずつのお部屋に♪



人数は多いですが和気あいあいとした歯科医院です♪

私たちの医院の理念と共に

私たち“やまもとファミリー歯科医院”では
患者さん一人一人の立場・目線に立ち、
患者さん本位の治療を心がけ、
予防歯科に力を入れています。

やまもとファミリー歯科医院
(京都府 八幡市)
歯科医師 多賀 一真



私たち“やまもとファミリー歯科医院”では、患者さん一人一人の立場・目線に立ち、患者さん本位の治療を心がけ、予防歯科に力を入れています。そのため歯科衛生士との連携は必須であり、検査結果から「どのように治療していくか？」を常に考えております。つまり歯科衛生士による、歯ブラシの持ち方・動かし方、サイズや硬さなどについての説明が非常に重要だと考えています。セルフケアの充実により、歯科医師による治療の質も向上しますので、その際の道具選びが重要であると考えています。

そんな私ですが、自分自身が親となった今、2歳の娘の歯磨きは非常に難しいと日々感じています。まだ娘も小さいので説明しても理解できないのですが、本当に手こずってしまうのが現状です。

我々のように歯科医療従事者であれば、患者さんに毎日のように歯磨きの話をさせていただきますし、お子さんにもわかるように説明できますが、お父さんお母さんはご苦労されていることと思います。歯磨きの重要性を理解できない年齢のお子さんであれば尚更のことです。



左から山本院長、私、明石先生

しかし、そんなお子さんにも歯ブラシに興味を持つようなデザインがTePeの歯ブラシだと思います。カラフルかつ可愛いデザインの製品があるということです。日本の製品にもキャラクターをプリントされたものはありますが、TePeのものは歯ブラシの毛先が年齢に応じた形状をし、ほかの子供用歯ブラシと比べても毛足が長く、仕上げ磨きでも嫌がりません。やはり予防歯科先進国スウェーデンの知識・技術だと感じます。

また、成長に応じて矯正治療が必要になるお子さんもうらっしゃいます。そんなお子さんにも適した歯ブラシを選んであげられるのがTePeです。お子さんだけではなく成人でも様々なタイプの患者さんに適した歯ブラシがあり、我々も説明させていただくのに大変便利だと感じています。

お子さんの治療時に歯磨きを何故したくないのかを尋ねてみると、面倒だと言われます。詳しく聞くと、“YouTubeが見たいから！”や、携帯で



各社扱うがテペは人気急上昇↑

ゲームがしたいから！”と言われます。私たち大人もそうですが、スマホに依存しているお子さんが多くなっていると感じます。そんなお子さんには特にTePeをお勧めしています。理由としては、歯磨きが苦手でも短時間でツルツルに磨ける工夫が詰まっている、患者さんにとって優しい歯ブラシだからです。仕上げ磨きをしていただくとその効果をわかっていただけるからなのか、来院時にはお子さんの分だけでなく親御さんがご自身の分もご購入されることが多いです。

初めにも説明させていただきましたが、私たちの医院の理念である患者さん一人一人に向き合った治療を実践していくためには、それぞれに適した道具でそれぞれに合った方法で日々の口腔ケアを行っていただく必要があります。それを助けてくれるTePeについて、患者さんにもっとご理解いただければという努めています。



定期的に交換するよう、半年に1回
“まとめ買いキャンペーン！”を実施

Products Information

TePe テペ イラストシリーズ Kids Illustration Series



セレクトミニ エンジョイ
エクストラソフト

■ セレクトミニ エンジョイ
エクストラソフト プリスターパック

- * ハンドルの色・イラスト・組み合わせはアソートになります
- * イラストやカラーは変更になることがあります
- * セレクトミニのサイズです
- * かたさはエクストラソフトのみです



プリスターパック



KIDS (キッズ)
コンパクト

- KIDS (キッズ) コンパクト ソフト
- KIDS (キッズ) コンパクト エクストラソフト
- KIDS (キッズ) コンパクト ソフト プリスターパック
- KIDS (キッズ) コンパクト エクストラソフト プリスターパック

* セレクトコンパクトのサイズです



プリスターパック



TePe from Sweden

予防歯科の先進国スウェーデンから



人間工学に基づいてデザインされた
持ちやすいハンドル



ワイヤーをフィラメントが
98%カバー

98%

プラスチックコーティング
されたワイヤーと
ラウンド加工された
密毛フィラメントで、
歯面を傷つけにくい

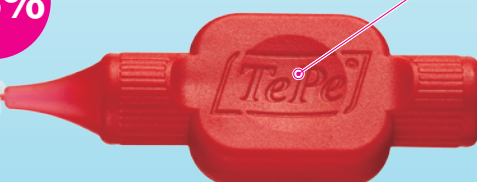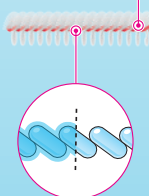

CO₂

80%

ハンドルとキャップは、
CO₂ 排出量を 80% 削減する
環境に優しい
再生可能な素材です

スウェーデンの歯科衛生士 10 人中 9 人がテペの歯間ブラシの使用を推奨しています *

■ プラスティックパック ■ ブリスターパック ■ ソフトパック ■ その他

* IPSOS Healthcare, 2019-06-26, Brand Monitor Professionals

オリジナル歯間ブラシ

Interdental Brush Original

ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングされ、
サイズは 9 種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入パック
1パック単サイズ8本+キャップ1本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 6本入ブリスターパック
- アソートパック
1パック ピンク～グレー 各1本 計8本(ブラックを除く)+キャップ1本入
- 25本入パック
1パック単サイズキャップ付 25本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 個別包装(キャップ付) 150本入
(グレー、ブラックはキャップなし)

アングル歯間ブラシ

Interdental Brush Angle

臼歯部や、舌側、口蓋側からのアクセスが容易なアングルヘッド。
ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングしてあります。



- 6本入ブリスターパック
1パック単サイズ6本+キャップ1本入
- アソートブリスターパック
1パック ピンク～グリーン 各1本 計6本+キャップ1本入
- 25本入パック
1パック単サイズキャップ付 25本入
- 個別包装(キャップ付) 80本入

セレクト Select

お手頃な価格で高品質なテペのスタンダード。密でコシのあるフィラメント
が効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



ハンドルの色はアソートになります

- セレクト ミディアム
- セレクト ソフト
- セレクト エクストラソフト
- セレクト ソフト ブリスターパック
- セレクト エクストラソフト ブリスターパック
- セレクト ミディアム 100本入
- セレクト ソフト 100本入
- セレクト エクストラソフト 100本入

セレクトコンパクト Select Compact

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。
お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



ハンドルの色はアソートになります

- セレクトコンパクト ミディアム
- セレクトコンパクト ソフト
- セレクトコンパクト エクストラソフト
- セレクトコンパクト ソフト ブリスターパック
- セレクトコンパクト エクストラソフト ブリスターパック
- セレクトコンパクト ミディアム 100本入
- セレクトコンパクト ソフト 100本入
- セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入

これからの地球にやさしい歯ブラシ

グッド GOOD

これまでのテペ歯ブラシのクオリティとデザインはそのままに、環境に配慮したシリーズです。再生可能なバイオベース材料を使用し、CO₂の排出を95%リサイクルさせることが可能なため、地球温暖化に深刻な影響を及ぼしている温室効果ガス排出への影響がほとんどない、環境にやさしいサステナブルな歯ブラシです。



ハンドルの色はアソートになります

- GOOD(グッド) ソフト
- GOOD(グッド) コンパクト ソフト
- GOOD(グッド) ミニ エクストラソフト
- GOOD(グッド) ソフト プリスターパック
- GOOD(グッド) コンパクトソフト プリスターパック
- GOOD(グッド) ミニ エクストラソフト プリスターパック

イラスト入り

イラスト入り



GOOD ミニサイズはスウェーデンで人気のキャラクター Bolibompa (ポリボンパ) のイラストです

プリスターパック

人気のスプリーム歯ブラシシリーズが環境に優しいサステナブル素材になりました

スプリーム Supreme

※ 2022 年春ごろから、商品名・お値段はそのままにハンドルの素材と色味が変わります

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造。長い毛先が歯間部や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短い毛は歯面をすっきりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方にも最適です。サムパッド（親指当て）と背面に滑りにくい素材（TPE）が使われており、手にしっとりなじみます。



ハンドルの色はアソートになります

- スプリーム
- スプリーム プリスターパック
- スプリーム 80本入



ハンドルの色はアソートになります

- スプリームコンパクト
- スプリームコンパクト プリスターパック
- スプリームコンパクト 80本入

Q. どんな素材なの？

A. ・フィラメントの材質：
ポリブチレンテレフタレート

・ハンドルの材質：
バイオベース高密度ポリエチレン

・グリップ部：
バイオベース TPE

フィラメントは従来のスプリームと変わらない優しい磨き心地、ハンドルだけサステナブルな素材になりました。


Q. ハンドルカラーは？

A. スプリームもスプリームコンパクトも共通の明るくポップな6色展開です。



Q. デザインは変わったの？

A. スプリームコンパクトは、ネック部分が従来より5mmほど長くなり、さらにアクセスしやすくなりました。スプリームは従来通りです。

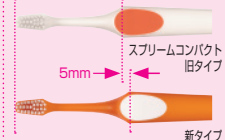

ネックが約5mm長くなったことで、ハンドルの肩の位置が下がりました。

歯にも優しく、地球にも優しい TePe 製品



北欧歯科
(福岡県 福岡市)
北欧歯科 こくら
(福岡県 北九州市)
歯科医師
加藤 大明

「歯は綺麗になる、だけどプラスチック製歯ブラシの大量消費は地球を壊している。」と、外国人の患者さんからご意見のメールをいただきました。

私たちにとっては SDGs（持続可能な開発目標）志向の高まりを実感するとともに、海外と日本の意識の差を痛感し、反省する出来事でした。

このような従来のプラスチック製歯ブラシ大量消費の問題点の指摘に加え、最近では医院で販売している歯ブラシの原材料についての問い合わせなど、日本人の患者さんからも「歯ブラシと環境負荷」にまつわるお声をよくうかがうようになりました。

これらのことを受けて、当院では、“私たちが原因！”で増えているプラスチックの量を減らすために、

1. バイオマス製などの、地球に負荷のかかりにくい素材を使用した歯ブラシをオススメする
2. 患者さんには来院時に歯ブラシの持参をお願いする
3. 出張時のホテルなどで使い捨て歯ブラシを使わない

といったことを守ることとしました。

SDGs 達成度世界ランキング上位であるスウェーデン*の企業である TePe 社は、バイオプラスチックを使用した GOOD シリーズや、歯間ブラシなどもマスバランス素材を使用したり、サステナブルな取り組みに真剣に向かい合っているメーカーというイメージが強くあります。

歯にも優しく、地球にも優しく。
今後も、私たちは TePe 製品を選び続けます。

*Sustainable Development Report 2021



TePe 社が取り組むサステナビリティ

- ・製造工程全体で 100%、風力や太陽エネルギーといった再生可能なエネルギーを使用しています
- ・製品や包装を可能な限り再生可能なバイオベース材料にすること、そして廃棄物を最小限に抑えるように取り組んでいます

(@ 00 円 /00) はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っていません。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TePe Oral Hygiene Products / クロスフィールド株式会社は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

患者さんの「気持ち良い」 歯科医院での「気持ち良い」

フリーランス歯科衛生士
沢口 由美子



プロフィーペースト Pro (HAp)

この新商品のパッケージデザイン凄いです！

とてもオシャレ！

さすがスウェーデン！！

と、感心したのは筆者だけではないと思います。

しかもよくよく見るとデザインも歯のエナメル表層の模倣です。

デザインからも歯を守る！というメッセージが伝わって生きますね！

HAp = ハイドロキシアパタイト配合、今どきの処方ですね。

ペーストの研磨剤はシリカとのことで、DIRECTA 社のプロフィーペースト Pro (パープル) のペーストと同じだそうです。

従来品のようにフッ素配合ではなく、HAp = ハイドロキシアパタイト配合になりました。フッ素配合を選ぶべきか？ HAp = ハイドロキシアパタイト配合を選ぶべきか？ 私たちは何を基準に選べばよいのでしょうか？非常に迷いますね。

フッ素は直接歯のハイドロキシアパタイトに作用してフルオロアパタイトに変えて耐酸性を高め、第二象牙質を作るところに作用します。

ハイドロキシアパタイトは？

ハイドロキシアパタイトもエナメル質にミネラルを補給し再石灰化すると言われています。

つまり、どちらも歯に良いということです。

筆者は従来よりクロスフィールド社主催のセミナーにて DIRECTA 社のペーストを使用する相互実習を行なってきました。

全てのペーストはそれぞれに使用目的があります。

粗い、細かい、仕上げとあります。

ポリッシングブラシ、ラバーカップの2回で行う方法、ポリッシングブラシだけで行ったり、ラバーカップだけで処置をしたり、患者さんの口腔内の状況で変わります。

メンテナンスや初期治療、歯石の付着状況、使用するインスツルメントやツールでも歯の表面の状況は変わります。

しかし、**どんな状況でも最後のポリッシングを欠かす事は許されません。**

最終研磨を怠り、プラークや歯石が付着沈着しやすい歯面にする事は、患者さんの不利益となります。

それだけでなく、**ポリッシングは患者さんにとって「気持ちがいい」、最大のプラスイメージをつくり、またやって欲しい、また来たい**と思っていただけです。

この DIRECTA 社のプロフィーペースト Pro (HAp) は粗研磨から仕上げまでワンペーストで使用可能です。メンテナンスなどでそんなにステインが目立たない歯面に**ラバーカップでペーストを取り、速度はゆっくり 500 ~ 1500rpm くらい、圧は 100 ~ 200 g 程度がお勧めです。**

なるべく少なく回転させ、弱めの圧を意識して1歯につき10秒位でポリッシングしてみてください。

さらに、ペーストが残っている状態でフロスをしましょう。TePe 社のデンタルテープがおすすめです。フロスよりも清掃効率が良いのです。

患者さんの「気持ち良い」を引き出してください。

歯科医院での「気持ち良い」は万病予防の素です。

歯面を意識したお仕事を目指しましょう！



Products Information

DIRECTA
directadental.com



NEW PRODUCT

2022 年 春 発売予定

ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有
ワンステップ PMTC ペーストが新登場

商品名

プロフィーペーストPro (HAp)

チューブタイプ(60g)

標準価格 4,600 円 (税込 5,060 円) / 本

医療機器届出番号 13B1X00133000027



優れた製品で違いが分かる プロフェッショナルケアを

歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。やはり歯科衛生士としては
施術後「歯がツルツルになった」「口の中がさっぱりした」「また来るね」
と笑顔で帰って行く患者様の姿が嬉しく励みになります。

halsa
(北海道 旭川市)
歯科衛生士 **笹谷 結季**



歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。ケア終了後患者様に感じて欲しいのは口腔内の感触の違いと爽快感です。そのために使用するケア用品、ペーストにはこだわります。

施術後患者様から頂く「歯がツルツルになった」という声は、歯科衛生士にとってとても嬉しいものです。
PMTC にはプロフィーペースト Pro を使用していますが RDA が 4 段階あり、それぞれの歯面の着色状態に合わせて使い分けをしています。

ステインの沈着がさほど見られない状態であればプロフィーペースト Pro (パープル) によりワンステップで仕上げるすることができます。プロフィーペースト Pro は伸びやすく飛び散りにくいので、操作性も優れています。1,000ppm のフッ化物配合なので歯に優しく美しく仕上げるすることができます。

一通りの PMTC 後は歯肉、粘膜面、舌のクリーニングとマッサージも行ないます。ここで使用するのは TePe のスペシャルケアブラシと Dr. Wild 社のティーボドント ジェルです。

スペシャルケアは約 12,000 本のフィラメントで、まるでメイクブラシのようなフワフワで心地よい感触のハブラシです。ティーボドント ジェルはアロマオイルでも有名なティーツリー葉水を 2% 含んだ歯磨剤です。ティーツリー特有の清涼感のある香りが、口の中に入れた途端に広がりリラックス効果を誘います。私はティーボドント ジェルを付けたスペシャルケアで、歯槽粘膜、頬粘膜、口蓋粘膜、舌、舌下、とにかく口腔内全体をマッサージします。

歯科という場所柄、スケーリングなどの施術でどうしても緊張してしまう方が多いと思いますが、ケアの最後にこのマッサージを取り入れることにより緊張をほぐし、リラックスして帰っていただくようにしています。

この粘膜ケアとマッサージを行なった後、「口の中がさっぱりした」という声を多くいただいています。

「歯みがき」という言葉ゆえに、お口のケアというと「歯をきれいにする」と捉えられがちですが、粘膜面も汚れていることを知ってもらい、マッサージすることにより歯肉の血行、唾液の分泌が良くなることを説明し、週に何回かでもご自身で粘膜のケアを行なってもらうことをお勧めしています。

歯科衛生士が行なうプロフェッショナルケア。やはり歯科衛生士としては施術後「歯がツルツルになった」「口の中がさっぱりした」「また来るね」と笑顔で帰って行く患者様の姿が嬉しく励みになります。

そのために、施術前、施術後の違いを分かってもらうケアを目指しています。



プロフィーペースト Pro カップタイプ
プ5色とティーボドント ジェル



約 12,000 本のフィラメント
心地よい感触のスペシャルケア



このマッサージでリラックスしてもらいます。



スペシャルケアとティーボドント ジェルは相性抜群。ハブラシを使った粘膜ケアは自宅でも気軽にできます。

Products Information

DIRECTA
directadental.com



- 1,000ppm フッ素含有
- 中性の pH 値 (5~6 pH)
- 飛散しにくく、のびやすい
- 爽やかなミント味



商品名	プロフィーペースト Pro	標準価格
チューブタイプ	60ml	
各 1 本		
パープル		4,600 円 (税込 5,060 円)
ブルー、グリーン、レッド、イエロー		3,600 円 (税込 3,960 円)
単回使用 2g カップタイプ	144 個 / 箱	
各 1 箱		
パープル		18,000 円 (税込 19,800 円)
ブルー、グリーン、レッド、イエロー		14,000 円 (税込 15,400 円)

安全性確保のための飛沫対策 ケアシールドの有効性

厚生労働省からは、歯科診療の特性に基づいた
感染対策の指針が発表されましたので、それを踏まえながら
飛沫対策を中心にクリニカルヒントをお伝えします。

有限会社ハグクリエーション代表
口腔科学修士
歯科衛生士 **柏井 伸子**



はじめに

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが未だに大小の波を繰り返しながら私たちの生活に影響を与えています。歯科臨床においても、外科的処置を見送ったり定期検診の間隔を開けたりという対応を行いました。厚生労働省からは、歯科診療の特性に基づいた感染対策の指針が発表されましたので、それを踏まえながら飛沫対策を中心にクリニカルヒントをお伝えします。

1：指針に見る飛沫への対応

令和2年4月6日付で厚生労働省医政局歯科保健課から発令された「歯科医療機器間における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策について」においては、「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針（第2版）」に準じた対応が求められています^{*1}。この中の【質問11】では口腔外バキューム使用によるリスク軽減について取り上げ、「歯科治療は回転切削器具を頻用するため、血液で汚染されたエアロゾルや唾液中の微生物を含んだバクテリアエアロゾル、それに義歯用レジンに侵入していた微生物を含んだ切削粉塵が診療室に飛散しています。口腔外バキュームの使用は、このようなエアロゾルや切削粉塵の飛散を低減させます。したがって、歯科治療時は、診療室内の汚染を減少させるために口腔外バキュームの常時使用が強く勧められます。」と回答しています。

参考文献

*1 日本歯科医学会 厚生労働省委託事業 歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業実行委員会：厚生労働省委託事業「歯科診療における院内感染対策に関する検証等事業」一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針（第2版）
<https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000510349.pdf>

*2 柏井伸子：書き込み式歯科衛生士のための感染管理のきほん デンタルダイヤモンド社、東京、2019.

*3 柏井伸子：よくわかる歯科衛生士の消毒滅菌管理マニュアル インターアクション、東京、2018.

2：歯科臨床における飛沫発生の実態

歯科臨床においては、歯科医師による回転切削器具による歯の切削や歯科衛生士による歯面清掃時にも飛沫による環境汚染が発生します（写真1）。指針で推奨されているように口腔外バキュームの使用が有効ですが、費用・スペース等の問題から設置が難しい場合もあります。そのような場合でも「ケアシールド」を接続することで、簡易的に吸引装置を活用することが可能になります（写真2）。

3：ケアシールド使用上の注意点とSDGsに基づいた安全な再利用

ケアシールドの使用に際しては、飛沫や粉じんがどのように飛散するのかを考慮して位置や角度を設定します（写真3）。さらに使用後は、透明のシールド部分はティッシュペーパーですが、コネクターやアダプターは洗浄・乾燥後、134℃で滅菌を行えば再利用可能です（写真4）。クラスN滅菌器では庫内温度が上がるため乾燥不可となります。持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）が求められている昨今です。医療資源やスタッフの人材資源の有効活用を考え、個人防護具の適正使用や環境整備を実践し、医療安全につなげていきたいものです^{*2, 3}。

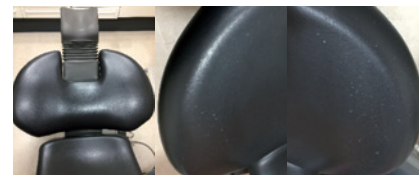


写真1. 超音波スケーリングとエアアブレーション施術後のユニット

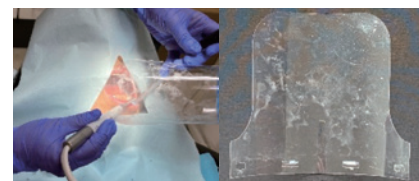


写真2. ケアシールドによる歯面清掃時の環境汚染対策と使用後のシールド



写真3. 義歯調整時（左）およびメンテナンス時（右）における環境汚染対策



写真4. コネクターとアダプターは滅菌可能

Products Information

ORSING ケアシールド CareShield™



手軽にエアロゾル軽減

商品名 ケアシールド スターターキット

シールドリフィル×100枚、コネクター×5個 H6.5-11アダプター×10個

標準価格 28,000円（税込30,800円）

商品名 ケアシールド シールドリフィル

100枚入 単回使用

標準価格 23,000円（税込25,300円）

商品名 ケアシールド コネクター

5個入

標準価格 10,000円（税込11,000円）

商品名 H6.5-11アダプター

10個入

標準価格 5,000円（税込5,500円）


オートクレーブ可能（134℃）乾燥工程不可

商品名 U16-11アダプター

10個入

標準価格 5,000円（税込5,500円）


オートクレーブ可能（134℃）乾燥工程不可 *ケアシールド スターターキットには含まれません

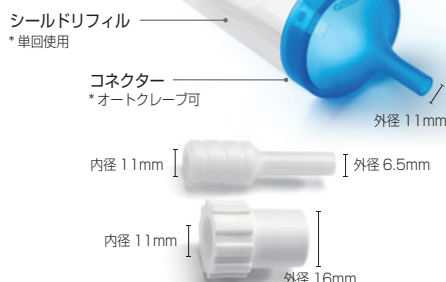

*商品動画はこちらのQRよりご確認ください



医療機器届出番号 13B1X00133000077

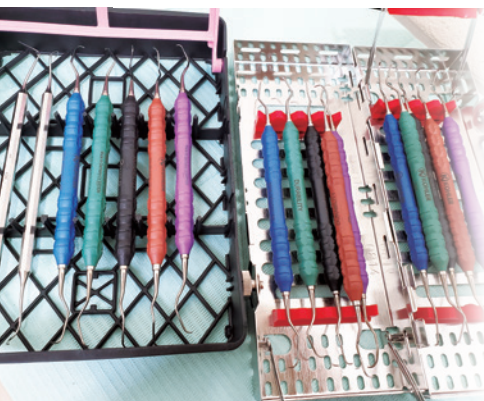

頼りになるスケーラー グレーシーデュラビリティー を選択するということ

切れ味も耐久性も優れていること、
シャープニング可能なことも
嬉しいポイントです。

医療法人真摯会 まつもと歯科
(大阪府 吹田市)
歯科衛生士 **坂上 明美**



グレーシーデュラビリティーのレギュラーとミニのセット

私が勤務している医院ではキュレットスケーラーの支給があります。そのため、色々なメーカーのキュレットを試して使い分けができ、**SRP 前の検査でどのようなものを用いるのが最適かを判断することができます。**

歯周基本治療の中でできるだけ内縁上皮を傷つけずに低侵襲に SRP を行うには、まずは器具を選択し、シャープニングされているかをチェックします。その後、歯石を感知しますが、その際は指先で微妙に見えない根面の凹凸を感知することが大切です。

スケーラーの選択ですが、オーバートリートメントがしにくいこと、疲れにくくストレスフリーであること、そして経済的であることも選ぶ基準にしています。

当院では 1 日に 12 人から 15 人の患者さんを担当するので大変忙しく、キュレットのシャープニングの時間が取りにくいのが悩みでした。シャープニング不要の物も何種類か使いましたが、切れ味が落ちやすく感じるのと、そうなるとうも廃棄するしかないの困っていました。

そこで、グレーシーデュラビリティーのレギュラーサイズとミニサイズを発売後すぐに揃えてみました。

“把持してみて軽い！” “少しハンドルが細いけど、しっかり手になじむ” が第一印象。
ブレードも細く、薄めの歯肉にも容易に入れやすく、手に感覚が伝わってきます。**カッティングエッジは常に鋭角で、すぐに使えるのが嬉しい**です。

当医院では、同じ法人内の歯科衛生士達と企画して、**定期的に外部の講師に来ていただき勉強会を行っています。**アットホームな雰囲気、解らないことがすぐに聞けて情報共有できますし、仲良くなれるので、

仕事のモチベーションアップにつながっています。
定期的に行われる院内勉強会でも、グレーシーデュラビリティーをキャリアの異なる歯科衛生士複数で試してみました。

感想は、“**当てやすい**”、“**歯石が感知しやすい**”、“**指に伝わりやすい**”、“**軽い**”、“**手の小さい自分には細いハンドルがいい**”、“**コンタクト下まですーっと届く**”等、**大好評**でした。
特に 11/12 を使ってみると良さがよく分かると思います。

歯周ポケットが深ければキュレットのシャンクは長くブレードが小さい方が挿入しやすいです。こちらのスケーラーはブレードが薄く挿入が簡単ですし、強いステンレスで破損しにくいところも安心です。

切れ味も耐久性も優れていること、でも切れ味が落ちてきたらシャープニング可能なことも嬉しいポイントです。

日々の臨床に頼りになる、長く大切に扱いたいスケーラーです。



外部講師による院内勉強会の様子



診療風景
「術者保護エプロン」も愛用しています

Products Information



切れ味が長期間持続！ シャープニング回数の削減！ シャープニングも可能！

- ・アクリル*1 に 9,600 回ストローク、プラスメタル*2 に 4,800 回ストロークを行っても切れ味が持続するので、シャープニング回数を抑えられます。*3
- ・高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。
- ・人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、滑りにくく、緻密で繊細な作業を正確に行うのに適しています。

*1：テストスティック *2：テスト用真鍮金属 硬度 90HB Brinell *3：KOHLER 社試験による



特殊な仕上げ工程でシャープさが持続

メディカルで幅広く採用されている PEEK (ポリエーテルエーテルケトン樹脂)

強靱な特殊ステンレス鋼で破損しにくい

レギュラー / ミニ

グレーシー	5/6	
グレーシー	7/8	
グレーシー	11/12	
グレーシー	13/14	
グレーシー	15/16	

レギュラー 5/6

ミニ 5/6

商品名 **グレーシーデュラビリティー** レギュラー・ミニ共通 1 本 標準価格 7,500 円 (税込 8,250 円) *オートクレーブ対応

医療機器届出番号：13B1X00133000076

ワムキーでストレスフリーのメタルコア除去を！

急性根尖性歯周炎による極度の痛みを訴えられた場合、できるだけ早くスムーズに除去してあげたいと思うのが医療人としての思いではないでしょうか？

医療法人真穂会
ますだ歯科医院
(愛媛県 宇和島市)
歯科医師 佐伯 真未子




日々診療する中で、メタルコアの除去にストレスを感じる先生は多いのではないのでしょうか？特に急性根尖性歯周炎による極度の痛みを訴えられた場合、できるだけ早くスムーズに除去してあげたいと思うのが医療人としての思いではないのでしょうか？

従来の方法では、マージン部分をかなり削り、超音波で振動を与えて除去していました。大白歯の近心根、遠心根どちらもコアが入っている場合は中央で分割してからそれぞれを除去するという手間がかかっており、長い時は30分ほどかけて除去したこともありました。この作業は患者・術者ともに苦痛の時間だったことは間違いありません。

私はこのワムキークラウンリムーバーに出会って、今までのコア除去の常識を覆されました。それまではこのワムキークラウンリムーバーをクラウン除去の目的で、5年ほど前から使用していました。しかし、ふとした



メタルコアと歯質の マージン部分に 超音波スケーラーで セメントを緩める。 ワムキークラウンリムーバーでひねって持ち上げる。 切れ目を入れる。

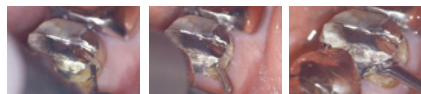

拍子に『この原理をコア除去に使用できるのでは？』と思い試してみました。すると、驚くほど簡単にコアが持ち上がり外れることに気が付きました。

おそらく、この楕円形の独特の先端と、持ち手のしっかりした形態の相乗効果で、絶妙な力がコアを真上に持ち上げるのです。特に本領を発揮するのは、大白歯部です。従来も前歯部には兼松式などを使用することができていたのですが、このワムキークラウンリムーバーは口腔内のどの位置にあるメタルコアでも除去することができます。


この発見で、「開業以来30年以上苦労していたメタルコア除去が全く苦にならなくなった。」と当院の院長も話しています。

使い方は簡単3ステップです。

- ①メタルコアのマージン部分を削合し、ワムキーの先端が入るスペースを作る。
(頬側、舌側できればどちらも削合した方が早く除去できる)
- ②超音波スケーラーのチップを当て、振動によりセメントを緩める
- ③ワムキークラウンリムーバーをマージン部分に入れゆっくりひねる。

(頬側か舌側どちらかが特に外れやすい側になるので、両方試してみる方が良いでしょう。まずNo.1、次にNo.2というように先端を変えてみてじっくりくる方を使用する)

今までメタルコア除去に悩んでいた先生の一助となれば幸いです。

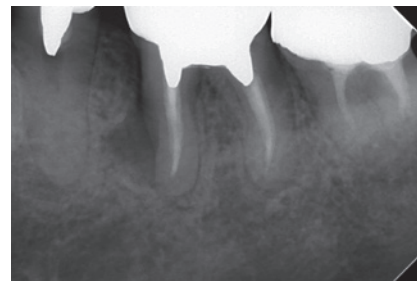

治療前



治療後3ヶ月 病巣は縮小傾向

コア除去動画はこちら



Products Information



早くて簡単なクラウンリムーバー、
クラウン除去の強い味方



商品名
ワムキークラウンリムーバー

医療機器届出番号 13B1X00133000032

セット 標準価格 50,000 円 (税込 55,000 円)

ワムキークラウンリムーバー No.1

ワムキークラウンリムーバー No.2

ワムキークラウンリムーバー No.3

各 1 本、計 3 本

各 1 本 標準価格 20,000 円 (税込 22,000 円)

ワムキークラウンリムーバー No.1

ワムキークラウンリムーバー No.2

ワムキークラウンリムーバー No.3



毎年スタッフみんなで学会に参加するのが恒例でした
現在はリモート参加です

マウスガードの汚れを 機械的に清掃する器具の考察

私が重要だと考え取り組んでいる分野が、正しいスポーツマウスガードの普及である。

大阪歯科大学附属病院
障がい者歯科
(大阪府 大阪市)
講師 田中 佑人



スポーツ歯学は、選手個人が持っている力を最大限に発揮する手助けを、顎口腔領域から考えることを目的としている。その中でも私が重要だと考え取り組んでいる分野が、正しいスポーツマウスガードの普及である。

マウスガードとは、スポーツ時に歯列に装着して、顎口腔領域の硬組織と軟組織の外傷、脳震盪を予防あるいは軽減するための装置と定義されており^{*1}、多くの競技で使用が義務化されている。特に外傷発生頻度の高い上顎前歯部を保護するため、上顎歯列に装着するのが一般的である。

2014年には日本スポーツ歯科医学会が提唱する、「標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス」が発表された^{*2-5}。こうしたマウスガードの普及が進んでいる背景を受け、歯科の専門家として、その管理や清掃方法についての正しい情報共有も必要と

なる。今回、マウスガードの清掃管理に有効と考えられる清掃器具を紹介する。

マウスガードの除菌についてはいくつか報告がある。例えば、瞬時に除菌したい場合はマウスガード除菌スプレーなどが効果的であろう。十分に乾燥させることでも細菌数が激減するといわれている^{*6}。しかし、マウスガードの汚れを機械的に除去する方法については、十分な研究がなされていないように思われる。歯ブラシを使用すると表面に傷がついてしまい、かえって汚染しやすくなるといわれている^{*6}。では、何を使用して清掃すればよいのだろうか。

下記写真に示すような清掃器具の使用が望ましいと考える。これは、マウスガードを傷つけないシリコン製のブラシにより全体を一度に簡単に清掃できる形状で、マウスガードを内部に入れ、ジェルタイプの歯磨剤（研磨剤

非含有）を使用し、回転させて清掃後、流水下で洗浄する。

デザイン性が高く、清潔感もあるので、スポーツ選手やスポーツ愛好家に好評となるのではないだろうか。

また、こうした清掃器具は、介護の現場での義歯の清掃にも有効であろう。要介護者の家族や介護者が義歯を清掃するときに、義歯をシンクに落として破損させてしまうことがしばしばあるが、デンタルクリーナーで清掃すればそのリスクを軽減できそうである。

また、その優れたデザイン性は、介護の現場をよりオシャレにしてくれることだろう。



マウスガードの清掃に最適
義歯の清掃にも応用可能である



流水下でマウスガードを清掃している



シンク横の照明で映えるデンタルクリーナー

*1. 上野俊明, 木本一成, 鈴木浩司, 武田友孝, 前田芳信, 松本 勝, 安井利一 編集. 要説スポーツ歯科医学 第2版. 医学情報社, 2020: 91.

*2. 安藤貴則, 武田友孝, 宮澤 慶, 中禮 宏, 渡邊愛斗, 町 博之, 大野かをる, 高柳 博, 植木公一, 村松仁志. 2014 年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス (ワーキンググループ 1) マウスガードの印象, 模型製作, デザイン (外形線, 厚み, スポーツの種類). スポーツ歯学, 2015: 18 (2): 72-76.

*3. 田中佑人, 北 邦宏, 黒川勝英, 水橋 史, 松田信介, 百瀬義信, 矢野 顕, 柴田 豊, 飯盛隆司, 辻村正康. 2014 年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス (ワーキンググループ 2) 成形, 模型からの撤去, トリミング. スポーツ歯学, 2015: 18 (2): 77-78.

*4. 吉野仙峰, 五十嵐一誠, 鈴木浩司, 高橋敏幸, 高橋 睦, 月村直樹, 中島一憲, 新家義章, 井澤政紀. 2014 年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス (ワーキンググループ 3) 咬合 (スポーツの種類にも関連), 調整. スポーツ歯学, 2015: 18 (2): 79-80.

*5. 権田知也, 豊島由佳子, 田辺麻衣, 木本一成. 2014 年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス (ワーキンググループ 4) 清掃, 保管, 修理, 再製. スポーツ歯学, 2015: 18 (2): 81-82.

*6. Ogawa T, Yamasaki S, Honda M, Terao Y, Kawabata S, Maeda Y. Long-term survival of salivary streptococci on dental devices made of ethylene vinyl acetate. Int J Oral Sci. 2012; 4(1): 14-18.

短時間で簡単にマウスピースなどの機械的清掃が行えるデンタルクリーナー

負担を感じないで、短時間に機械的な清掃を行うために、デンタルクリーナーをお勧めします。

キャビネ・ラピヌー
(千葉県 浦安市)
日本小児歯科学会認定歯科衛生士

中野 真弥



マウスピースや義歯、取り外し式の矯正器具は毎日口の中から外したら清掃が必要です。口腔内には何億もの細菌がおり、清掃せずマウスピースなどを使用すれば、**細菌がもっと増殖したものを口腔内に装着することになり清潔とは言えません。**

義歯を使用している高齢者であれば細菌により**誤嚥性肺炎**を起こしかねません。義歯や装置の毎日の清掃を続けるためには、短時間で簡単に効率よく清掃できることが重要です。

私は現在、矯正の保定装置でホーレータイプのタンククリップ付きのリテーナーを使用しており、デンタルクリーナーでの清掃をしています。デンタルクリーナーを使用するまでは、朝と就寝前に歯ブラシでリテーナーの清掃を行っていました。

ブラークはレジン床にはもちろん、床とワイヤーの繋ぎ目、細いワイヤー自体など、思った以上に付着するものと、リテーナーの使用当初は驚きました。歯ブラシでの清掃の際、タンククリップがある事で保持しづらく、ワイヤー部分を強く保持してしまう事で曲がってしまう不安があり、**細かいところまで清掃するのに時間がかかっていました。**

しかしデンタルクリーナーを使用したところ、短時間で細かいところまでブラークの除去ができ、**楽に清掃ができるようになりました。**

デンタルクリーナーの受け皿にリテーナーをのせ、上から蓋をし、15秒程度、約90度左右に回転させるだけで片顎のリテーナーはキレイになります。

大きすぎず、手のひらにフィットするので保持しやすく作業も簡単です。ブラシ部分はシリコンでできており、装置やマウスピースを傷つけることもありません。ブラシ1本1本がしっかり自立しているので細かい隙間にも入り込みブラークを除去してくれます。水捌けも良く、使用後に軽く振って水気を取って置いておけばすぐに乾きます。また、ブラシ部分は交換が可能です。

私はリテーナーで使用してきましたが、マウスピースや、義歯でも同様に有効だと思います。高齢の方が歯ブラシを使用して義歯を細かいところまで磨くのはなかなか難しいことだと思います。

日々の診療の中で、「洗う時に落として割れてしまった」という声があります。また「清掃している」と言っているにもかかわらず付着した状態の義歯を見ることも少なくありません。

このデンタルクリーナーを使用すれば、単純な作業で、細かいことをする必要がなく、**義歯の清掃効率を上げることができます。**

マウスピースのようにくぼんだ内面にも凹凸に配置されたブラシが表面をしっかりとらえてくれます。

デンタル携帯用ケースは、頑丈なつくりなのでスポーツマウスピースやリテーナーの持ち運びに便利です。

義歯やリテーナーなどは洗浄剤での科学的な清掃も必要になりますが、まずは**目に見えるブラークを取る機械的な清掃ができていないと、洗浄剤が奥まで浸透せず効果が発揮されません。**

掃除する事に負担を感じないで、短時間に機械的な清掃を行うために、デンタルクリーナーをお勧めします。



リテーナーを乗せたところ



手にフィットするサイズ感



容易に分解できて衛生的

Products Information

Dr Mark's
HyGenie

デンタルクリーナー



商品名
デンタルクリーナー
本体サイズ：Φ90mm×85mm

商品名
デンタル携帯用ケース
本体サイズ：83mm×88mm×33mm



ナイトガードやマウスピースなどさまざまな歯科関連のアイテムをクリーニング可能。(対応幅<65mm)

持ち運び便利なデンタル携帯用ケース

ユニバーサルマスキングにおける推奨マスク

アビベータプロテクトマスク 2.0 は布マスクの中でも特に優れていると思われるのでここで紹介する。

大阪歯科大学附属病院
障がい者歯科
(大阪府 大阪市)
講師 田中 佑人



新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ユニバーサルマスキング（他の人が2メートル以内の距離にいる場面では、常にマスクを使用する）が急速に展開した。その結果、2020年5月頃には世界中の不織布マスクの在庫数からすると数ヵ月でなくなる見積もりとなり、マスクの買占め運動や、わずかな数のマスクのために行列に並ぶという現象がみられたのは記憶に新しい。こうした背景を受け、マスクの供給量増加とともに布マスクへの期待が高まった。



しかし、布マスクに対する期待とは裏腹に、その欠点が指摘されることも少なくなかった。ある研究では、布マスクは不織布マスクと比較して、飛沫の拡大予防効果が3分の1程度であると実験的に明らかになった^{*1}。きちんと顔面皮膚に密着しないことが原因だと考察されている。マスクの効果は、目的にあった大きさの粒子をろ過する機能と顔面へのフィット性で決まるため、顔の輪郭にあっ

たマスクを選択し、口から顎まで十分に覆い顔にフィットさせることが重要である。布マスクの適合を改善するための様々な戦略が立てられはした^{*2}が、布マスクの使用は不織布マスクの不足時の最終手段と考えられることも多い。

ただし、近年では様々な企業から、優れた飛沫拡大予防効果をもつ布マスクが販売され始めている。アビベータプロテクトマスク 2.0 はそれらの中でも特に優れていると思われるのでここで紹介する。販売元のクロスフィールズ株式会社からの情報によれば、99%の抗菌効果、99%の抗ウイルス効果、99%のフィルター性能をもつ素材が4層に重ねられているという。また、顔面にフィットする形態と調節可能なイヤーループにより、非常に良好なマスクフィットが実感できる。特



にメガネが曇りにくい点においては、重宝している。

常にマスクを使用するというユニバーサルマスキングの文化においては、ある程度のデザイン性も必要であろう。さらに、毎日の使用が必要となると、ある程度経済的である必要もある。実際、アビベータプロテクトマスク 2.0 の使用感は良く、見た目にも十分なデザイン性だと言える。最大20週使用可能ということで、不織布マスクの単回使用を継続するよりも経済的である。

もちろん、時と場所と場合への配慮をしたうえでの使用が望ましいが、高度な清潔さが要求される手術室等での観光的処置でないかぎり、アビベータプロテクトマスク 2.0 の活躍の場は多いと考えられる。

*1. Davies A, Thompson KA, Giri K, Kafatos G, Walker J, Bennett A. Testing the efficacy of homemade masks: Would they protect in an influenza pandemic? Disaster Med Public Health Prep 2013; 7: 413-418.

*2. Okamura T, Arai K, Tanaka Y, Ono Y. Custom fabrication of cloth face masks assisted by a CAD/CAM system for use during a shortage of surgical masks. J Osaka Dent Univ 2021; 55: 21-25

Products Information

アビベータプロテクトマスク 2.0

デザイン性の高い洗えるプロテクトマスク

医療従事者から一般の方まで幅広く使える
スイスでクラス I 医療機器^{*1}

^{*1} 届出 CH-202004-0041

■ 4層構造

花粉
PM2.5~0.1
菌
ウイルス



99%抗ウイルス^{*2}

99%抗菌^{*3}

99%フィルター性能^{*4}

0.1 ミクロン (0.0001mm)

粒子まで捕集^{*5}

^{*2} ANTIVIRAL ACTIVITY TEST ISO 18184

^{*3} ANTIBACTERIAL TEST ISO 20743

^{*4} FILTER EFFICIENCY / RESPIRATORY RESISTANCE

GB 2626-2006

^{*5} BFE TEST EN 14983

商品名

アビベータプロテクトマスク 2.0 1枚入

ピンク/ライトブルー/ホワイト/グレー/ブラック

幅広いノーズクリップ調整

洗えて繰り返し使える

口回りに空間があり
呼吸が苦しくない

薄い機能素材で熱がこもりにくい

AVEVITA
by SANKOM* SWITZERLAND

子供から大人まで
簡単にフィット調整できる
イヤーループ

内側は肌にやさしい
100%天然コットン

ポリプロピレン/
フッ素樹脂ナノフィルター



・患者様ご説明用の価格記載が無いカタログはこちらの QR コードからダウンロードできます



呼吸が苦しくなく、フィルター性能も優れている アベビータプロテクトマスク 2.0

マスクの利点と弱点を知り、子供から大人まで適切に活用可能で
有能なマスクであると、お勧めいたします。

小野歯科医院
(岡山県倉敷市)
緒形(宮地) 孝子



昨年から続くコロナ禍で、注目された**予防策の**
一つが**マスク**ではないでしょうか。
一時期、マスクと消毒用エタノールの品薄で苦
労された医院が多かったのも記憶に新しいとこ
ろです。

これまでは、マスクといえば（医療機関は別とし
て）花粉症やインフルエンザ対策として、時期的
に使用するものというのが一般的だったように思
います。ただ、一昨年には手洗いやうがいとと
もに、季節を問わないものとなりました。

マスク騒動が落ち着いてからは、性能、使い分
け、使用法による効果の違いも報道されるよう
になってきました。

一般的に、**布より不織布マスクを使用すること
が推奨されます**。しかし、機能的ではありますが、
夏や湿気の多い時期はベタつきや、肌荒れ
が見られることがあります。特にお子さんは着
用していると口呼吸となり呼吸が浅く、息苦し
いのか元気がないことや、マスクを着用してい
ても上顎前歯でマスクを噛みながら来院される
お子さんもいらっしゃいます。
コンビニなどでは「何日目のマスクだろう？」
という不織布マスクをポケットから出して、使
用している方を見かけるのも珍しくありません。

「呼吸が苦しくなく、フィルター性能も優れて
いる」
これは相反する特徴である、と半ば諦めていた
頃にこちらの製品を知りました。

従来のマスクとの大きな違いは、

- ・布マスクでありながら、高い撥水性、4層ナ
ノフィルター、ノーズクリップにより個体差
に合わせて鼻周りをフィットできる
 - ・洗濯は週1回から2回で、20回洗ったら交換
 - ・眼鏡や拡大鏡の邪魔にならない
 - ・口周りに空間があり、呼吸が苦しくない
 - ・診療中の説明や指示の発声もしやすく、患者
さんやスタッフに聞こえやすい
 - ・イヤーループで耳周りを簡単に調整でき、長
時間つけていても耳が痛くない
- といったところでしょうか。

以下、現在交換しつつ3代目？を使用中である、
私の個人的な感想も記しておきます。

4層構造ということでもかなり厚みがあるのでは
ないかと思っていましたが、予想より薄く、つ
けていてもストレスがありません。

不織布のマスクはメーカーにより薬剤の匂い
と、フィットさせる鼻や頬の肌荒れとかゆみ
に悩まされていましたが、こちらは**内側が
100%天然コットンで肌触りが良く快適**です。

5色のうち、初めはホワイトを使っていたので
すが、マスクの上部にチークがつくので、女性
はホワイトではない方が良いかもしれません。

初めて使う時は、パッケージの匂いがあるの
で、私は使用前に1回洗濯してから使用してい
ます。※ビニールに入れていないのは、SDGs
の観点から気候変動を考慮しています。

診療中は、拡大鏡も耳で固定するため、これま
で耳が痛かったのですが、こちらに変えてから
は耳の痛みがないまま確実に固定でき、眼鏡も
曇りにくく集中して診療できています。

マスクの利点と弱点を知り、子供から大人まで
適切に活用可能で有能なマスクであると、お勧
めいたします。



手作りポップ



フィットしていて心地よい



当院人気の物販コーナー

Products Information

AVEVITA 
by SANKOM® SWITZERLAND

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付^{*1}

フィット感と口回りの空間が快適

息がこもりにくいバルブタイプ



高い撥水性



抗ウイルス



抗菌

99%抗ウイルス^{*2}

99%抗菌^{*3}

高性能フィルター^{*4}

調整可能なノーズクリップ

調整可能なイヤーループ

商品名

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付 1枚入

ホワイト/ブラック

*1 バルブ部は99%抗ウイルス、99%抗菌、高性能フィルター
対象外です
*2 ANTIVIRAL ACTIVITY TEST ISO 18184
*3 ANTIBACTERIAL TEST ISO 20743
*4 FILTER EFFICIENCY / RESPIRATORY
RESISTANCE GB 2626-2006



目立ちにくいバルブ

DIRECTA シリーズ

DIRECTA 商品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、スウェーデンや国際的に著名で品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究し開発されています。




スウェーデンの歯科医師によってデザインされた 高品質なスウェーデン鋼使用

Luxator®

ラクスエーター・プラス

【ラクスエーター・プラスの使用法】

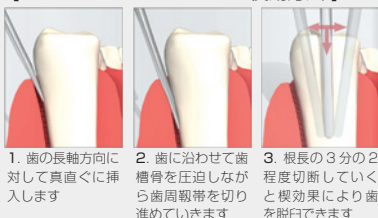

ラクスエーター・プラスによる
抜歯の使用感*

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断ができる

*当社実施アンケート結果より

商品名 ラクスエーター・プラス

標準価格

K4 (スタンダード 4 本)	41,000 円 (税込 45,100 円)
4 本セット (3C 3S 5C 5S) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
SK4 (ショートモデル 4 本)	41,000 円 (税込 45,100 円)
4 本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
K7 (スタンダード 7 本)	68,000 円 (税込 74,800 円)
7 本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
単品 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, S2S, S3C, S3S, S3S, S3CA, P1, P2, P3, P4	12,000 円 (税込 13,200 円) / 本
単品 1S, DE3, DE5	13,000 円 (税込 14,300 円) / 本
単品 3S チタン, 2S チタン	15,000 円 (税込 16,500 円) / 本
単品 DE3 チタン, 3A チタン	16,000 円 (税込 17,600 円) / 本
シャープニングツール	2,700 円 (税込 2,970 円) / 本

医療機器届出番号 13B1X00133000007

ラクスエーターシリーズに操作性を極めた ペンタイプ (P シリーズ) が新登場

Luxator® P-series

商品名

ラクスエーター・プラス (P シリーズ)


単品	標準価格 12,000 円 / 本 (税別)
PK4 4 本セット	標準価格 41,000 円 / セット (税別)



医療機器届出番号 13B1X00133000007

CR 修復用マトリックス フェンダーメイト

FENDERMATE®

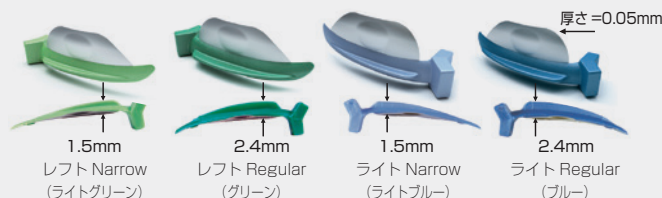

商品名 フェンダーメイト

アソート

標準価格 22,320 円 (税込 24,552 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R 各 18 個) / 計 72 個 @ 310 円

単品 各 1 箱

標準価格 6,120 円 (税込 6,732 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R) / 18 個 @ 340 円

単品バリューパック 各 1 箱

標準価格 26,000 円 (税込 28,600 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R) / 100 個 @ 260 円


医療機器届出番号 13B1X00133000028

ACTEON 明るい！クリア！！鮮明！！！！

ピュアリフレクト ミラー

- 約 95% 以上の高い反射率
- 広い波長範囲でほぼ一定の反射率
- 診療ストレスの緩和

反射率グラフ (コーティング別)

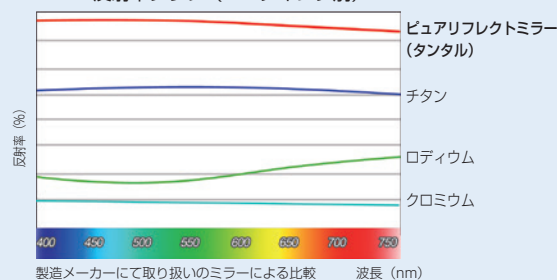

製造メーカーにて取り扱ひのミラーによる比較 波長 (nm)

ラウンド 3 ミラートップ 実寸大



ラウンド 5 ø3mm



スクエア 7 ø5mm



スクエア 9 7×2mm



9×3mm

商品名 ピュアリフレクト ミラー

12 本入り サイズ 0 サイズ 2

標準価格 各 16,800 円 (税込 18,480 円) 12 本 / パック @ 1,400 円 (税別)

12 本入り サイズ 4 サイズ 5

標準価格 各 6,780 円 (税込 7,458 円) 12 本 / パック @ 565 円 (税別)

1 本入り サイズ 4 **New!**

標準価格 850 円 (税込 935 円) / パック

医療機器届出番号 13B1X00133000052

商品名 ピュアリフレクト マイクロミラー

1 本入り ラウンド 3 ラウンド 5

標準価格 15,000 円 (税込 16,500 円) / 本

1 本入り スクエア 7 スクエア 9

標準価格 16,000 円 (税込 17,600 円) / 本

・ミラートップのみの販売となります。市販のハンドルをご使用下さい。

医療機器届出番号 13B1X00133000059

PREDATOR® DIAMONDS

商品名 プレデタージルコニア

医療機器届出番号 13B1X00133000031

Z801-018F、Z856-018F、Z862-014F、Z368-023F、Z807-018F
Z801-018M、Z856-018M、Z862-014M、Z368-023M、Z807-018M

標準価格 各7,700円(税込8,470円)/5本入 @1,540円/本

Z856-018F、Z856-018M

標準価格 各1,700円(税込1,870円)/1本入

ジルコニアに限らず
メタルボンドやメタル
クラウン等の補綴物除去
にも高い切削力を発揮

特殊接着によりダイヤ
モンドの粒子の付着が
長期間持続されるので
消耗率が低い

均等なダイヤモンドを
均一に塗布することで
高い切削率と発熱を軽減



プレデタージルコニア Z856-018F

品番	801	856	862	368	807
作業部幅 (1/10 mm)	018	018	014	023	018
作業部長 (mm)	-	9.0	7.0	5.0	5.0
FINE (ファイン)	●	●	●	●	●
MEDIUM (ミディアム)	●	●	●	●	●

ジルコニアクラウン除去用ダイヤモンドバー

PREDATOR® CARBIDE BURS

商品名 プレデターターボ

医療機器届出番号 13B1X00133000005

Special PR-3T、PR-DX

標準価格 各8,200円(税込9,020円)/10本入 @820円/本

PR-2T、PR-557T、PR-1T、PR-330T、PR-245T、PR-1557T
PR-558T、PR-35、PR-701T、PR-702T、PR-2R、PR-4R
PR-6R、PR-8R

標準価格 各4,600円(税込5,060円)/10本入 @460円/本

SL(サージカルレングス) New

標準価格 各8,200円(税込9,020円)/10本入 @820円/本
PR-2T SL、PR-1T SL、PR-557T SL、PR-2R SL

斬新な幾何学的形状を
使用しスピーディーで
スムーズな金属カット
が可能

タングステンカーバイド
一体型なので折れにくい
(PR-6R、PR-8Rは除く)

高精度に切削製造された
バーは回転軸、刃部の
正確さで振動を減少



プレデターターボ PR 2T

品番	PR-3T
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

金属除去用カーバイドバー
(切れ味 UP)

品番	PR-2T	PR-1557T	PR-1T	PR-330T	PR-245T	PR-557T	PR-558T	PR-35	PR-701T	PR-702T
作業部幅 (1/10 mm)	012	010	010	008	009	010	012	010	12.0	16.0
作業部長 (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7	3.8	0.79	3.80	4.30

金属除去用カーバイドバー

品番	PR-DX
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

ボーセレンやメタルボンド除去用
カーバイドバー (切れ味 UP)

品番	PR-2R	PR-4R	PR-6R	PR-8R
作業部幅 (1/10 mm)	010	014	018	023
作業部長 (mm)	0.83	1.23	1.57	2.05

金属除去用カーバイドバー
(PR-6R、PR-8Rは一体型ではありません)


品番	PR-2T SL	PR-1T SL	PR-557T SL	PR-2R SL
作業部幅 (1/10 mm)	012	010	010	010
作業部長 (mm)	4.0	1.9	3.7	0.83

金属除去用カーバイドバー

PRIMA® CLASSIC MOUTH MIRRORS

商品特徴

- ・可視光 (455-492nm) の範囲で高い反射率
- ・診療中のストレス軽減
- ・患者さんに早く確実な診断を提供
- ・表面反射ミラーの低価格化を実現

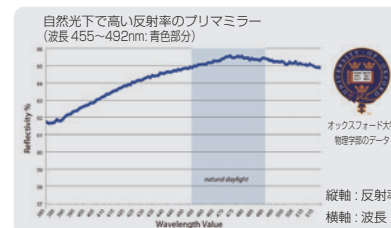

商品名 プリマミラー

医療機器届出番号 13B1X00133000042

サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5 サイズ6

標準価格 各2,800円(税込3,080円) 12個/箱 @233.4円/本

size 2
18mm

size 3
20mm

size 4
22mm

size 5
24mm

size 6
26mm

* 実寸大




KAI コーティング替刃メス DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

製造販売元: カイインダストリーズ株式会社

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し
脂肪の付着が低減されることで、
優れた切れ味が持続します。

ナイロン糸を切断するのに要する荷重

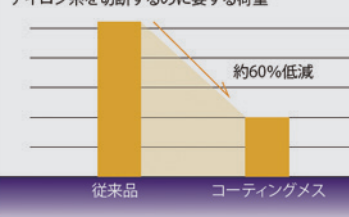

《材質》・刃物用ステンレス鋼

《仕様》・ディスポーザブル (再使用禁止)

・γ線滅菌済み

・20枚入

・10番台替刃の適合ハンドル: M3

商品名 KAI コーティング替刃メス

販売名: KAI 替刃メス

医療機器認証番号: 219ABBZX00078000

20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)

NO.10	1,000円(税込1,100円)
NO.11	1,000円(税込1,100円)
NO.12	1,000円(税込1,100円)
NO.12B	1,000円(税込1,100円)
NO.15	1,000円(税込1,100円)
NO.15C	1,000円(税込1,100円)



ドイツ製高品質インスツルメント
世界 80 カ国以上で愛用中

New! ファイバーポスト、ファイルを簡単把持 2WAY ツィーザー



使用例 1



使用例 2



使用例 3

■ 商品名 2WAYツィーザー 医療機器届出番号：13B1X00133000082
14,800円 (税込16,280円) 材質：ステンレススチール *オートクレープ対応

- ・ 一本で 2 通りの使い方が可能
- ・ 安心なセルフロックシステム
- ・ 操作による手指の負担を軽減

ファイバーポスト
対応サイズ：
φ 1.2mm



ファイル
対応サイズ：
φ 2.8mm



oro 低価格で高品質な感染予防シリーズ

Infection Control

ORO サージカルガウン (シート付)

- 厚手の不織布でしっかり感染予防
* ORO アイソレーションガウンよりさらに厚手になっています
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- 高い撥水加工
- EO 滅菌済 (シート白、シート青を含む)
- ディスポーザブル
- 材質：smms 不織布

商品名 OROサージカルガウン(シート付)

標準価格 500円 (税込550円)

OROサージカルガウン1枚、シート白2枚、
シート青1枚 (OROサージカルガウンを包んでいるシート)
*ベルトカード無し、首部分のマジックテープ無し



滅菌バッグ入り



シート白 25cm×25cm ×2枚
シート青 50cm×50cm ×1枚

ニットカフ



モデル：身長 154cm 着丈：115cm
ORO アイソレーションガウン、ORO サージカルガウン (シート付) 共通の外観

ORO アイソレーションガウン

- 厚手の不織布でしっかり感染予防
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- 高い撥水加工
- 未滅菌
- ディスポーザブル
- 材質：smms 不織布

商品名 OROアイソレーションガウン

標準価格 2,500円 (税込2,750円) /10枚入/袋 @250円/枚

ORO ヘッド&ヘッドレストカバー

- コンパクトサイズ
- 髪のボリュームがある方でもお使いいただけます
- ヘッドレストにも使用可能
- 帯電防止加工
- ディスポーザブル
- 材質：不織布

*インド製

* ISO9001 / 13485 認証


幅 13.5cm

伸張性の高い不織布

清潔でコンパクトなパッケージ

商品名 OROヘッド&ヘッドレストカバー

標準価格 800円 (税込880円) /100枚入/袋 @8円/枚

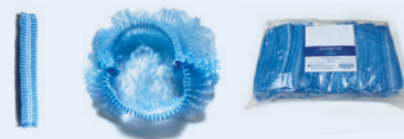

Bio エプロンは家庭ごみ、堆肥化のどちらでも
捨てられる環境に優しいエプロンです。

商品名 Bioエプロン

標準価格 3,000円 (税込3,300円) /50枚入 @60円/枚

*ディスポーザブル



フックで壁にかけられる
(耐荷重2kg以上のフックを使用)
取出ししやすい様に、1枚目の一部が
最初からパッケージの外に出ています

体全体を包む大きめサイズで安心

*180日で堆肥化します
ロール式で1枚ずつ取出せる
清潔なパッケージ



■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

NEW ! プロフィーペーストPro (HAp)

予防歯科先進国スウェーデン発 世界 50 か国以上で使用されている
PMTc ペーストのロングセラー「プロフィーペーストPro」シリーズに
ナノ粒子ハイドロキシアパタイト (HAp) 含有タイプが新登場！

NEW PRODUCT

2022 年 春 発売予定

ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有

PMTc 後もなめらかでツヤのある歯を保ちます。

RDA 197-50 ワンステップでケアタイムの短縮

- ・ 1 本でスクーリング後の一次、二次研磨・汚れ除去・つや出しまで可能
- ・ 忙しい診療時に便利
- ・ 中性の pH 値 (5~6pH)
- ・ ミント味
- ・ 粒度：100-7μm

フッ素無配合



プロフィーペーストPro シリーズ



商品名 プロフィーペーストPro (HAp)

チューブタイプ(60g)

標準価格 4,600 円 (税込 5,060 円) / 本

医療機器届出番号 13B1X00133000027

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元: クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

製造販売元: 株式会社吉田製作所

URL: <https://www.crossf.com>

E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

