


低摩擦コーティングにより切れ味が向上 コーティングにより脂肪の付着が低減され優れた切れ味が持続




原寸大

KAI コーティング 替刃メス

原寸大

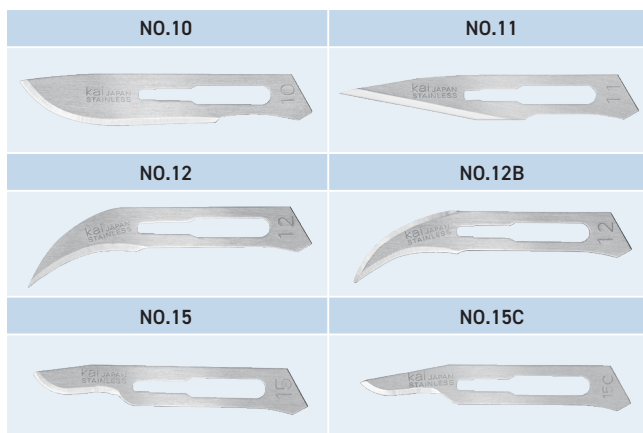

ナイロン糸を切断するのに要する荷重

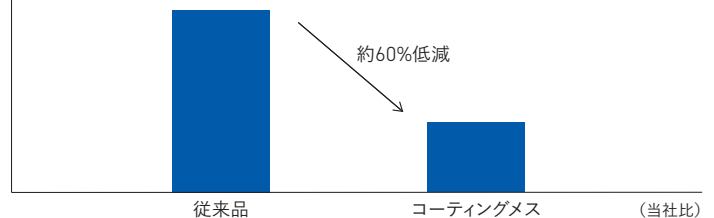

《材質》ステンレス鋼
《仕様》ディスポーザブル（再使用禁止）
γ線滅菌済 / GS1-128表示対応
10番台替刃の適合ハンドル：M-3

《定価》20枚/箱 1,000円（税込1,100円）
1枚あたり 50円（税込 55円）

※通常替刃メス（販売名：KAI 替刃メス）の取り扱いもごさい。通常替刃メスとコーティング替刃メスは同価格になります。

販売名：KAI替刃メス 医療機器認証番号：219ABBZX00078000

KAI ステンレス ナイフ ハンドル




M-3

原寸大


《仕様》未滅菌品
適合替刃NO：10番台
GS1-128 表示対応
《定価》1本 700円（税込770円）

医療機器届出番号：21B2X00002000003

KAI ブレードリムーバー

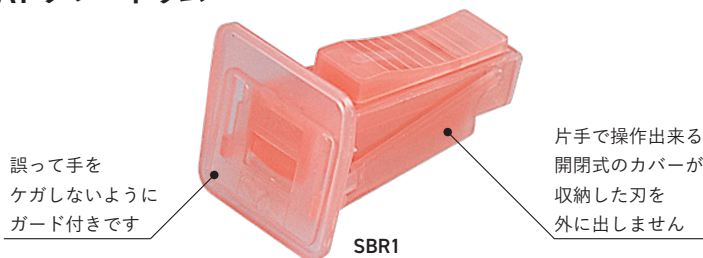

《仕様》収納枚数10～15枚
GS1-128表示対応
《定価》1個/箱 720円（税込792円）

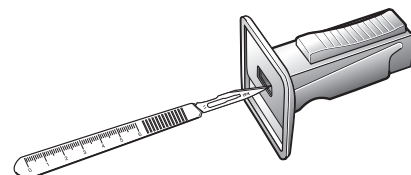


KAI コーティング スカルペル

《材質》ブレード：ステンレス鋼
《仕様》ディスポーザブル（再使用禁止）
EOG滅菌済 / GS1-128表示対応

《定価》20本/箱 2,000円（税込2,200円）
1本あたり 100円（税込 110円）


原寸大

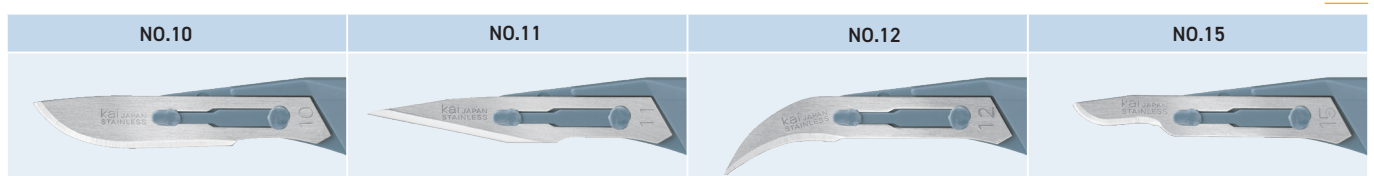

※通常スカルペル（販売名：KAI スカルペル）の取り扱いもごさい。通常スカルペルとコーティングスカルペルは同価格になります。

医療機器認証番号：219ABBZX00073000

安全で、低侵襲なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチ 特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

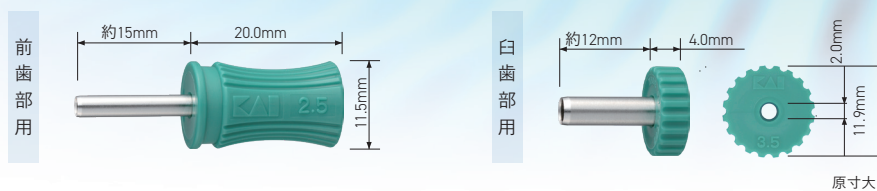

MIパンチ

MIパンチはより安全で、低侵襲(Minimal Intervention)なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチです。高い操作性を要求される口腔内での使用場所に応じて精密な治療ができるよう前歯部用と臼歯部用の2タイプを揃えました。臼歯部用は刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルも短くすることで狭い空間での操作性を向上させています。また、ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に練成充填器を当てて安定させることが可能です。前歯部用は刃の全長、ハンドルとも臼歯部用より長くしており、広いスペースでの使用に適した形状となっています。操作性、使いやすさを追求したMIパンチが先生方の安全・低侵襲なインプラント手術のお役に立つことを願っております。


《材質》ブレード：ステンレス鋼

《適用》歯科

《仕様》ディスポーザブル（再使用禁止）
Y線滅菌済 / GS1-128 表示対応

《定価》10本/箱 5,000円（税込5,500円）
1本あたり 500円（税込 550円）

使用例

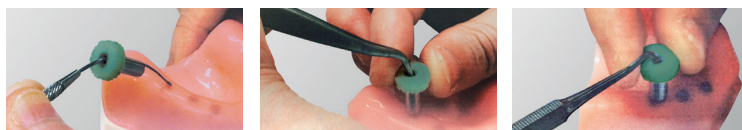

1. MIパンチを器具(エキスポローラー)に通し、センターの位置を決めます
2. 器具(鑷子)を上部の穴に入れて、MIパンチを押さえます
3. 器具(練成充填器)で安定させながら、手で回して切ります


※前歯部用MIP-A25および臼歯部用MIP-A35は販売終了しております

原寸大

	※MIP-A25(販売終了)	MIP-A35	MIP-A40	MIP-A45
前歯部用				
	※MIP-P35(販売終了)	MIP-P40	MIP-P45	MIP-P55
臼歯部用				

販売名：MIパンチ 医療機器認証番号：226ABBZX00075000

精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状 特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

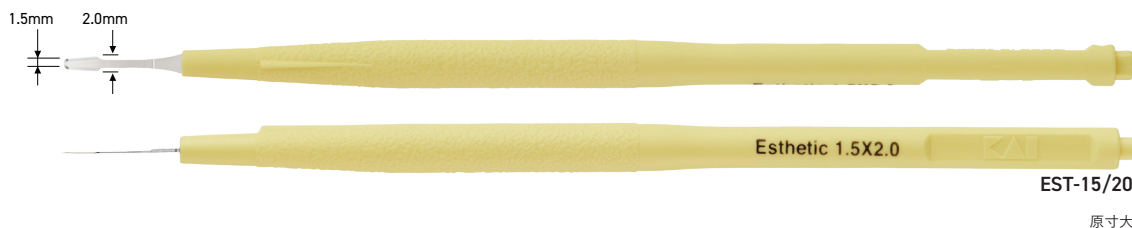

マイクロナイフ KAI エステティックナイフ

エステティックナイフは結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。先端の幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。迅速な創治癒と審美的な結果を得るために是非お役立てください。

使用例



《材質》ブレード：ステンレス鋼

ハンドル：ポリブチレンテレフタレート樹脂

《仕様》ディスポーザブル（再使用禁止）

EOG滅菌済 / GS1-128 表示対応

《定価》5本/箱 13,250円（税込14,575円）

1本あたり 2,650円（税込 2,915円）

販売名：マイクロナイフ 医療機器認証番号：219ABBZX00196000

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：カイ インダストリーズ株式会社